



Curos™

Protector de Puerto
Desinfectante

Instrucciones de uso

Tapón desinfectante para Hemodiálisis

Curos™ Stopper


Tapón Desinfectante para Conectores Luer Hembra

Desinfecta en 1 minuto. Protege conectores luer hembra hasta por 7 días.



Desprenda


el sello de aluminio de 3M™ Curos™ Stopper Tapón Desinfectante para Conectores Luer Hembra.

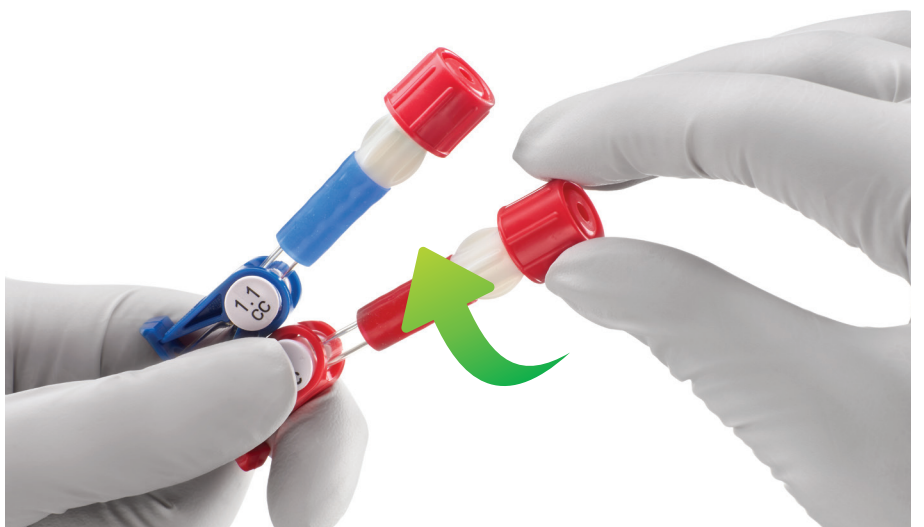


Empuje y gire

en el conector luer hembra del catéter de hemodiálisis

- ▶ Verifique que el clamp del catéter de hemodiálisis esté completamente cerrado antes de usar el tapón desinfectante
- ▶ Si el cono del catéter de hemodiálisis está visiblemente sucio, realice la desinfección activa con alcohol isopropílico (IPA) al 70% antes de volver a aplicar el tapón
- ▶ No use el tapón si el sello está roto, rasgado o perforado
- ▶ Desprenda el tapón de la tira o retire el sello de aluminio del tapón individual
- ▶ Una vez retirado el sello de aluminio, empuje y gire el tapón en dirección de las manecillas del reloj hasta que quede firme en el cono del catéter de hemodiálisis
- ▶ Para garantizar la desinfección, el tapón debe permanecer en el cono del catéter de hemodiálisis por lo menos un (1) minuto y puede mantenerse allí, brindando una barrera contra la contaminación hasta por siete (7) días, si no es removido
- ▶ El cono del catéter de hemodiálisis se podrá acceder inmediatamente después de retirar el tapón que ha estado en su lugar por un mínimo de un (1) minuto
- ▶ Deseche el tapón después de cada uso; no lo reutilice
- ▶ Coloque siempre un nuevo tapón sobre el cono del catéter de hemodiálisis después de cada uso
- ▶ Siga el protocolo de la institución para desinfectar el cono del catéter de hemodiálisis, en caso de realizar accesos secuenciales

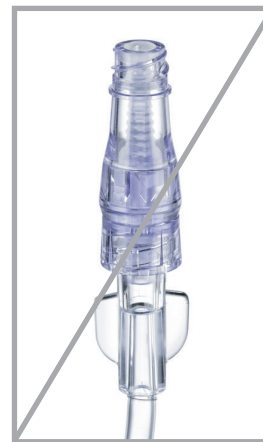

**No usar en
conectores
libres de aguja**

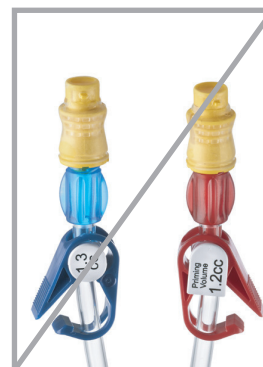

**No usar en en
conectores de
Hemodiálisis
Tego®**

ADVERTENCIA: Para evitar lesiones, utilice únicamente en el cono del catéter de hemodiálisis y asegúrese de que el tapón se encuentre firme en su lugar.

PRECAUCIÓN: Riesgo de asfixia.



División de Soluciones para el
Cuidado Crítico y Crónico
3M Cuidado de la Salud
2510 Conway Avenue
St. Paul, MN 55144 USA
1 800 228-3957
www.3M.com/Curos

Por favor recicle.
3M y Curos son marcas comerciales de 3M.
Tego® es marca registrada de ICU Medical, Inc.
3M™ Curos™ Tapón Desinfectante no está afiliado a
ICU Medical, Inc.
© 3M 2018. Todos los derechos reservados.
70-2011-6732-0

STERILE	R
---------	---

Ingrediente activo: Alcohol isopropílico (IPA) al 70%. Uso único. Disponible bajo indicación médica. Este dispositivo no está hecho con goma de látex natural ni dietil hexil ftalato (DEHF) plastificante. Consulte las instrucciones de uso, advertencias y detalles del producto en las etiquetas del dispositivo.