

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

VERSIÓN: 01


CÓDIGO: FTP-016

VIGENTE DESDE 16/07/2016

INFORMACIÓN GENERAL

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

NOMBRE GÉNÉRICO	APÓSITO HIDRATANTE DE BIOCELULOSA CELMAT® CON HIALURONATO DE SODIO
NOMBRE COMERCIAL	CELMAT® WOUND H
REGISTRO SANITARIO	INVIMA 2022DM-0026059
TIPO DE REGISTRO	IMPORTAR Y VENDER
TITULAR	CARSON PHARMA COLOMBIA SAS
FABRICANTE	BOWIL BIOTECH SP. Z O. O
TIPO DE PRODUCTO	DISPOSITIVO MÉDICO NO INVASIVO
RIESGO	III
REFERENCIAS	10cm x 10cm / 10cm x 20cm / Mascarilla
VIDA ÚTIL	2 AÑOS

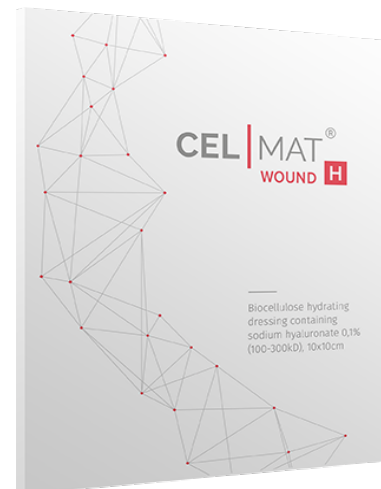

DESCRIPCIÓN

Membrana hidratante de biocelulosa en nanoestructura porosa 3D con hialuronato de sodio al 95%, el cual estimula la activación de las células del sistema inmunitario, fibroblastos, queratinocitos, promoviendo la granulación, epitelización y cierre de la herida.

CARACTERÍSTICAS

CELMAT® WOUND H es una membrana con bionanocelulosa, material completamente natural, sin propiedades tóxicas, no irritante, no alergénico y totalmente biodegradable. Se distingue por su flexibilidad, resistencia mecánica elevada y una excelente hidratación (de aproximadamente 96%) por lo que asegura un ambiente húmedo que favorece los procesos de regeneración. El efecto refrescante conseguido es muy importante para el confort y para aliviar el dolor. Una permeabilidad selectiva, limitada solo a algunos gases y líquidos asegura por su parte un intercambio gaseoso y una termorregulación adecuada, favoreciendo los procesos de regeneración. El hialuronato de sodio contribuye a la hidratación de la piel, crea una capa de protección sobre la epidermis, tonifica la piel y favorece su reconstrucción.

USOS


Puede ser usado en el manejo de heridas crónicas, incluyendo heridas en estadio IV, así como úlceras por presión, úlceras por estasis venosa, quemaduras de primer y segundo grado, cortes, abrasiones y laceraciones de piel.

RECOMENDACIONES DE USO


La frecuencia de aplicación de CelMat® en heridas debe consultarse con un médico. Dispositivo médico clase III para uso profesional.




Limpie muy bien el lugar de aplicación de la membrana

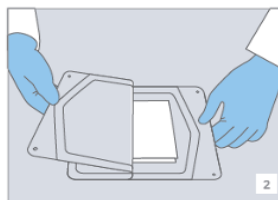

Abra el empaque estéril.

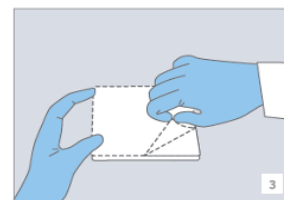

Retire los protectores de ambos lados.

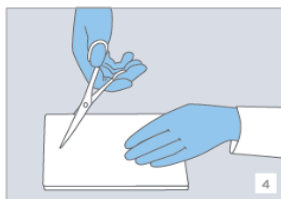

Si es necesario, la membrana puede ser ajustada al tamaño deseado, utilizando tijeras estériles.



Cualquier lado de la membrana puede ser usado.



Opcionalmente, la membrana CelMat® puede ser cubierta con un apósito secundario para prolongar el tiempo de aplicación.



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

VERSIÓN: 01

CÓDIGO: FTP-016

VIGENTE DESDE 16/07/2016

COMPOSICIÓN	Biocelulosa, hialuronato de sodio y agua purificada.		
PRESENTACIÓN COMERCIAL	Están disponibles en los siguientes tamaños: 10cm x 10cm. Caja por 1 unidad. 10cm x 20cm. Caja por 1 unidad. Mascarilla. Caja por 1 unidad.		
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	Almacenar en un lugar fresco y seco a una temperatura entre 10°C a 30°C.		
CÓDIGO DE BARRAS			
CELMAT® WOUND H 10cm x 10cm	CELMAT® WOUND H 10cm x 20cm	CELMAT® FACE H	
 5 905279 374928	 5 905279 374935	 5 905279 374911	