

RADIATION ATTENUATION GLOVES

7 $\frac{1}{2}$

2021/02/03 LOT 2012563904

2025/02/03 REF 20873075

Internal number: 100870 5 Prs



(01)29310201043726(17)250203(30)0005(10)2012563904(92)100870

ENCORE[®]

Radiation Attenuation Gloves

Powder-Free
Latex
Specialty Gloves



5 PAIRS
5 PARES

Ansell

ENCORE[®]

Radiation Attenuation Gloves



Keep Dry



Single use only



EU Legal Manufacturer:
Ansell Healthcare Europe N.V.
Internationalelaan 55,
1070 Brussels, BELGIUM

Manufacturer & Authorized
Representative in Malaysia:
Ansell N.P. Sdn Bhd
Lot 80, Air Keroh,
Industrial Estate,
75450 Melaka, Malaysia

US Legal Manufacturer/Fabricant:
Ansell Healthcare Products LLC
2301 Robb Drive, Reno, NV 89523, USA
US: 732-345-5400, CA: 450-266-1850

Ansell Ltd
Level 3, 678 Victoria Street
Richmond, Victoria, 3121
Australia

EN Primary Material: Bismuth Oxide in Natural Rubber Latex

This latex glove contains 50 micrograms or less of total water-extractable protein per gram. Sterile unless this package is opened or damaged.

CAUTION: This product contains natural rubber latex which may cause allergic reactions, including anaphylactic responses.

CAUTION: This glove is not intended for use in the direct or primary x-ray beam. The purpose of this radiation protective glove is to protect the hands from scattered secondary radiation exposure originating from the x-ray beam during fluoroscopic procedures.

Gamma Sterilized, Minimum 25kGy.

FR Matière Première: Oxyde de Bismuth allié au caoutchouc de latex naturel

Ce gant de latex contient 50 microgrammes ou moins du total des protéines extractibles de l'eau par gramme.

Usage unique seulement.

ATTENTION: Ce produit contient du latex de caoutchouc naturel qui peut causer des réactions allergiques, incluant des réactions anaphylactiques.

ATTENTION: Ce gant n'est pas conçu pour une exposition directe au faisceau primaire du rayon-x. Ce gant de protection aux radiations est fabriqué dans le but de protéger les mains de l'utilisateur à l'exposition de rayons secondaires provenant du faisceau primaire du rayon-x lors de procédures fluoroscopiques.

Sterilisé par rayons gamma, minimum 25kGy.

ES Material Primario: Óxido de Bismuto en látex de caucho natural

Este guante de látex contiene 50 microgramos o menos de proteínas extraíbles con agua por gramo. Para un solo uso. El artículo es estéril a menos que este paquete esté abierto o dañado.

PRECAUCIÓN: Este producto contiene látex de caucho natural que puede causar reacciones alérgicas, incluso reacciones anafilácticas.

PRECAUCIÓN: No se debe intentar usar este guante para el uso en la viga de radiografía directa o primaria.

El propósito de este guante es para proteger las manos contra la exposición de radiación secundaria dispersada que sean originada de la viga de radiografía durante procedimientos fluoroscópicos.

Sterilisation Gamma, Minimum 25kGy.

Importado y Distribuido por ANSELL COLOMBIA S.A.S
Carrera 16 No. 97-46 piso 6, Bogotá D.C., Colombia
Registro No. INVIMA 20230M-0028912
"ENCORE RADIATION ATTENUATION GLOVE"

Ansell, ® and ™ are trademarks owned by Ansell Limited or one of its affiliates.
© 2019 Ansell Limited. All Rights Reserved.

Made in Malaysia



Recyclable Packaging

Ansell

RADIATION ATTENUATION GLOVES

EN Primary Material: Bismuth Oxide in Natural Rubber Latex

This latex glove contains 50 micrograms or less of total water-extractable protein per gram. Sterile unless this package is opened or damaged

CAUTION: This product contains natural rubber latex which may cause allergic reactions, including anaphylactic reactions.
CAUTION: This glove is not intended for use in the direct or primary x-ray beam. The purpose of this radiation protection glove is to protect the hands from scattered secondary radiation exposure originating from the x-ray beam during fluoroscopic procedures.

Gamma Sterilized, Minimum 25kGy

FR Matière Première: Oxyde de Bismuth allié au caoutchouc de latex naturel

Ce gant de latex contient 50 microgrammes ou moins du total des protéines extractibles de l'eau par gramme. Usage unique seulement

ATTENTION: Ce produit contient du latex de caoutchouc naturel qui peut causer des réactions allergiques, incluant des réactions anaphylactiques.

ATTENTION: Ce gant n'est pas conçu pour une exposition directe au faisceau primaire du rayon-x. Ce gant de protection contre les radiations est fabriqué dans le but de protéger les mains de l'utilisateur à l'exposition de rayons secondaires provenant du faisceau primaire du rayon-x lors de procédures fluoroscopiques.

Stérilisé par rayons gamma, minimum 25kGy

ES Material Primario: Óxido de Bismuto en látex de caucho natural

Este guante de látex contiene 50 microgramos o menos de proteínas extraíbles con agua por gramo. Para un sólo uso. El artículo es estéril a menos que este paquete esté abierto o dañado

PRECAUCIÓN: Este producto contiene látex de caucho natural que puede causar reacciones alérgicas, incluso reacciones anafilácticas.

PRECAUCIÓN: No se debe intentar usar este guante para el uso en la viga de radiografía directa o primaria.

El propósito de este guante es para proteger las manos contra la exposición de radiación secundaria dispersada que origina de la viga de radiografía durante procedimientos fluoroscópicos.

Stérilisation Gamma, Minimum 25kGy

Importado y Distribuido por ANSELL COLOMBIA S.A.S.
Carrera 16 No. 97-46 piso 6, Bogotá D.C, Colombia
Registro No. INVIMA 2023DM-0026812
"ENCORE RADIATION ATTENUATION GLOVE"

Ansell, ® and ™ are trademarks owned by Ansell Limited or one of its affiliates.
© 2019 Ansell Limited. All Rights Reserved.



Recyclable Pa

Made in Malaysia


Anse

7 1 1/2 LOT 2012563904
2 2021-02-03
2025-02-03
REF 20873075

1101

ENCORE®

Radiation Attenuation Gloves

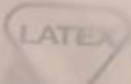

Powder-Free



1 PAIR / 1 PAR

EN Primary Material: Bismuth Oxide in Natural Rubber Latex

This latex glove contains 50 micrograms or less of total water-extractable protein per gram.

CAUTION: This Product Contains Natural Rubber Latex Which May Cause Allergic Reactions, including Anaphylactic Responses.

CAUTION: This glove is not intended for use in the direct or primary x-ray beam. The purpose of this radiation protective glove is to protect the hands from scattered secondary radiation exposure originating from the x-ray beam during fluoroscopic procedures.

Gamma Sterilized, Minimum 25kGy

FR Matière Première: Oxyde de Bismuth allié au caoutchouc de latex naturel

Ce gant de latex contient 50 microgrammes ou moins du total des protéines extractibles de l'eau par gramme.

ATTENTION: Ce produit contient du latex de caoutchouc naturel qui peut causer des réactions allergiques, incluant des réactions anaphylactiques.

ATTENTION: Ce gant n'est pas conçu pour une exposition directe au faisceau primaire du rayon-x. Ce gant de protection aux radiations est fabriqué dans le but de protéger les mains de l'utilisateur à l'exposition de rayons secondaires provenant du faisceau primaire du rayon-x lors de procédures fluoroscopiques.

Sterilisé par rayons gamma, minimum 25kGy

ES Material Primario: Óxido de Bismuto en látex de caucho natural

Este guante de látex contiene 50 microgramos o menos de proteínas extraíbles con agua por gramo.

PRECAUCIÓN: Este producto contiene látex de caucho natural que puede causar reacciones alérgicas, incluso reacciones anafilácticas.

PRECAUCIÓN: No se debe intentar usar este guante para el uso en la viga de radiografía directa o primaria. El propósito de este guante es para proteger las manos contra la exposición de radiación secundaria dispersada que sean originada de la viga de radiografía durante procedimientos fluoroscópicos.

Sterilisation Gamma, Minimum 25kGy

Attenuation Levels / Niveaux d'atténuation / Niveles de atenuación

Radiation Beam Energy Level Niveau d'énergie du faisceau Nivel de energía de la viga	Skin Dose Reduction* Réduction de la dose cutanée* Reducción de la dosis de la piel*
60 kVp	53.70%
80 kVp	43.20%
100 kVp	34.70%
120 kVp	29.30%

Uncertainty of measurement $\leq 4\%$

*ASTM 2547-18

STERILE



Single Use only

EU Legal Manufacturer:
Ansell Healthcare Europe N.V.,
Internationalelaan 55,
1070 Brussels, BELGIUM

Manufacturer & Authorized
Representative in Malaysia:
Ansell N.P. Sdn Bhd
Lot 80, Air Keroh,
Industrial Estate,
75450 Melaka, Malaysia

US Legal Manufacturer/Fabricant:
Ansell Healthcare Products LLC,
2301 Robb Drive, Reno, NV 89523, USA
US: 732-345-5400 CA: 450-266-1850

Ansell Ltd
Level 3, 678 Victoria Street
Richmond, Victoria, 3121
Australia
PK50250

Ansell

Made in Malaysia

Ansell

7 1 1/2 **LOT** 2012563904
2021-02-03
2025-02-03
REF 20873075
 11 01

ENCORE®

Radiation Attenuation Gloves

Powder-Free



EN Primary Material: Bismuth Oxide in Natural Rubber Latex

This latex glove contains 50 micrograms or less of total water-extractable protein per gram.

CAUTION: This Product Contains Natural Rubber Latex Which May Cause Allergic Reactions, including Anaphylactic Responses.

CAUTION: This glove is not intended for use in the direct or primary x-ray beam. The purpose of this radiation protective glove is to protect the hands from scattered secondary radiation exposure originating from the x-ray beam during fluoroscopic procedures.

Gamma Sterilized, Minimum 25kGy

FR Matière Première: Oxyde de Bismuth allié au caoutchouc de latex naturel

Ce gant de latex contient 50 microgrammes ou moins du total des protéines extractibles de l'eau par gramme.

ATTENTION: Ce produit contient du latex de caoutchouc naturel qui peut causer des réactions allergiques, incluant des réactions anaphylactiques.

ATTENTION: Ce gant n'est pas conçu pour une exposition directe au faisceau primaire du rayon-x. Ce gant de protection aux radiations est fabriqué dans le but de protéger les mains de l'utilisateur à l'exposition de rayons secondaires provenant du faisceau primaire du rayon-x lors de procédures fluoroscopiques.

Stérilisé par rayons gamma, minimum 25kGy

ES Material Primario: Óxido de Bismuto en látex de caucho natural

Este guante de látex contiene 50 microgramos o menos de proteínas extraíbles con agua por gramo.

PRECAUCIÓN: Este producto contiene látex de caucho natural que puede causar reacciones alérgicas, incluso reacciones anafilácticas.

PRECAUCIÓN: No se debe intentar usar este guante para el uso en la viga de radiografía directa o primaria. El propósito de este guante es para proteger las manos contra la exposición de radiación secundaria dispersada que sean originada de la viga de radiografía durante procedimientos fluoroscópicos.

Estérilización Gamma, Minimum 25kGy

RADIATION ATTENUATION

Attenuation Levels / Niveaux d'atténuation / Niveles de atenuación	
Radiation Beam Energy Level Niveau d'énergie du faisceau Nivel de energía de la viga	Skin Dose Reduction* Réduction de la dose cutanée* Reducción de la dosis de la piel*
60 kVp	53.70%
80 kVp	43.20%
100 kVp	34.70%
120 kVp	29.30%

Uncertainty of measurement $\leq 4\%$

*ASTM 2547-18

STERILE



Single
use only

EU Legal Manufacturer:
Ansell Healthcare Europe N.V.
Internationalelaan 55,
1070 Brussels, BELGIUM

Manufacturer & Authorized
Representative in Malaysia:
Ansell N.P. Sdn Bhd
Lot 80, Air Keroh,
Industrial Estate,
75450 Melaka, Malaysia

US Legal Manufacturer/Fabricant:
Ansell Healthcare Products LLC
2301 Robb Drive, Reno, NV 89523, USA
US: 732-345-5400 CA: 450-266-1850

Ansell Ltd
Level 3, 678 Victoria Street
Richmond, Victoria, 3121
Australia
PK50250

Ansell

Made in Malaysia

Ansell