

Apósito autoadherente para manejo de cicatrices.

- Probado clínicamente para reducir y prevenir las cicatrices.
- No se necesita ninguna fijación adicional⁵.
- Se adapta bien a los contornos del cuerpo⁶.
- Se puede usar durante las actividades diarias⁷.

Mepiform® es un apósito de silicona suave autoadhesivo para el manejo de cicatrices. Está diseñado para tratamiento de cicatrices hipertróficas y queloides nuevas y antiguas. También se puede utilizar como terapia profiláctica en heridas cerradas para prevención de cicatrices hipertróficas o queloides.



Capa de poliuretano y tejido de viscosa sin tejer

- Respirable.
- Impermeable al agua.

SafetaC[®]
TECHNOLOGY

- tecnología de suave silicona adhesiva
- minimiza el dolor y trauma al remover

Safetac® Menos trauma. Menos dolor.™

Apósitos con Tecnología Safetac® son atraumáticos en la remoción¹. Estos apósitos minimizan el trauma en la herida y la piel perilesional^{2,3}, lo que disminuye el dolor en el paciente y el riesgo de maceración sellando los bordes de la herida.

Para más información visite www.molnlycke.com



El desprendimiento de células de la piel ocurre con adhesivos tradicionales



No ocurre desprendimiento de células de la piel con Tecnología Safetac®

Mepiform®

Beneficios de Mepiform®

Aprobado clínicamente para reducir y prevenir las cicatrices.

- Se adhiere suavemente al tejido y la piel frágiles, lo que reduce los cambios de apósitos dolorosos.
- Ahorre dinero a largo plazo porque una lámina puede ser utilizado durante varios días (promedio cambio cada 7 días).
- Cómodo de usar porque se adapta bien a los contornos del cuerpo.
- Delgado y flexible.

¿Cómo actúa Mepiform®?

Empíricamente, se ha demostrado que la silicona tópica tiene un impacto positivo en cicatrices hipertróficas y queloides^{5,8}. Puede llevar desde 3 meses hasta más de un año para minimizar una cicatriz antigua, dependiendo de la condición del tejido cicatricial. De manera óptima, Mepiform® debe usarse las 24 horas del día. Se recomienda que Mepiform® se remueva una vez al día, por ejemplo, al bañarse, para su inspección y lavado de la piel. Para el tratamiento profiláctico, Mepiform debe usarse durante 2 a 6 meses dependiendo del estado de la cicatriz.


Áreas de uso

Mepiform® está diseñado para el tratamiento de cicatrices hipertróficas nuevas y antiguas, queloides y heridas cerradas. Mepiform® también puede prevenir la formación de cicatrices hipertróficas y queloides.

Nota

En caso de maceración o erupciones, deje que la piel descanse hasta que desaparezcan los síntomas. Continuar el tratamiento y aumentar gradualmente el tiempo de tratamiento por día. Mepiform® tiene un factor de protección ultravioleta (UPF) de 5⁹.


Forma de utilización de Mepiform®

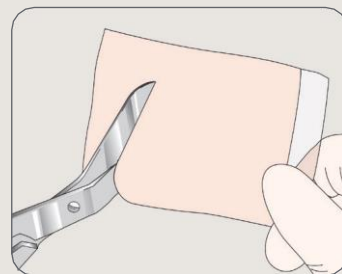

1. Retire la película posterior. Si es necesario, corte a la forma requerida.



2. Aplique Mepiform® sobre la cicatriz. Asegúrese de que la piel esté limpia, seca y libre de pomadas, etc.

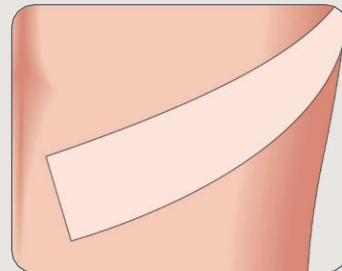

3. Vuelva a aplicar después de limpiar diariamente la piel.



CÓDIGO	TAMAÑO (CM)	UNIDADES POR CAJA	REG. INVIMA
293199	4 x 30	5	2021DM-0007550-R1
293299	5 x 7,5	5	2021DM-0007550-R1
293400	10 x 18	5	2021DM-0007550-R1

PRESENTACIONES Mepiform®

Referencias: 1. White, R. A multinational survey of the assessment of pain when removing dressings. Wounds UK 2008; 4: 1, 14-22. 2. Dahlström, K.K. A new silicone rubber dressing used as a temporary dressing before delayed split skin grafting. A prospective randomised study. Scandinavian Journal of Plastic Reconstructive Surgery and Hand Surgery 1995; 29(4):325-327. 3. Waring, M., Biefeldt, S., Matzold, K.P., Butcher, M. An evaluation of the skin stripping of wound dressing adhesives. Journal of Wound Care 2011; 20(9):412-422. 4. White, R. Evidence for atraumatic soft silicone wound dressing use. Wounds UK 2005; 1: 3, 104-109. 5. Colom Majan, J.L. Evaluation of a self-adherent soft silicone dressing for the treatment of hypertrophic post-operative scars. Journal of Wound Care 2006; 15(5):193-196. 6. Meuleneire, F. Using a soft silicone dressing (Mepiform) to prevent scarring in an acute traumatic wound. Wounds UK 2007; 3(4):134-135. 7. Saulsberry, C.M., Abney, S.B., Landry, K.N. An evaluation of a new silicone dressing for the management of hypertrophic scars. Poster presentation at the 12th Symposium on Advanced Wound Care and Medical Research Forum on Wound Repair, Anaheim, California, United States of America, 1999. 8. Mustoe, T.A., Cooter, R.D., Gold, M.H., Hobbs, R., Ramelet, A.A., Shakespeare, P.G. et al., Stella, M., Teot, L., Wood, F.M., Ziegler, U.E., for the International Advisory Panel on Scar Management. International clinical recommendations on scar management. Plastic and Reconstructive

Distribuidor Autorizado
CROSSWELL DE COLOMBIA S.A.S.
NIT. 900.968.509-6
Carrera 38 A No. 6-54 - Cali
Calle 125 No. 21 A - 27 Of. 301 - Bogotá
e-mail: servicioalcliente@crosswellcol.com



Crosswell de Colombia S.A.S.

Mölnlycke®
www.molnlycke.com