

Accu-Chek® SoftClix

Suave, fácil de usar y confiable

El sistema Accu-Chek® SoftClix posee tecnología Clixmotion®, la cual hace que la punción sea suave, minimizando el daño en la piel y en las terminaciones nerviosas.



1. PREPARAR

Retire la tapa, inserte una lanceta, quite el protector de la lanceta y vuelva a colocar tapa

2. ELEGIR

La profundidad de punción

4. PUNCIONAR

Presione el botón disparador

3. PRESIONAR

Presione el émbolo hacia abajo; el botón disparador se torna amarillo



800 471 800



@AccuChekChile



/AccuChekChile



/AccuChekChile

ACCUCHEK®

Ficha Técnica: Accu-Chek® SoftClix⁽¹⁾

Lancetero Accu-Chek® SoftClix

Profundidad

Tecnología

Características

11 niveles de punción

ClixMotion®

Función para expulsar la lanceta usada

Lancetas Accu-Chek® SoftClix

Características

Diámetro

Rango de profundidad

Presentaciones

Lanceta tribicelada, cubierta de silicona

0,4 mm (28 G)

0,8 a 2,3 mm


Accu-Chek® SoftClix x 25

Accu-Chek® SoftClix x 200



Tecnología Clixmotion®

- **Sin Vibración**
ni al puncionar
ni al retraer.
- La lanceta logra una detención suave y retrocede de inmediato.

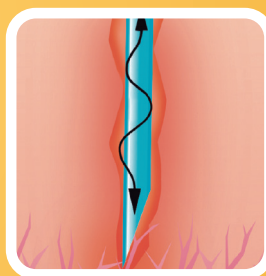

Tecnología convencional

- **Vibración**
causa dolor al dañar los tejidos.
- La lanceta se detiene bruscamente y rebota.

Referencia:

(1) Manual de Producto Accu-Chek® SoftClix

Para mayor información visite www.accu-chek.cl

o llámanos al 800 471 800 Servicio de Atención al Cliente Accu-Chek®

ACCUCHEK®, Accu-Chek® SoftClix y Clixmotion® son marcas registradas de Roche. © 2012 Roche Diagnostics.

Material revisado y aprobado por Roche Chile Ltda.
Av. Cerro El Plomo 5630 Piso 12, Las Condes, Santiago, Chile.
Fono (56-2) 2441 3200

Todos los derechos reservados.

Está prohibida su reproducción total o parcial sin previa autorización de Roche Chile Ltda.



www.accu-chek.cl

ACCUCHEK®