

3M ESPE

Sistema de Terminado y Pulido
Sof-Lex



Sof-Lex



Sof-Lex

Ahora, el renacimiento continúa... al impulsar la innovación al máximo con el Cepillo de Terminado y Pulido Sof-Lex Brush.

3M ESPE es un líder reconocido en innovación dental. El Sistema de Terminado y Pulido Sof-Lex™, introducido a mediados de los setenta, representó una revolución, ofreciendo al odontólogo la solución esencial en el terminado avanzado de restauraciones.

Con un sistema de discos codificados por colores, tiras y mandriles de uso sencillo, el sistema Sof-Lex continúa proporcionando resultados únicos y eficientemente logrados.

Presentamos el Sistema de Terminado y Pulido Sof-Lex™ Brush

El Sistema de Terminado y Pulido Sof-Lex Brush combina los procedimientos de terminado y pulido de las restauraciones posteriores de resina que alguna vez fueron separados, en un solo y sencillo paso. Ya no es necesario detenerse para intercambiar formas o granos, con ello se ahorra tiempo y esfuerzo –haciendo los procedimientos restaurativos más eficientes.



Las cerdas del cepillo contienen abrasivos de óxido de aluminio para un pulido de alta calidad. La suavidad de sus cerdas elastoméricas no lastima el tejido gingival y se ajusta a las anatomías cóncavas y convexas brindando un terminado uniforme, similar al de los discos Sof-Lex.



El Sistema de Terminado y Pulido Sof-Lex Brush es también esterilizable en autoclave. El cepillo provee el resultado superior que usted demanda –en menos tiempo y con menos esfuerzo del que imagina.



Discos y Tiras de Terminado y Pulido Sof-Lex™



Compruebe los excelentes resultados

Con granos que van de grueso a superfino, claramente codificados por colores para un procedimiento sencillo, rápido y de fácil secuencia, así como discos *pop-on/off* intercambiables.

Discos Sof-Lex

■ Discos Reversibles

Hacen fácil la alineación del disco para pulir distintas superficies.

■ Intercambio de Discos Fácil y Rápido

Simplemente inserte, asegure o remueva el disco del mandril, sin necesidad de alinearlo.

■ Codificación por Colores

Secuencia de oscuro (grueso) a claro (superfino) para un procedimiento sencillo, seguido paso a paso.

■ Dos Tamaños

Para una variedad de necesidades. 13mm (1/2 de pulgada) o 9mm (3/8 de pulgada).

■ Superficie Abrasiva Maximizada

El mandril es de perfil bajo. El disco posee un ojillo redondo.

■ Opción de disco Grosor y Flexibilidad

Aplicable a una variedad de usos, con una construcción regular o extra delgada.

Tiras Sof-Lex

Para terminar y pulir áreas interproximales, las tiras de pulido Sof-Lex redondean el sistema.

■ Fácil de Insertar

El abrasivo posee una brecha central en la tira para una fácil inserción interproximal sin abrasionar los contactos.

■ Dos granos por Tira

Cada tira desempeña dos funciones para ahorrar tiempo.

■ Codificadas por Colores

Con secuencia de oscuro a claro para un procedimiento sencillo, seguido paso a paso

■ Selección de Granos Abrasivo y Anchos

Una selección de cuatro granos y dos anchos.

■ Resistente al Desgarre

Con base de poliéster resistente al desgarre mientras mantiene su flexibilidad siendo gentil con la gingiva.

Discos de Contorneado y Pulido Extra Fino Sof-Lex™



Discos de Contorneado y Pulido Sof-Lex™



Tiras de Terminado y Pulido Sof-Lex™



Sof-Lex

Los discos y las tiras Sof-Lex proveen de resultados excepcionales, comprobados por largo tiempo con ventajas en ahorro de tiempo.

Productos para Restauraciones

Filtek™ Supreme

El Restaurador Universal con Nanotecnología 3M™ ESPE™ Filtek™ Supreme combina la fuerza de un híbrido y la belleza de un micro-relleno.

- **Gran variedad de tonos y opacidades.**

Cuatro diferentes opacidades: dentina, cuerpo, esmalte y traslúcido.

- **Se pule fácilmente y retiene el pulido mejor que nunca**


Crea un pulido brillante y durable, comparable con las mejores resinas de microrrelleno.

- **Fuerza y duración mejorada.**

Provee de fuerza y resistencia al desgaste aun en las restauraciones posteriores más difíciles.

- **Fluorescencia.**

Contribuye a lograr una restauración con aspecto natural.

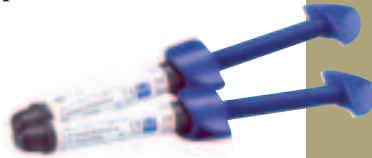

Elipar™ FreeLight 2

Inigualables características de la nueva lámpara de fotopolimerizado 3M™ ESPE™ Elipar™ FreeLight.

- **Mismo desempeño en la mitad de tiempo.**

Reducción del 50% en los tiempos de polimerización recomendados por los fabricantes de productos fotocurables gracias a una intensidad de luz de aproximadamente 1000 mW/cm.

- **Modo exponencial.**

Son agregados 5 segundos de luz continua con intensidad en incremento.

- **Emisión de luz constante**

Microprocesador integrado que asegura una emisión constante de luz.

- **Polimerización efectiva**

La luz emitida por la tecnología LED coincide con el espectro de absorción de los sistemas fotoiniciadores usados con mayor frecuencia.

- **Diseño ergonómico**

Ligera y fácil de manejar. Mayor comodidad para usted y sus pacientes.

- **Medidor de intensidad integrado**

- **Guías de luz anguladas**

Las guías de luz se pueden girar 360° para llegar a los lugares más difíciles.

- **Portátil**


Ligera e inalámbrica.

- **Tiempos de polimerización variables**

5, 10, 15 y 20 segundos en modo estándar o modo de rampa. Señal auditiva cada 5 segundos.

- **No requiere foco halógeno**

No se calienta. No tiene ventilador. No hace ruido.

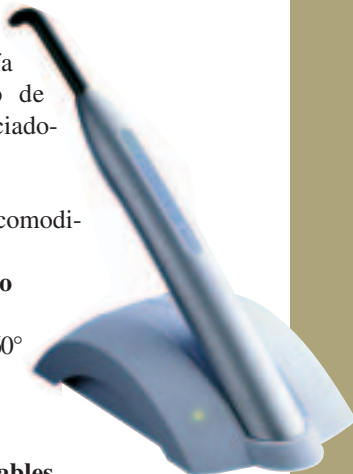

Adhesivos

Adper™ Prompt™

El adhesivo de auto-grabado 3M™ ESPE™ Adper™ Prompt™ le permite grabar, aplicar primer y adherir en un solo paso, todo en segundos. Su nueva química le proporciona una excelente fuerza adhesiva a la estructura dental. También provee de una alta viscosidad, lo que resulta en una capa uniforme y de mayor consistencia; además, su tecnología de auto-grabado reduce la probabilidad de sensibilidad post-operatoria.

Este adhesivo para todo tipo de restauraciones directas se encuentra disponible en presentación Vial (de dos botellas) y un solo paso: Adper Prompt, y en presentación unidosis: 3M™ ESPE™ Adper™ Prompt™ L-Pop™.




Adper™ Single Bond

Alta fuerza de adhesión y composición química única en su clase. Usted puede confiar en el Sistema Adhesivo 3M™ ESPE™ Adper™ Single Bond para una excelente adhesión a la dentina y al esmalte, en todo tipo de restauraciones directas (resina compuesta, amalgama fraguada) e indirectas con nuestra familia de cementos 3M™ ESPE™ RelyX™ (metalcerámicos y materiales cerámicos), así como para el tratamiento de las superficies hipersensibles.

Su envase, diseñado con tapa abrefácil, le permite abrir la botella con una sola mano. Este envase brinda un dispensado de material exacto, con lo que se evita el desperdicio de adhesivo por derramamientos. El color de la botella deja ver el contenido, proporcionando un mejor control del remanente de adhesivo.



Discos de Contorneado y Pulido Sof-Lex™

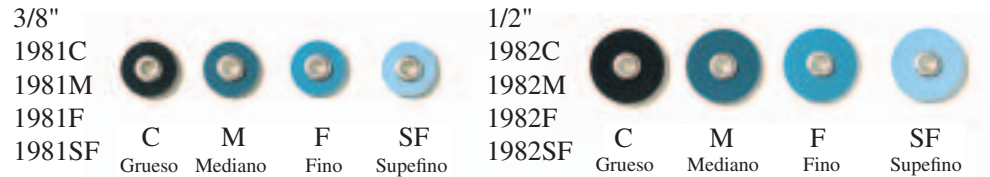

Discos de Contorneado y Pulido Extra Fino (XT) Sof-Lex™




Kit de Discos Sof-Lex™

No. de artículo	Información del producto
1980	Kit de Discos de Contorneado y Pulido Sof-Lex™ 30 discos Sof-Lex , 3/8" de diámetro C, M, F, SF (grueso, medio, fino y superfino), 30 discos Sof-Lex , 1/2" de diámetro C, M, F, SF (grueso, medio, fino y superfino), 1 mandril RA.
2380	Kit de Discos de Contorneado y Pulido Extra Finos Sof-Lex™ 30 discos Sof-Lex , 3/8" de diámetro C, M, F, SF (grueso, medio, fino y superfino), 30 discos Sof-Lex extra finos, 1/2" de diámetro C, M, F, SF (grueso, medio, fino y superfino), 1 mandril RA.

Mandril de Discos Sof-Lex™

No. de artículo	Información del producto
1983 RA	3 mandriles RA
1983 HP	3 mandriles HP
1983 FG	3 mandriles FG

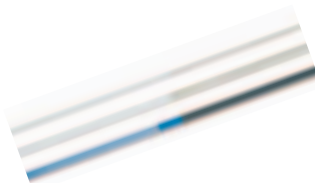

Tiras de Terminado y Pulido Sof-Lex™

No. de artículo	Información del producto
1954N	C/M grueso/mediano-angosto 100 tiras dobles
1954	C/M grueso/mediano 150 tiras dobles
1956	F/SF fino/superfino 120 tiras dobles



Paquete de Repuestos: Sof-Lex™ Brush

Sistema de Terminado y Pulido Sof-Lex™ Brush

No. de artículo	Información del producto
1751-A	Paquete de Repuestos: Sof-Lex™ Brush 12 Repuestos de Sof-Lex Brush.
1755 RA-A	Mandriles RA* 2 Mandriles RA para Sistema de Terminado y Pulido Sof-Lex Brush.

*Nota: Los mandriles para cepillo no son compatibles para discos.

Nota: Algunos de los productos y/o presentaciones no están disponibles en todos los países.

3M ESPE

Dental Products

3M Center
Building 275-2SE-03
St. Paul, MN 55144-1000
USA



Papel reciclado

Impreso en EE.UU.
© 3M ESPE 2003

www.3MESPE.com/LAdental

3M 2003, 3M, ESPE, Sof-Lex, Elipar, Filtek, Scotchbond, Adper, Prompt, L-Pop y RelyX son marcas registradas de 3M o 3M ESPE AG.
70-2009-3555-2