

Soluciones Dentales

3M™ Sof-Lex Diamond Espirales



Agosto 7, 2025

FICHA TÉCNICA

Descripción:

Sof-Lex Diamond consta de 2 espirales reutilizables, fabricados con un elastómero termoplástico. Una impregnada con partículas abrasivas de óxido de aluminio (color beige), espiral de Pre-pulido; y la otra, con partículas de diamante (color rosado), espiral de Pulido. Su forma única y flexible de espiral permite que se adapte a todas las superficies dentales, sin borrar la anatomía del diente, pudiendo utilizarse en todas las caras del diente, incluso en caras oclusales y dientes texturados. Utiliza el mismo portadiscos que los Discos Sof-Lex


Características y Beneficios

Excelente Estética & Alto Pulido • Brillo igual que una pasta de diamante, en un Sistema de ruedas espirales Única Forma Flexible • Se adapta a todas las superficies y caras de los dientes. SIN BORRAR la anatomía del diente • Rápido y fácil de usar Multi-Usos • Puede ser esterilizado (autoclave) y reutilizado hasta 5 veces.

Indicaciones:

Restauraciones Directas • Restauraciones de composites • Restauraciones de Vidrio ionómeros • Materiales como los Bisacryl Restauraciones Indirectas • De Composite • De Restaurador Lava Ultimate CAD/CAM • Metales Preciosos y semi-preciosos

Instrucciones generales de aplicación:

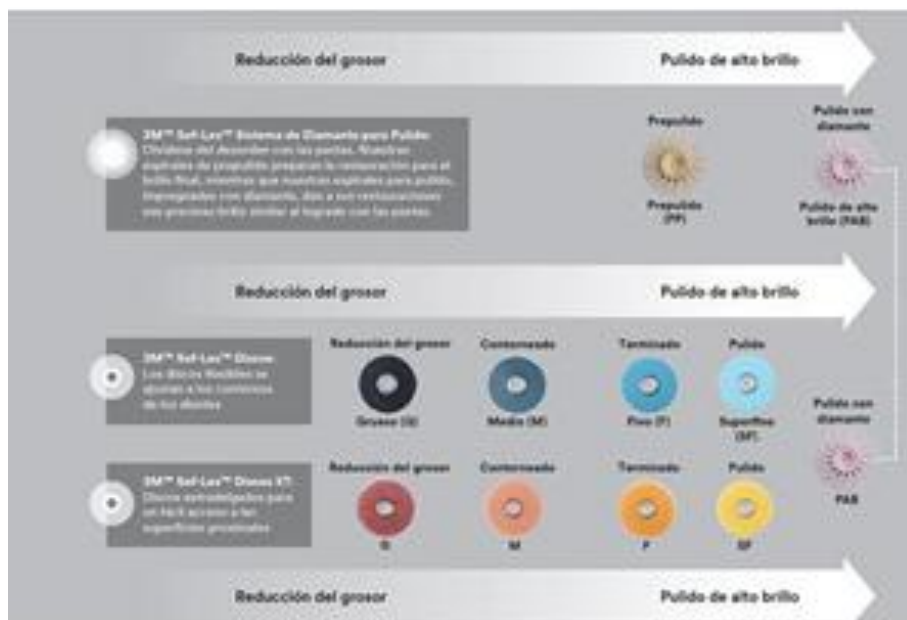

Presentación:

Cod Munnich	Producto	Presentación
527840	5090 SOF-LEX DIAMOND PREPULIDO BEIGE	BOLSA 15 UNIDADES
527841	5091 SOF-LEX DIAMOND PULIDO ROSADOS	BOLSA 15 UNIDADES
527842	5092-I SOF-LEX DIAMOND BEIGE+ROSADOS	BOLSA 5 ESPIRALES BEIGE Y 5 ESPIRALES ROSADOS