



Catéter intravenoso periférico

# BD Insyte™ Autoguard™



## Descripción

El catéter venoso periférico **BD Insyte™ Autoguard™** está indicado para su inserción en el sistema vascular por un periodo breve para extraer muestras de sangre, monitorizar la presión sanguínea o administrar fluidos por vía intravenosa. Puede ser usado en cualquier población, teniendo cuenta la adecuación de la anatomía vascular, la idoneidad del procedimiento, los fluidos a infundir y la duración de la terapia<sup>1</sup>.



## Aspectos Técnicos

Los catéteres **BD Insyte™** están hechos de BD Vialón™, marca registrada de BD para su poliuretano radiopaco con propiedades de flexibilidad, termosensibilidad y memoria elastomérica, que permiten una mejor adaptación del catéter al vaso sanguíneo, reduciendo así las complicaciones asociadas al uso de estos dispositivos<sup>1</sup>.

Este dispositivo siliconado incluye una aguja de acero inoxidable con bisel trifacetado, botón de activación para su mecanismo de bioseguridad, cámara de reflujo y un barril de polipropileno. Los calibres de 24G a 20G cuentan con tecnología BD Instaflash™, que permite la observación inmediata del retorno sanguíneo una vez que se punciona un vaso.

La tecnología de bioseguridad se activa una vez que se presiona el botón, lo que genera la retracción completa de la aguja en el barril, reduciendo el riesgo de accidentes cortopunzantes.


El pabellón de policarbonato está disponible en distintos colores dependiendo del calibre del catéter<sup>1</sup>.

**BD Insyte™ Autoguard™** en sus medidas de 18G a 22G, pueden ser conectados a inyectoras de alta presión hasta 300 psi.

Producto estéril, de uso único. Libre de DEHP y látex<sup>1</sup>.

|                    |                                            |
|--------------------|--------------------------------------------|
| NOMBRE:            | BD Insyte™ Autoguard™                      |
| TIPO:              | Catéter venoso periférico                  |
| PRESENCIA DE DEHP: | NO                                         |
| MATERIAL:          | Poliuretano                                |
| PRESENTACIÓN:      | Empaque individual                         |
| ALMACENAMIENTO:    | Lugar limpio y seco a temperatura ambiente |
| PROCEDENCIA:       | Estados Unidos                             |

|                                                                                                        |                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Método de esterilización<br><b>EO</b>                                                                  | Vigencia<br><b>3 años</b>                                                                              |
| <br>Libre de Látex | <br>Certificación |

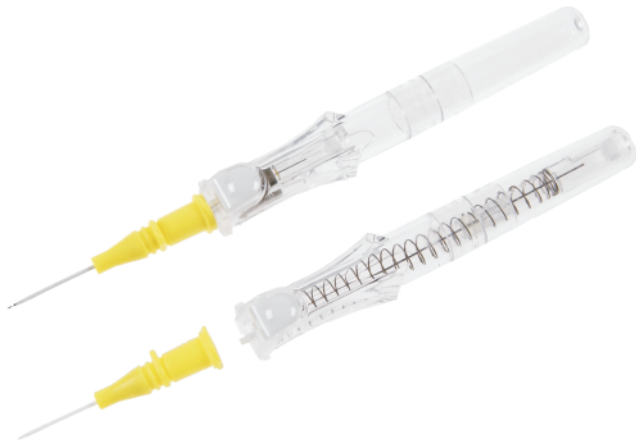

Catálogo Chile

| SKU    | Descripción de producto             | Velocidad de flujo por gravedad | Unidaades por caja |
|--------|-------------------------------------|---------------------------------|--------------------|
| 381811 | BD Insyte-N™ Autoguard™ 24G X .56IN | 20 mL/min                       | 200 unidades       |
| 381812 | BD Insyte™ Autoguard™ 24G X .75IN   | 20 mL/min                       | 200 unidades       |
| 381823 | BD Insyte™ Autoguard™ 22G X 1.0IN   | 35 mL/min                       | 200 unidades       |
| 381833 | BD Insyte™ Autoguard™ 20G X 1.0IN   | 65 mL/min                       | 200 unidades       |
| 381834 | BD Insyte™ Autoguard™ 20G X 1.16IN  | 60 mL/min                       | 200 unidades       |
| 381837 | BD Insyte™ Autoguard™ 20G X 2IN     | 55 mL/min                       | 200 unidades       |
| 381844 | BD Insyte™ Autoguard™ 18G X 1.16IN  | 105 mL/min                      | 200 unidades       |
| 381847 | BD Insyte™ Autoguard™ 18G X 1.88IN  | 95 mL/min                       | 200 unidades       |
| 381854 | BD Insyte™ Autoguard™ 16G X 1.16IN  | 220 mL/min                      | 200 unidades       |
| 381857 | BD Insyte™ Autoguard™ 16G X 1.77IN  | 205 mL/min                      | 200 unidades       |
| 381867 | BD Insyte™ Autoguard™ 14G X 1.75IN  | 330 mL/min                      | 200 unidades       |

Referencia:  
1. Becton Dickinson. (2020). *Technical Data Sheet BD Insyte™ Autoguard™ Shielded IV Catheter*.

