

ELECTRODO ESPINAL EPIDURAL



Nombre del dispositivo

Electrodo espinal epidural Ad- Tech

Referencia: 202830-000

Descripción


Para la monitorización intraoperatoria de los potenciales evocados (PE) de la vía descendente durante la cirugía de columna. Mide las ondas D.

Características

- Tres contactos de platino son ideales para registrar ondas D durante la monitorización de potenciales evocados motor.
- Espaciado de 15 mm.
- Incluye aguja Tuohy (Punción) de calibre 16G con estilete interior
- El cable plano adjunto de 121 cm (48 pulgadas) termina en conectores estándar a prueba de contacto.

Finalidad de uso

- Dispositivo de uso desechable.
- Estéril; de un solo uso.

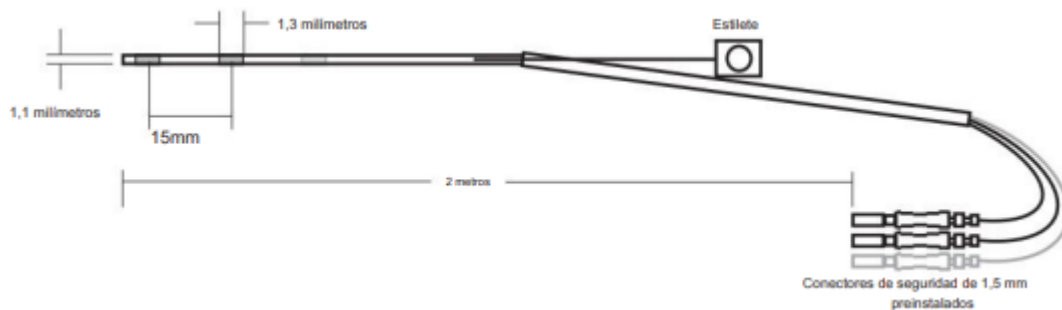

Condición de almacenamiento especial, especificar

Para ser almacenado y utilizado dentro de condiciones típicas de temperatura ambiente y humedad hospitalaria.

Fabricante

Desde 1983, cirujanos y neurólogos han recurrido a Ad-Tech en busca de productos Gold Standard que les ayuden a brindar atención que cambia la vida de pacientes de todo el mundo. Sus electrodos innovadores se utilizan para tratar la epilepsia intratable, en neurodiagnóstico y neurocirugía. Con dispositivos que van desde electrodos intracraneales para monitorización a largo plazo (LTM) y monitorización intraoperatoria (IONM) y una amplia variedad de especificaciones de dispositivos, fabricamos los dispositivos con los que los profesionales médicos cuentan para obtener resultados de atención óptimos.

Los productos Ad-Tech están registrados y aprobados para su uso en más de 60 países. Todos se fabrican en los Estados Unidos. Como empresa certificada ISO 13485, contando con los más altos estándares de calidad y un compromiso inquebrantable con el cumplimiento normativo.

Advertencias y precauciones generales

1. Evitar el uso de sistemas electroquirúrgicos cerca, puede causar quemaduras graves.
2. No reutilizar. Es posible la entrada y salida de materiales biopeligrosos.

Presentación/empaque

Unidad por paquete

Información de funcionamiento

1. No utilizar si el embalaje ha sido dañado o abierto
2. Verifique el uso por fecha. No usar si la fecha ha expirado
3. Retire el dispositivo de las bolsas externas e internas
4. Inspeccione el dispositivo en busca de daños antes de usarlo
5. Conecte el dispositivo al equipo de monitoreo
6. Enrutar los cables de plomo lejos del paciente
7. Verifique la conexión mecánica y eléctrica antes de su uso
8. Deseche después de su uso en un recipiente designado. No reutilizar ni volver a esterilizar