

FICHA TÉCNICA

Medtronic

ESTABILIZADOR DE TEJIDO OCTOPUS

LAT-CO-SH-0037-R1

MEDTRONIC

Página 1 de 4

1. Información General



Producto (Según Registro Sanitario)	Tissue Stabilizer- Estabilizador de Tejido- Octopus
Nombre Comercial	Estabilizador de tejido Octopups
Marcas	Octopus
Fabricante Legal	Medtronic INC, Con domicilio en Estados Unidos de América
Número de Registro Sanitario	INVIMA 2014DM-0002404-R1
Fecha de expiración del Registro Sanitario	07-02-2024
Clasificación del riesgo	III
Código GMDN	15325, 35954

2. Especificaciones

Composición	Componente	Material
	MIM Ball, Evo	316LA SS, MIM
	U-tube, Bent, Evo	304L SS
	Pods	PVC Alpha 3006/1-85 Clear
	Distal Vacuum Tubing, Evo	PVC Plastisol 23966
	Collet and Sleeve	17-4 SS, Solution Annealed

FICHA TÉCNICA



ESTABILIZADOR DE TEJIDO OCTOPUS

LAT-CO-SH-0037-R1

MEDTRONIC

Página 2 de 4

Presentación Comercial Condiciones de Almacenamiento	Overmolded Headlink, Rigid, Evo	Polycarbonate Resin, Clear Makrolon, 2558-550115
	Sheath, Parlyene Coated, Silicone	DOW Q7-4720 Silastic Elastomer
Método de esterilización	Caja por 1 unidad. CONSÉRVESE EN EL EMPAQUE ORIGINAL. Almacénese en lugar fresco, seco y protegido de la luz.	
Vida Útil	El producto se suministra esterilizado por Óxido de Etileno. NO REESTERILIZAR	
Referencias	2 años	
	TS2500	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
TS2000	Octopus Evolution Tissue Stabilizer
TS2500	Octopus Evolution AS Tissue Stabilizer
TSMICS1	Octopus Nuvo Tissue Stabilizer

3. Descripción del Producto

Indicaciones de Uso	Este producto está diseñado para estabilizar y reducir al mínimo el movimiento de ciertas áreas del corazón latiente durante la cirugía cardíaca.
---------------------	---

DESCRIPCIÓN

El Octopus Evolution TS2000 es un estabilizador desechable basado en retractor que consta de dos estabilizadores de tejido unidos a un brazo articulado (brazo). El brazo se sujeta a un retractor mediante el uso de una abrazadera de montaje. Una llave de paso proporciona control de encendido/apagado de succión (Figura 1). Con los estabilizadores

FICHA TÉCNICA



ESTABILIZADOR DE TEJIDO OCTOPUS

LAT-CO-SH-0037-R1

MEDTRONIC

Página 3 de 4

de tejido colocados a ambos lados del sitio anastomótico, se aplica succión para estabilizar el tejido. El brazo es apretado y aflojado por la perilla.

Este producto está destinado a estabilizar y minimizar el movimiento de áreas seleccionadas del corazón que late durante la cirugía cardíaca.

El Octopus Evolution AS TS2500 es un estabilizador desechable basado en retractor que consta de dos estabilizadores de tejido unidos a un brazo articulado (brazo). El brazo se sujeta a un retractor mediante el uso de una abrazadera de montaje. Una llave de paso proporciona control de encendido/apagado de succión (Figura 1). Con los estabilizadores de tejido colocados a ambos lados del sitio anastomótico, se aplica succión para estabilizar el tejido. El brazo es apretado y aflojado por la perilla. A medida que el brazo se tensa, los estabilizadores de tejido se extienden en forma de arco. Es estéril, no pirogénico, desechable de un solo uso.

Este producto está destinado a estabilizar y minimizar el movimiento de áreas seleccionadas del corazón que late durante la cirugía cardíaca.

El estabilizador de tejido Octopus Nuvo TSMICS1 es un sistema de estabilización de tejido desechable que consiste en un eje rígido, un enlace de cabeza estabilizador de tejido desmontable y un brazo articulado flexible. El dispositivo está diseñado para ensamblarse dentro de la cavidad torácica. Es estéril, no pirogénico, desechable, de un solo uso.

El producto está destinado a estabilizar y minimizar el movimiento de áreas seleccionadas del corazón que late durante los procedimientos de cirugía cardíaca mínimamente invasiva (MICS).

El estabilizador de tejido Octopus Evolution AS es un estabilizador desechable de tipo separador que consta de dos estabilizadores de tejido acoplados a un brazo articulado (brazo). El brazo se fija a un separador mediante un clamp de montaje. Una llave de paso permite abrir y cerrar la aspiración. Con los estabilizadores de tejido colocados a ambos lados del punto anastomótico, se aplica aspiración para estabilizar el tejido. El brazo se aprieta y afloja con el mando. A medida que se aprieta el brazo, los estabilizadores de tejido se separan en forma de arco.

FICHA TÉCNICA


Medtronic

ESTABILIZADOR DE TEJIDO OCTOPUS

LAT-CO-SH-0037-R1

MEDTRONIC

Página 4 de 4

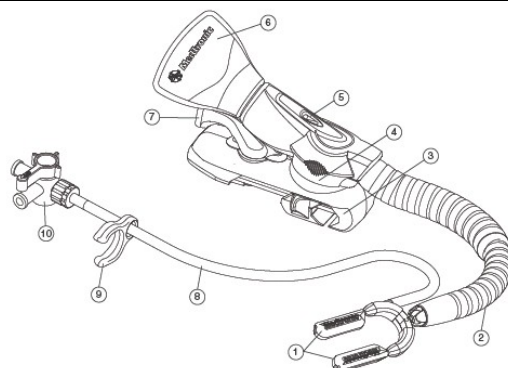

1. Estabilizadores de tejido	6. Perilla
2. Brazo de articulación	7. Palanca de la pinza
3. Pinza de montaje	8. Tubo de succión de ID de 0.32 cm (1/8 in.)
4. Torrecilla	9. Clip de tubería
5. Indicador de tensión	10. Llave de paso

NOTA: PARA LA CORRECTA UTILIZACION DEL DISPOSITIVO POR FAVOR LEER EL INSERTO DEL PRODUCTO

Originado por: Nombre: William H. Orozco T. Cargo: Quality Technician	Fecha: 26-03-2015	Aprobado por: Nombre: Juan Bolaños Cargo: Quality and Regulatory Affairs Manager	Fecha: 09-12-2019
Revisado por: Nombre: Paula Escobar Cargo: Regulatory Affairs Specialist	Fecha: 08-12-2019		