

FICHA TECNICA
CATÉTER TUNELIZADO
PALINDROME

1. Información General



Producto (Según Registro Sanitario)	Catéteres para hemodiálisis y accesorios Mahurkar, Mahurkar Maxid, Palindrome, Quinton Permcath, Kendall
Nombre Comercial	Catéter Tunelizado Palindrome
Marcas	Covidien
Fabricante Legal	Covidien Llc. - USA
Número de Registro Sanitario	INVIMA 2019DM-0003614-R1
Fecha de expiración del Registro Sanitario	29 de Julio 2029
Clasificación del riesgo	III
Código GMDN	37278

2. Especificaciones

Composición	Conectores Ultem, extensiones de silicona, cuerpo del catéter de poliuretano Carbothane, cuff en dacrón.
Presentación Comercial	Catéter con accesorios en Kit; Caja por 5 kits.
Condiciones de Almacenamiento	Almacenar en lugar fresco, Mantener alejado de la luz solar.
Método de esterilización	Esterilizados con Óxido de Etileno
Vida Útil	5 años
Referencias	

Referencia	Descripción	Accesorios
8888145014	Kit Palindrome doble lumen 14.5 Fr 36 cms extremo a extremo 19 cms cuff a punta	Aguja introductora 18G, guía metálica 0.038", Pull apart 16 Fr, estilete tunelizador bifurcado, dilatador 12Fr y 14 Fr, 2 caps, jeringa 12 ml, hoja de

**CATÉTER TUNELIZADO
PALINDROME**

Página 2 de 4

		bisturí #11, 2 apósitos Telfa, 4 gasas 4"x4".
8888145015	Kit Palindrome doble lumen 14.5 Fr 40 cms extremo a extremo 23 cms cuff a punta	Aguja introductora 18G, guía metálica 0.038", Pull apart 16 Fr, estilete tunelizador bifurcado, dilatador 12Fr y 14 Fr, 2 caps, jeringa 12 ml, hoja de bisturí #11, 2 apósitos Telfa, 4 gasas 4"x4".
8888145016	Kit Palindrome doble lumen 14.5 Fr 45 cms extremo a extremo 28 cms cuff a punta	Aguja introductora 18G, guía metálica 0.038", Pull apart 16 Fr, estilete tunelizador bifurcado, dilatador 12Fr y 14 Fr, 2 caps, jeringa 12 ml, hoja de bisturí #11, 2 apósitos Telfa, 4 gasas 4"x4".
8888145018	Kit Palindrome doble lumen 14.5 Fr 72 cms extremo a extremo 55 cms cuff a punta	Aguja introductora 18G, guía metálica 0.038", Pull apart 16 Fr, estilete tunelizador bifurcado, dilatador 12Fr y 14 Fr, 2 caps, jeringa 12 ml, hoja de bisturí #11, 2 apósitos Telfa, 4 gasas 4"x4".
8888145039	Kit Palindrome doble lumen 14.5 Fr con estiletes VenaTrac 36 cms extremo a extremo 19 cms cuff a punta	Aguja introductora 18G, guía metálica 0.038", Pull apart 16 Fr, estilete tunelizador bifurcado, dilatador 12Fr y 14 Fr, 2 caps, jeringa 12 ml, hoja de bisturí #11, 2 apósitos Telfa, 4 gasas 4"x4", 2 estiletes VenaTrac
8888145040	Kit Palindrome doble lumen 14.5 Fr con estiletes VenaTrac 40 cms extremo a extremo 23 cms cuff a punta	Aguja introductora 18G, guía metálica 0.038", Pull apart 16 Fr, estilete tunelizador bifurcado, dilatador 12Fr y 14 Fr, 2 caps, jeringa 12 ml, hoja de bisturí #11, 2 apósitos Telfa, 4 gasas 4"x4", 2 estiletes VenaTrac
8888145041	Kit Palindrome doble lumen 14.5 Fr con estiletes VenaTrac 45 cms extremo a extremo 28 cms cuff a punta	Aguja introductora 18G, guía metálica 0.038", Pull apart 16 Fr, estilete tunelizador bifurcado, dilatador 12Fr y 14 Fr, 2 caps, jeringa 12 ml, hoja de bisturí #11, 2 apósitos Telfa, 4 gasas 4"x4", 2 estiletes VenaTrac.
8888145042	Kit Palindrome doble lumen 14.5 Fr con estiletes VenaTrac	Aguja introductora 18G, guía metálica 0.038", Pull apart 16 Fr, estilete

	50 cms extremo a extremo 33 cms cuff a punta	tunelizador bifurcado, dilatador 12Fr y 14 Fr, 2 caps, jeringa 12 ml, hoja de bisturí #11, 2 apósitos Telfa, 4 gasas 4"x4", 2 estiletes VenaTrac
--	---	--

3. Descripción del Producto

Indicaciones de Uso

Los catéteres vasculares tunelizados, se usan para diálisis crónica en pacientes que tienen pendiente definir terapia dialítica o no tienen madura la Fístula Arteriovenosa y en paciente con difícil acceso vascular. Para colocación vía yugular y/o femoral.

DESCRIPCIÓN

Catéter tunelizado doble lumen, con material que se mimetiza al vaso generando mayor biocompatibilidad, con punta simétrica que minimiza recirculación, y ranuras laterales en corte laser que disminuyen riesgo de taponamiento por adherencia de fibrina.

Los catéteres de 50 cms y 72 cms se recomiendan para inserción por vía femoral.




Punta simétrica en forma de Z que disminuye porcentaje de recirculación.

Ranuras laterales en corte a laser que favorece la permeabilidad.

CARACTERÍSTICAS:

- Material Poliuretano Carbothane.
- Radiopaco.
- Catéter Mango de Felpa gruesa.
- Retenedor de dacrón.
- Diseño de la punta Espiral- Z.
- Fr. 14.5
- Presillas de línea duraderas.
- Tunelizador a traumático.
- Pull Apart con válvula de seguridad
- Volúmenes de base impresos.
- Disponible en kit con o sin VenaTrac

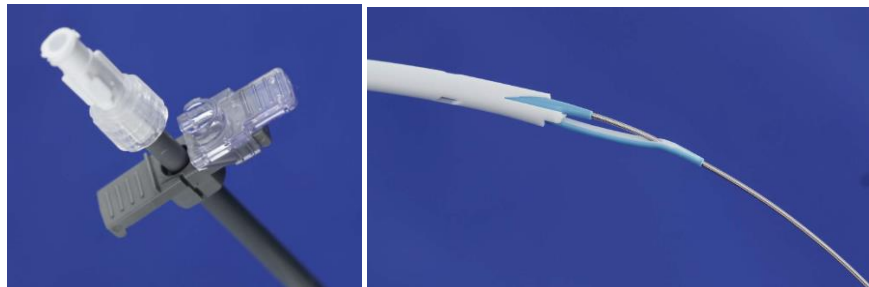

Dispositivos de seguridad Pull Apart y VenaTrac

NOTA: PARA LA CORRECTA UTILIZACION DEL DISPOSITIVO POR FAVOR LEER EL INSERTO DEL PRODUCTO

Originado por: Nombre: Marly López Villanueva Cargo: Regulatory Affairs Specialist	Fecha: 10-Oct-16	Aprobado por: Nombre: Natalia Valbuena Tovar Cargo: Regulatory Affairs Sr. Manager Latinoamerica	Fecha: 10-Oct-16
Revisado por: Nombre: Yenny Carrillo Abella Cargo: Product Specialist Renal Care Solutions	Fecha: 10-Oct-16		