

1. Información General



Producto (Según Registro Sanitario)	Integrated Power Console y accesorios
Nombre Comercial	Integrated Power Console (Ipc™)
Marcas	IPC™
Fabricante Legal	Medtronic Xomed, Inc USA
Número de Registro Sanitario	2009DM-0003466-R1
Fecha de expiración del Registro Sanitario	14 de Enero 2029
Clasificación del riesgo	IIA
Código GMDN	44491

2. Especificaciones

Composición	Consola de control de potencia Pedal multifunción Cables de conexión Piezas de mano para el manejo de distintas fresas, cuchillas, cánulas y sierras. Bombas de irrigación para la irrigación de las cuchillas y fresas y para la refrigeración del motor.
Presentación Comercial	Unidad
Condiciones de Almacenamiento	Temperatura Ambiente
Método de esterilización	No aplica
Vida Útil	No aplica
Referencias	

CODIGO	DESCRIPCIÓN
1898001	Integrated Power Console 1
1898430	Integrated Power Console Multifunction Footpedal 1
1897510	Basket 1
1898600	IPC Cart

3. Descripción del Producto

Indicaciones de Uso

El sistema IPC™ está indicado para la incisión, corte, extracción y perforación de tejidos blandos, duros y hueso, así como para el implante de biomateriales en neurocirugía (craneal y craneofacial), cirugía ortopédica, esternotomía e intervenciones quirúrgicas por artroscopia, en columna y de carácter general.


DESCRIPCION

El sistema IPC™ es un sistema de microdebridador, motor y sierra para eliminar tejido blando, duro y hueso en el marco de intervenciones quirúrgicas.



- 1 Pump 1: Coolant, lense cleaning or irrigation
- 2 Touchscreen
- 3 Power on/off
- 4 Pump 2: Irrigation or lense cleaning
- 5 Console connector panel for peripheral devices

Figura 1: IPC Consola Vista delantera

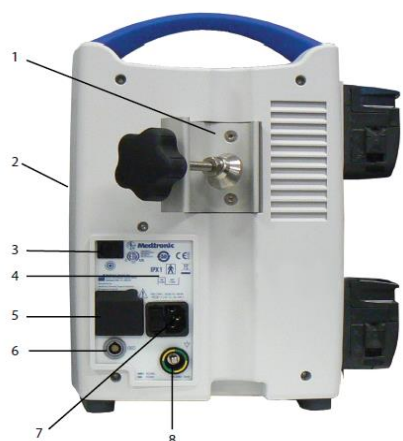

- 1 Pole clamp
- 2 Compact flash card port (Medtronic Use)
- 3 Manual start/stop
- 4 Fuse access
- 5 Auxillary power outlet
- 6 Endo-Scrub 2 connector
- 7 Hospital grade power cord connector
- 8 Equipotential. Apply potential equalization conductor.

Figura 2: IPC Console- Vista Tracera

NOTA: PARA LA CORRECTA UTILIZACION DEL DISPOSITIVO POR FAVOR LEER EL INSERTO DEL PRODUCTO

Originado por: Nombre: Alexandra García Cargo: Regulatory Affairs Specialist	Fecha: 26-10-16	Aprobado por: Nombre: Natalia Valbuena Tovar Cargo: Regulatory Affairs Sr. Manager Latinoamerica	Fecha: 26-10-16
Revisado por: Nombre: Fabiola Pacheco Cargo: Market Development Specialist	Fecha: 26-10-16		