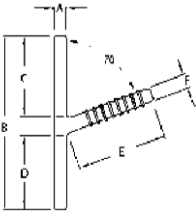
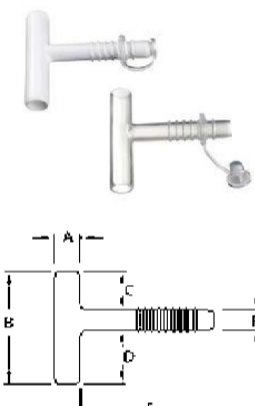
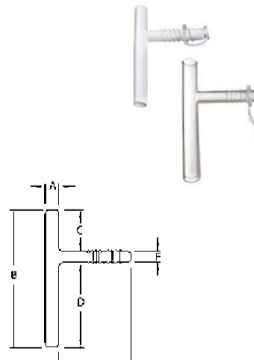
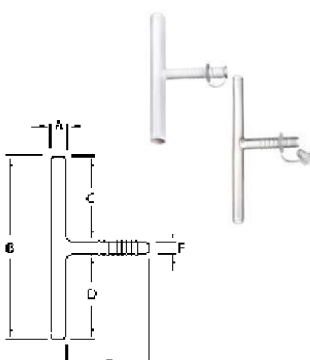


BOSTON MEDICAL - STENT LARINGEO DE MONTGOMERY - QUILLA DE MONTGOMERY


código interno	Descripción
157652	STENT LARINGEO COMISURA ANT REF 323070 UND-FT
550581	STENT MONTGOMERY LARINGEO PEDIATRICO REF 323010 CAJ X 1 BOSTON-FT
	STEN DE MONTGOMERY ADULTO PEQUEÑO REF. 323020-FT
	STEN DE MONTGOMERY ADULTO MEDIANO REF. 323025-FT
127993	QUILLA MONTGOMERY REF 323060R UND-FT
	QUILLA DE MONTGOMERY DE 12mm REF. 323040R-FT
	QUILLA DE MONTGOMERY DE 14mm REF. 323050R -FT

 Medinistros Equpos y dispositivos médicos		 ISO 9001		 CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM		FICHA TÉCNICA DISPOSITIVOS MÉDICOS																																																													
																																																																			
INDICACIONES: TRATAMIENTO DE LESIONES LARINGOTRAQUEALES AGUDAS, SOPORTE EN TRATAMIENTO DE ESTENOSIS TRAQUEAL INTRATORÁCICA, TRÁQUEA RECONSTRUIDA, TRATAMIENTO DE ESTENOSIS TRAQUEAL CUANDO LA TRÁQUEA CERVICAL O TORÁCICA NO SE PUEDEN REPARAR, RESECCIÓN SEGMENTARIA Y ANASTOMOSIS, SOPORTE DE TRÁQUEA CERVICAL LESIONADA QUE NO SE PUEDE REPARAR																																																																			
INFORMACIÓN GENERAL																																																																			
NOMBRE		EXPANSORES PARA VENTILACIÓN Y FONACIÓN DE LA VIA AÉREA SUPERIOR																																																																	
NOMBRE GENÉRICO		TUBO EN T, STENT LARINGEO Y QUILLAS																																																																	
MARCA		BOSTON MEDICAL PRODUCTS INC.																																																																	
REGISTRO INVIMA		2019DM-0004902-RI																																																																	
COMPOSICIÓN		SILICONA GRADO MEDICO																																																																	
TIPO DE DISPOSITIVO		INVASIVO																																																																	
CLASIFICACION DE RIESGO		I	IIA	IIIB	III																																																														
			X																																																																
VIDA ÚTIL		5 AÑOS																																																																	
PAIS DE PROCEDENCIA		PRESENTACIÓN COMERCIAL																																																																	
ESTADOS UNIDOS		UNIDAD POR EMPAQUE																																																																	
TUBOS ENDOTRAQUEALES MONTGOMERY																																																																			
USO PREVISTO: mantener el flujo adecuado de aire a través de la tráquea e igualmente soportar la tráquea estenótica sometida a reconstrucción o restauración																																																																			
REF.	IMAGEN	CARÁCTERÍSTICAS																																																																	
Serie pediátrica 3200		* Sección extraluminal que facilita el manejo de la función de succión y del flujo de aire. * sección extraluminal angulada Implante hecho de silicona grado médico * Superficie suave antiadherente * Sistema de surcos y anillo de seguridad * Disponible en material radiopaco o transparente * Estéril, de un sólo uso																																																																	
		<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Tamaño</th> <th colspan="2"># de referencia</th> <th colspan="6">Dimensiones (mm)</th> <th rowspan="2"># de referencia Set de anillo/conector</th> </tr> <tr> <th>Transparente</th> <th>Radiopaco</th> <th>A</th> <th>B</th> <th>C</th> <th>D</th> <th>E</th> <th>F</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>6</td> <td>320006</td> <td>32006R</td> <td>6</td> <td>94</td> <td>46</td> <td>42</td> <td>45</td> <td>6</td> <td>321066</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>320007</td> <td>32007R</td> <td>7</td> <td>95</td> <td>46</td> <td>43</td> <td>45</td> <td>6</td> <td>321066</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>320008</td> <td>32008R</td> <td>8</td> <td>96</td> <td>46</td> <td>42</td> <td>45</td> <td>8</td> <td>321086</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>320009</td> <td>32009R</td> <td>9</td> <td>97</td> <td>46</td> <td>43</td> <td>45</td> <td>8</td> <td>321086</td> </tr> </tbody> </table>								Tamaño	# de referencia		Dimensiones (mm)						# de referencia Set de anillo/conector	Transparente	Radiopaco	A	B	C	D	E	F	6	320006	32006R	6	94	46	42	45	6	321066	7	320007	32007R	7	95	46	43	45	6	321066	8	320008	32008R	8	96	46	42	45	8	321086	9	320009	32009R	9	97	46	43	45	8	321086
		Tamaño	# de referencia		Dimensiones (mm)						# de referencia Set de anillo/conector																																																								
			Transparente	Radiopaco	A	B	C	D	E	F																																																									
		6	320006	32006R	6	94	46	42	45	6	321066																																																								
		7	320007	32007R	7	95	46	43	45	6	321066																																																								
8	320008	32008R	8	96	46	42	45	8	321086																																																										
9	320009	32009R	9	97	46	43	45	8	321086																																																										

direcciontecnica@medinistros.com
Calle 72 No. 22 – 42 Oficina 301 Ed. Gioto
Bogotá D.C., Colombia
Teléfono: +57 (1) 540 4920 / 217 4253 Ext. 112
Móvil: +57 316 4670029
Fax: +57 (1) 217 42 39
www.medinistros.com

 Medinistros Equipos y dispositivos médicos  ISO 9001 SC-CER00020 		FICHA TÉCNICA DISPOSITIVOS MÉDICOS 																																																																																																					
Serie 4200 estándar 		* Diseño original donde se destacan las dimensiones que funcionarán para la mayoría de los casos quirúrgicos. * Silicona grado médico * Superficie suave antiadherente * Sistema de surcos y anillo de seguridad * Disponible en material radiopaco o transparente * Estéril, de un sólo uso <table><thead><tr><th rowspan="2">Tamaño</th><th colspan="2"># de referencia</th><th colspan="6">Dimensiones (mm)</th><th colspan="2"># de referencia</th></tr><tr><th>Transparente</th><th>Radiopaco</th><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th><th>E</th><th>F</th><th>Set de anillo/conector</th><th>Adaptador de extensión a 15 mm</th></tr></thead><tbody><tr><td>10</td><td>420010</td><td>42010R</td><td>10</td><td>50</td><td>19</td><td>23</td><td>39</td><td>8</td><td>321106</td><td>321107</td></tr><tr><td>11</td><td>420011</td><td>42011R</td><td>11</td><td>60</td><td>20</td><td>29</td><td>52</td><td>11</td><td>321126</td><td>321127</td></tr><tr><td>12</td><td>420012</td><td>42012R</td><td>12</td><td>65</td><td>23</td><td>32</td><td>50</td><td>11</td><td>321126</td><td>321127</td></tr><tr><td>13</td><td>420013</td><td>42013R</td><td>13</td><td>69</td><td>24</td><td>34</td><td>55</td><td>11</td><td>321126</td><td>321127</td></tr><tr><td>14</td><td>420014</td><td>42014R</td><td>14</td><td>71</td><td>25</td><td>35</td><td>59</td><td>11</td><td>321126</td><td>321127</td></tr><tr><td>15</td><td>420015</td><td>42015R</td><td>15</td><td>73</td><td>26</td><td>36</td><td>56</td><td>11</td><td>321126</td><td>321127</td></tr><tr><td>16</td><td>420016</td><td>42016R</td><td>16</td><td>75</td><td>27</td><td>37</td><td>65</td><td>11</td><td>321126</td><td>321127</td></tr></tbody></table>		Tamaño	# de referencia		Dimensiones (mm)						# de referencia		Transparente	Radiopaco	A	B	C	D	E	F	Set de anillo/conector	Adaptador de extensión a 15 mm	10	420010	42010R	10	50	19	23	39	8	321106	321107	11	420011	42011R	11	60	20	29	52	11	321126	321127	12	420012	42012R	12	65	23	32	50	11	321126	321127	13	420013	42013R	13	69	24	34	55	11	321126	321127	14	420014	42014R	14	71	25	35	59	11	321126	321127	15	420015	42015R	15	73	26	36	56	11	321126	321127	16	420016	42016R	16	75	27	37	65	11	321126	321127		
Tamaño	# de referencia		Dimensiones (mm)						# de referencia																																																																																														
	Transparente	Radiopaco	A	B	C	D	E	F	Set de anillo/conector	Adaptador de extensión a 15 mm																																																																																													
10	420010	42010R	10	50	19	23	39	8	321106	321107																																																																																													
11	420011	42011R	11	60	20	29	52	11	321126	321127																																																																																													
12	420012	42012R	12	65	23	32	50	11	321126	321127																																																																																													
13	420013	42013R	13	69	24	34	55	11	321126	321127																																																																																													
14	420014	42014R	14	71	25	35	59	11	321126	321127																																																																																													
15	420015	42015R	15	73	26	36	56	11	321126	321127																																																																																													
16	420016	42016R	16	75	27	37	65	11	321126	321127																																																																																													
Serie 5200 torácica 		* Tiene una sección inferior extralarga para uso en aplicaciones torácicas. * Silicona grado médico * Superficie suave antiadherente * Sistema de surcos y anillo de seguridad * Disponible en material radiopaco o transparente * Estéril, de un sólo uso <table><thead><tr><th rowspan="2">Tamaño</th><th colspan="2"># de referencia</th><th colspan="6">Dimensiones (mm)</th><th colspan="2"># de referencia</th></tr><tr><th>Transparente</th><th>Radiopaco</th><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th><th>E</th><th>F</th><th>Set de anillo/conector</th><th>Adaptador de extensión a 15 mm</th></tr></thead><tbody><tr><td>10</td><td>520010</td><td>52010R</td><td>10</td><td>113</td><td>31</td><td>74</td><td>38</td><td>8</td><td>321106</td><td>321107</td></tr><tr><td>11</td><td>520011</td><td>52011R</td><td>11</td><td>115</td><td>30</td><td>74</td><td>50</td><td>11</td><td>321126</td><td>321127</td></tr><tr><td>12</td><td>520012</td><td>52012R</td><td>12</td><td>112</td><td>29</td><td>72</td><td>50</td><td>11</td><td>321126</td><td>321127</td></tr><tr><td>13</td><td>520013</td><td>52013R</td><td>13</td><td>116</td><td>31</td><td>74</td><td>55</td><td>11</td><td>321126</td><td>321127</td></tr><tr><td>14</td><td>520014</td><td>52014R</td><td>14</td><td>118</td><td>32</td><td>75</td><td>58</td><td>11</td><td>321126</td><td>321127</td></tr><tr><td>15</td><td>520015</td><td>52015R</td><td>15</td><td>119</td><td>33</td><td>75</td><td>56</td><td>11</td><td>321126</td><td>321127</td></tr><tr><td>16</td><td>520016</td><td>52016R</td><td>16</td><td>119</td><td>33</td><td>75</td><td>65</td><td>11</td><td>321126</td><td>321127</td></tr></tbody></table>		Tamaño	# de referencia		Dimensiones (mm)						# de referencia		Transparente	Radiopaco	A	B	C	D	E	F	Set de anillo/conector	Adaptador de extensión a 15 mm	10	520010	52010R	10	113	31	74	38	8	321106	321107	11	520011	52011R	11	115	30	74	50	11	321126	321127	12	520012	52012R	12	112	29	72	50	11	321126	321127	13	520013	52013R	13	116	31	74	55	11	321126	321127	14	520014	52014R	14	118	32	75	58	11	321126	321127	15	520015	52015R	15	119	33	75	56	11	321126	321127	16	520016	52016R	16	119	33	75	65	11	321126	321127		
Tamaño	# de referencia		Dimensiones (mm)						# de referencia																																																																																														
	Transparente	Radiopaco	A	B	C	D	E	F	Set de anillo/conector	Adaptador de extensión a 15 mm																																																																																													
10	520010	52010R	10	113	31	74	38	8	321106	321107																																																																																													
11	520011	52011R	11	115	30	74	50	11	321126	321127																																																																																													
12	520012	52012R	12	112	29	72	50	11	321126	321127																																																																																													
13	520013	52013R	13	116	31	74	55	11	321126	321127																																																																																													
14	520014	52014R	14	118	32	75	58	11	321126	321127																																																																																													
15	520015	52015R	15	119	33	75	56	11	321126	321127																																																																																													
16	520016	52016R	16	119	33	75	65	11	321126	321127																																																																																													
REF.	IMAGEN	CARÁCTERÍSTICAS																																																																																																					
Serie 6200 Extra largo 		* Se diseñó con el propósito de permitir al cirujano modificar las secciones intraluminales hasta obtener la longitud deseada. * Silicona grado médico * Superficie suave antiadherente * Sistema de surcos y anillo de seguridad * Disponible en material radiopaco o transparente * Estéril, de un sólo uso <table><thead><tr><th rowspan="2">Tamaño</th><th colspan="2"># de referencia</th><th colspan="6">Dimensiones (mm)</th><th colspan="2"># de referencia</th></tr><tr><th>Transparente</th><th>Radiopaco</th><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th><th>E</th><th>F</th><th>Set de anillo/conector</th><th>Adaptador de extensión a 15 mm</th></tr></thead><tbody><tr><td>10</td><td>620010</td><td>62010R</td><td>10</td><td>161</td><td>76</td><td>76</td><td>39</td><td>8</td><td>321106</td><td>321107</td></tr><tr><td>11</td><td>620011</td><td>62011R</td><td>11</td><td>162</td><td>76</td><td>76</td><td>52</td><td>11</td><td>321126</td><td>321127</td></tr><tr><td>12</td><td>620012</td><td>62012R</td><td>12</td><td>162</td><td>76</td><td>76</td><td>48</td><td>11</td><td>321126</td><td>321127</td></tr><tr><td>13</td><td>620013</td><td>62013R</td><td>13</td><td>163</td><td>76</td><td>76</td><td>57</td><td>11</td><td>321126</td><td>321127</td></tr><tr><td>14</td><td>620014</td><td>62014R</td><td>14</td><td>163</td><td>76</td><td>76</td><td>59</td><td>11</td><td>321126</td><td>321127</td></tr><tr><td>15</td><td>620015</td><td>62015R</td><td>15</td><td>163</td><td>76</td><td>76</td><td>58</td><td>11</td><td>321126</td><td>321127</td></tr><tr><td>16</td><td>620016</td><td>62016R</td><td>16</td><td>163</td><td>76</td><td>76</td><td>65</td><td>11</td><td>321126</td><td>321127</td></tr></tbody></table>				Tamaño	# de referencia		Dimensiones (mm)						# de referencia		Transparente	Radiopaco	A	B	C	D	E	F	Set de anillo/conector	Adaptador de extensión a 15 mm	10	620010	62010R	10	161	76	76	39	8	321106	321107	11	620011	62011R	11	162	76	76	52	11	321126	321127	12	620012	62012R	12	162	76	76	48	11	321126	321127	13	620013	62013R	13	163	76	76	57	11	321126	321127	14	620014	62014R	14	163	76	76	59	11	321126	321127	15	620015	62015R	15	163	76	76	58	11	321126	321127	16	620016	62016R	16	163	76	76	65	11	321126	321127
Tamaño	# de referencia		Dimensiones (mm)						# de referencia																																																																																														
	Transparente	Radiopaco	A	B	C	D	E	F	Set de anillo/conector	Adaptador de extensión a 15 mm																																																																																													
10	620010	62010R	10	161	76	76	39	8	321106	321107																																																																																													
11	620011	62011R	11	162	76	76	52	11	321126	321127																																																																																													
12	620012	62012R	12	162	76	76	48	11	321126	321127																																																																																													
13	620013	62013R	13	163	76	76	57	11	321126	321127																																																																																													
14	620014	62014R	14	163	76	76	59	11	321126	321127																																																																																													
15	620015	62015R	15	163	76	76	58	11	321126	321127																																																																																													
16	620016	62016R	16	163	76	76	65	11	321126	321127																																																																																													

Serie 7200
Cónica

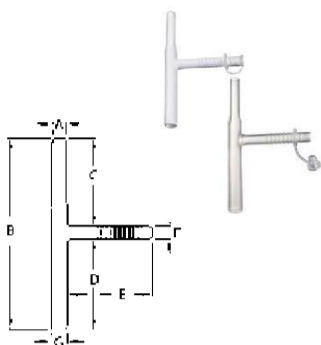

* Se diseña con el propósito de ayudar en el proceso de tratamiento de estenosis traqueal, subglótica y glótica. El extremo superior se ajusta al contorno de la glotis y subglotis mientras que la porción inferior más grande actúa simultáneamente como stent para la tráquea.

- * Silicona grado médico
- * Superficie suave antiadherente
- * Sistema de surcos y anillo de seguridad
- * Disponible en material radiopaco o transparente

Tamaño	# de referencia		Dimensiones (mm)								# de referencia	
	Transparente	Radiopaco	A	B	C	D	E	F	G		Set de anillo / conector	Adaptador de extensión a 15 mm
8/10	721008	71008R	8	163	77	78	69	8	10		321106	321107
10/13	721310	71310R	10	163	76	76	72	11	13		321126	321127

ACCESORIOS

SET DE ANILLO / CONECTOR

# de referencia	Para cierre de tubos traqueales Safe-T-Tubes™ Montgomery® con los siguientes tamaños:	Artículos por caja
321066	6 / 7	1
321086	8 / 9	
321106	10	
321126	11-16	




ADAPTADOR DE EXTENSIÓN DE 15mm

# de referencia	Apropiado para tubos traqueales Safe-T-Tubes™ Montgomery® con los siguientes tamaños:	Artículos por caja
321107	10	1
321127	11-16	




STENT PARA LA COMISURA ANTERIOR DE LA LARINGE (LACS)

USO INDICADO: Ha sido concebido para el tratamiento y prevención de la sinequia glótica (estenosis glótica anterior)

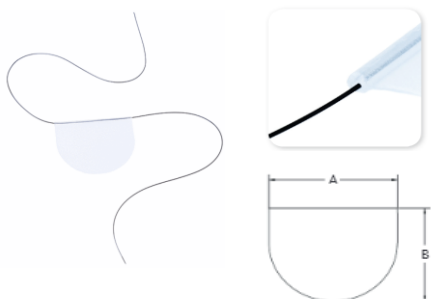


REF	Dimensiones (mm)		
	A	B	Grosor
323070	50	40	0.4

El LACS se coloca de forma endoscópica dentro de la comisura anterior de la laringe, reduciendo así el contacto entre las cuerdas vocales durante la fase postoperatoria. Puede recortarse el LACS a medida, para que presente el tamaño adecuado. El LACS cuenta con una sección tubular para una sutura de fijación. El dispositivo se suministra con un hilo de sutura de monofilamento no absorbible de nylon pre-insertado en la sección tubular y un botón de silicona para proteger la piel en la zona de la sutura. El LACS es de un solo uso y se suministra esterilizado

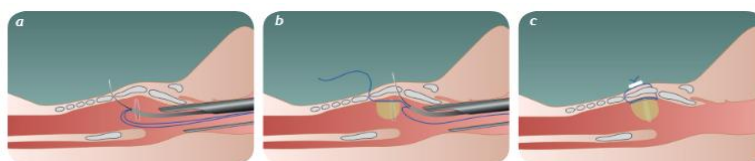

STENT LARÍNGEO MONTGOMERY


USO PREVISTO: prevención y tratamiento, individual o combinado de estenosis laríngea cuando la enfermedad de estenosis glótica afecta la glotis media, glotis posterior, supraglotis y subglotis

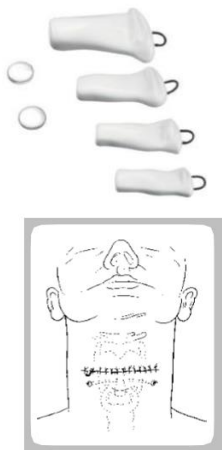

- * Es una prótesis moldeada cuyo diseño se ajusta a la superficie endolaríngea.
- * Se utiliza como soporte directo para la mucosa intralaríngea o injertos dérmicos en áreas desnudas de la endolaringe.
- * Silicona de grado médico implante radiopaca, la cual es suficientemente rígida para soportar la endolaringe en la fase postoperatoria pero también es suave y flexible para asegurar un correcto ajuste mientras se minimizan las lesiones
- * Cada stent presenta dos botones de sutura hechos de silicona que soportan el stent externamente.


Tamaño	# de referencia	Dimensiones (mm)		
		A	B	C
Niño	323010	33	10	9
Adulto S	323020	37	11	10
Adulto M	323025	40	12	10
Adulto L	323030	47	15	16

Se pueden adquirir Botones de Stent sin esterilizar de manera adicional (REF: 323011).

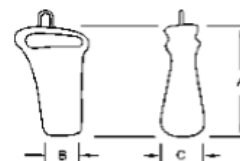

QUILLA LARÍNGEA MONTGOMERY

USO INDICADO: tratamiento de estenosis subglótica anterior (membrana) con o sin parálisis de cuerdas vocales. Se puede utilizar después de realizar procesos de reparación de estenosis. También se podrá utilizar después de remover el stent para facilitar la formación de una comisura anterior pronunciada. Se puede utilizar después de hemilaringectomía para prevenir estenosis.

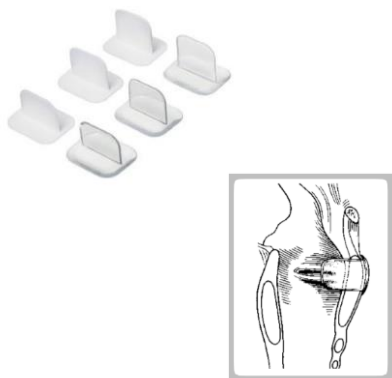

- * Forma única tipo sombrilla, la extensión intralaríngea de la quilla es mas delgada que la parte en forma de sombrilla correspondiente a la sección extralaríngea
- *Silicona grado médico, transparente o radiolúcida

Tamaño	# de referencia		Dimensiones (mm)
	Transparente	Radiopaco	
12	323040	323040R	12
14	323050	323050R	14
16	323060	323060R	16

