

FICHA TÉCNICA

Foliodrape[®] PROTECT y PLUS




1. Descripción General del Producto

Foliodrape[®] protec Y Foliodrape[®] protec plus contiene los elementos de cobertura requeridos para cada tipo de cirugía en las especialidades de cirugía general, otorrino, ginecología, urología y ortopedia. Clasificación de acuerdo con la directiva de la Comunidad Económica Europea para implementos médico-quirúrgicos estériles Clase I* Cumplimiento de los más altos estándares de calidad según la norma europea EN 13795

2. Descripción del Material

Laminado de 2 capas

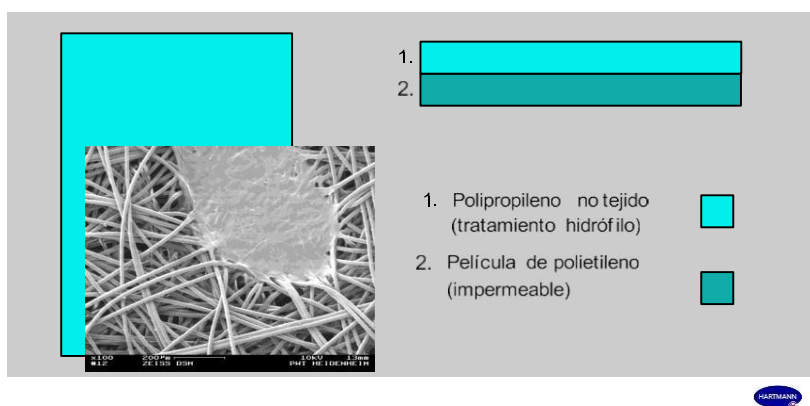



GRUPO AMAREY
NOVA MEDICAL




FICHA TÉCNICA

Materiales Foliodrape Protect

Componente	Propiedades	Función
Polipropileno (PP)-no tejido, spunbound	• 30 gsm • Repelente al agua • fibras componentes de 3 dimensiones	• resistente a la rotura, en estado seco y mojado, dispersión de fluidos
Tratamiento hidófilo (Avivage)	• mojabilidad • es soluble al agua, puede ser lavado del tejido	• absorción de agua y sangre con restricción a cantidad y tiempo
Lámina de polietileno	• 25 gsm • sin poros • resistente al agua	• resistente a la rotura • impermeable a fluidos, bacteria y virus • conveniente cuando hay contacto con la piel
Conjunto total de componentes	• Pérdida de partículas minimal, muy limpio	• evita complicaciones en el proceso de curación de la herida

Foliodrape – los materiales Foliodrape Protect Plus

Lámina de capas múltiples

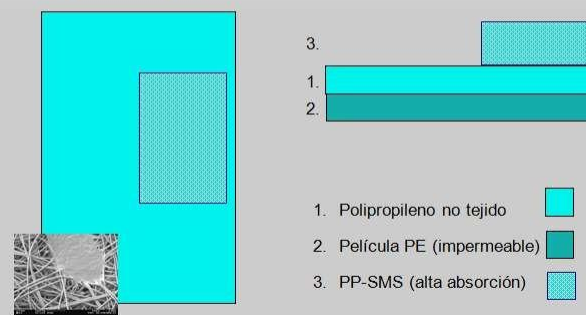

3. Aplicación/Indicación

Barrera de protección durante los procedimientos quirúrgicos.

4. Características y Beneficios

- Los campos tienen un área adhesiva que los fija rápida y seguramente alrededor del área de la incisión, evitando que el campo se desplace.
- Su Estructura compacta, lo hace resistente a la abrasión y evita la liberación de partículas como pelusas.
- Al ser desechable, no hay alteración de la barrera protectora por el reusó. Facilita almacenamiento y disponibilidad
- Garantía en sus materiales y en la esterilización
- Es antiestática: no interfiere con los equipos de monitoreo Cumple con las políticas de protección al medio ambiente.



GRUPO AMAREY
NOVA MEDICAL



FICHA TÉCNICA

5. Esterilización: con gas óxido de etileno

6. Referencias:

REFERENCIA	PRODUCTO
277508	CAMPO DE 75 XM C 90 CM
277537	FOLIODRAPE FENESTRA CON ADHE 50x60cm
938706	FOLIODRAPE CAMPO QX UNIVERSAL SET I
938739	FOLIODRAPE CAMPO UNIVERSAL PROTECT PLUS EN U 260x222
938701	FOLIODRAPE CAMPO QX REEMPLAZO CADERA II
938702	FOLIODRAPE CAMPO QX ARTROSC HOMBRO SET I
938703	FOLIODRAPE CAMPO QX ARTROSCOPIA RODILLA
938709	FOLIODRAPE SET LAPAROSCOPIA I PPLUS
938713	FOLIODRAPE SET LAPAROSCOPIA II PPLUS
938726	FOLIODRAPE CAMPO QX ARTROSCOPIO HOMBRO
938819	FOLIODRAPE CAMPO ABERTURA U 225x280cm
938809	FOLIODRAPE FENESTRADOS EPIDURAL 60x90cm
258128	FOLIODRAPE BOLSA CAMPO ARTROSCOPIA DE HOMBRO

7. Vida Útil: 5 Años

El producto será estéril durante este periodo siempre y cuando el empaque no este dañado y las condiciones de almacenamiento se mantienen

8. Empaque

Los componentes Foliodrape® se presentan envueltos en papel crepé estéril; sellado en bolsa de polietileno con etiqueta.

9. Registro Invima

2023DM-0027221