


EPIX® PINZA GRASPER ATRAUMATICA

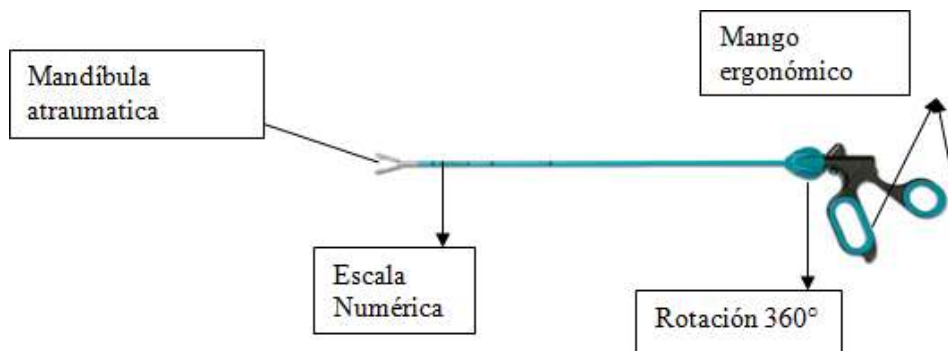

Descripción

La pinza grasper atraumática es un dispositivo estéril y de un solo uso, que posee en el extremo de sus mandíbulas, unas almohadillas en LATIS®, que garantizan una tracción atraumatica y mejor manipulación del tejido.

Indicaciones

Las pinzas Grasper atraumáticas están indicadas en intervenciones por laparoscopia de cirugía general, abdominal, ginecológica, urológica y torácica, mínimamente invasivas, con el propósito de realizar agarre y tracción atraumática de los tejidos.

Descripción material

Parte	Material
Mango	Policarbonato Colorante negro MKS-7005-PC Colorante omnicolor, azul marino UN 66088 Poliamida Acero Inoxidable Kraton G2705Z Grasa de silicona
Tubo	Acero Inoxidable Colorante Omni color azul marino UN 66088 Tinta negra PG1NT Lustran ABS natural 452
Punta (grasper)	Acero Inoxidable Cera de Hueso W31 Espuma de silicona, azul 1070HS LDPE PET Poliéster blanco 907Y Loctite 401
Cubierta	Meliflex XS119-72ª Colorante amarillo Sunflower UN 1625
Protector de la punta	Polietileno de baja densidad



FICHA TÉCNICA



Características y Beneficios

El único grasper realmente atraumático



ALMOHADILLAS DE LAVIS® ATRAUMATICAS


- Permite traccionar el tejido sin fuerza y sin producir desgarro
- La malla de las almohadillas permiten mayor superficie de contacto con el tejido para una mejor tracción.
- Ideal para manipular tejido delicado

- Mecanismo de bajo perfil



- Elimina ranuras y prominencias, asegurando completo aislamiento en las mandíbulas de las pinzas
- La vaina de la pinza es completamente aislada

- Mejor control para manipulación del tejido

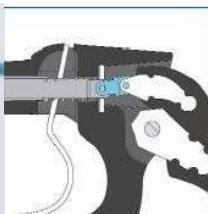

- El mango posee un seguro para mantener el tejido sujetado y traccionado de acuerdo al procedimiento quirúrgico
- Cuando el dispositivo de seguridad está hundido, el seguro se encuentra desactivado

- Posee un dial que permite una rotación de 360°, y permite una simple manipulación digital con una sola mano.
- Mango ergonómico: Aumenta la comodidad del cirujano, por su diseño y los aros suaves insertados en el mango.

Advertencia

- No lo utilice si el producto o el envase estéril están dañados.

Contraindicaciones

- Casos en que estén contraindicadas las técnicas de invasión mínima

PINZA EPIX® GRASPER ATRAUMATICA - UCIPHARMA



FICHA TÉCNICA




Método de esterilización

Los sistemas trocar y/o accesorios vienen estériles mediante un proceso validado de radiación con rayos gamma () (cobalto 60) con una dosis mínima de 2,5 Mrad (25 KG), empacados en el envase final, antes del proceso de etiquetado y acondicionamiento de los mismos.

Para el control del proceso de esterilización se utilizaron indicadores biológicos (esporas de *Bacillus pumilus*, los cuales se siembran en medio de cultivo TSB y se incuban a 35 °C- 39 °C), en cada ciclo de esterilización.

Presentación

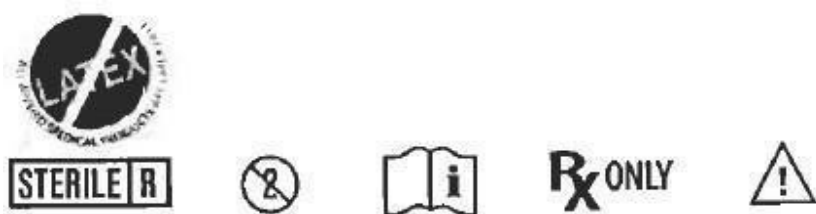

Estéril con Rayos Gama. Un solo uso.

Todos los productos de Applied Medical están libres de látex.

Manejo y Almacenamiento

Maneje este producto con cuidado.

Guarde el producto en un lugar limpio, fresco y seco, al resguardo de vapores químicos.

Disposición final del Producto

Las pinzas grasper atraumáticas se deben desechar después de su uso de acuerdo con la norma vigente en el país o en el caso de Colombia de acuerdo al código de colores.



FICHA TÉCNICA



Información sobre la Garantía

1. Garantía limitada: Applied garantiza que el producto: (i) se ajustará a las especificaciones suministradas por escrito al comprador, y (ii) cumplirá, en el momento del envío, con los requisitos vigentes del Decreto de Alimentos, Medicamentos y Cosméticos de EE.UU. y los reglamentos promulgados conforme a dicho decreto.
2. Reclamaciones en garantía: En el caso de que algún producto no cumpla con las especificaciones estipuladas anteriormente en la garantía limitada, Applied a su discreción: (i) reparará o sustituirá el producto corriendo con todos los gastos; o (ii) reembolsará el precio de compra total del producto. Las obligaciones de Applied según esta sección están sujetas al cumplimiento, por parte del comprador, de todas las instrucciones y requisitos relacionados con el uso del producto.
3. Exclusión de otras garantías y recursos: salvo lo estipulado anteriormente, Applied excluye todas las demás garantías, sean expresas o implícitas, impuestas por las leyes o por cualquier otro conducto, incluidas (sin limitaciones) las garantías implícitas de comercialización o idoneidad para un fin determinado. Applied, no se responsabilizará en ninguna circunstancia, de pérdidas, perjuicios o gastos fortuitos o consiguientes que se originen directa o indirectamente del uso del producto.

Referencias

Referencia	Descripción del producto
C4130	Epix® Pinza Atraumática laparoscópica desechable de 5mm x 35 cm
C4140	Epix® Pinza Atraumatica laparoscópica desechable de 5mm x 45 cm

Registro Invima

INVIMA 2018DM-0003343R1