

NUBENCO ENTERPRISES, INC.

One Kalisa Way,

Paramus, New Jersey 07652-3508, USA

Telephone: (201) 967-9000

Fax: (201) 967-9444

Toll Free: (800) 633-1322

Email: info@nubenco.com**EQUIPO PARA ADMINISTRACION DE LIQUIDOS
MICROGOTEO 60 GOTAS/ML**

Nombre genérico	Equipo para administración de líquidos.
Nombre comercial	Equipo microgoteo 60 gotas/mL
Marca	NUBENCO, marca registrada
Fabricante	Nubenco Enterprises Inc.
Importador	PharmeuRopea de Colombia. Carrera 88 A No 64 D – 32 Bogotá D.C. Colombia PBX 2 23 05 62 Fax 2 23 07 28. ventas@pharmeuropa.com.co . www.pharmeuropa.com.co
Composición	Fabricado en ABS, polipropileno, látex y PVC.
Presentación	Envase unitario en celofán, tiene impresa información de uso, referencia, lote, código de barras, fecha de fabricación y vencimiento, registro sanitario. Paquete por 20 unidades. Embalaje caja cartón corrugado por 200 unidades.
Descripción	Dispositivo estéril desechable, con Spike tipo torpedo con tres orificios para facilitar el flujo de soluciones y protector, cámara transparente, con factor goteo de 60 gotas por mL, manguera de tránsito de 180 cm, en PVC grado médico, regulador de flujo con rodillo para el control del goteo, puerto en Y, para la inyección alterna de medicamentos, conector luer slip.
Indicaciones de uso	Dispositivo médico estéril que sirve para administrar líquidos por una vía endovenosa en forma continua y/o dosificada.
Clasificación	Dispositivo médico invasivo. Riesgo II a
Método de esterilización	Óxido de etileno.
Tiempo de vida útil	5 años
Registro sanitario	INVIMA 2022DM-0024875 Válido hasta 4 de Enero de 2032
Controles de calidad	Cumple con los criterios ISO 8536-4 para las pruebas de esterilidad, residuos de ETO, apirogenicidad, hemólisis, toxicidad, acidez, resistencia de las uniones, material reductores, iones metálicos, residuo de evaporación y absorción al UV del extracto.
Precauciones de uso.	• No utilizar si el empaque no está íntegro. • Producto descartable, manejo de residuos según norma establecida en país de comercialización. • Cambiar el equipo máximo a las 72 horas o según protocolos institucionales. • Almacenar en lugar libre de humedad, teniendo en cuenta las normas internacionales de almacenamiento de insumos médicos.

Jonathan Steeber

NUBENCO ENTERPRISES, INC.

One Kalisa Way,

Paramus, New Jersey 07652-3508, USA


Telephone: (201) 967-9000

Fax: (201) 967-9444

Toll Free: (800) 633-1322

Email: info@nubenco.com

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN/ESPECIFICACIONES
N-AA4C	Equipo microgoteo 60 gotas/ml. puerto en Y, manga de látex, conector luer slip.
N-AC2C-LF	Equipo PREMIUM 60 gotas/ml, con filtro en cámara, puerto en Y, conector luer slip. Libre de DEHP.

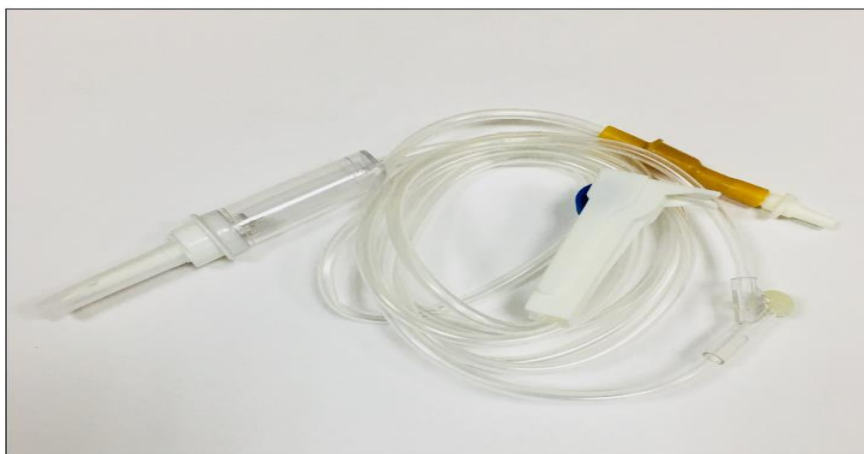

Jonathan Steeber

Jonathan Steeber