

NUBENCO ENTERPRISES, INC.

One Kalisa Way,

Paramus, New Jersey 07652-3508, USA

Telephone: (201) 967-9000

Fax: (201) 967-9444

Toll Free: (800) 633-1322

Email: info@nubenco.com

**EQUIPO PARA ADMINISTRACION DE SOLUCIONES
POR BOMBA DE INFUSIÓN 20 GOTAS/ML ARGUS 707V-717V**

Nombre genérico	Equipo para administración de líquidos por bomba.
Nombre comercial	Equipo para administración de soluciones IV por bombas de infusión Argus 707V-717V
Marca	NUBENCO, marca registrada
Fabricante	Nubenco Enterprises Inc.
Importador	PharmeuRopea de Colombia Carrera 88 A No 64 D – 32 Bogotá D.C. Colombia PBX 2 23 05 62 Fax 2 23 07 28 ventas@pharmeuropa.com.co www.pharmeuropa.com.co
Composición	Fabricado en Acrilonitrilo Butadieno Estireno ABS, Polivinilcloruro (PVC) y Polipropileno (PP).
Presentación	Envase unitario en blíster, tiene impresa información de uso, referencia, lote, código de barras, fecha de fabricación, fecha de vencimiento y registro sanitario. Paquete por 20 unidades. Embalaje caja cartón corrugado por 200 unidades.
Descripción	Dispositivo estéril desechable, con spike tipo torpedo con tres orificios para facilitar el flujo de soluciones con protector, filtro de aire, cámara transparente Y fotosensible con factor goteo de 20 gotas por mL, manguera de tránsito en PVC flexible, regulador de flujo con rodillo para el control del goteo, clamp plano blanco, sitio en Y para la inyección alterna de medicamentos, conector. En el equipo fotosensible manguera en PVC con coloración protectora de luz masterbatch, segmento bomba transparente de 20 cm, con conector con filtro venteado tipo luer lock, purgado de 22 mL, libre de látex y DEHP. En el equipo PREMIUM tubo especial calibrado en PVC flexible, con puerto en Y para uso libre de aguja y conector combo luer slip-luer lock, libre de látex y DEHP.
Indicaciones de uso	Dispositivo médico estéril que sirve para administrar líquidos por una vía endovenosa en forma continua y/o dosificada por medio de bomba de infusión ARGUS 707V y/o 717V.
Clasificación	Dispositivo médico invasivo, Riesgo IIa.
Método de esterilización	Óxido de etileno.
Tiempo de vida útil	5 años
Registro sanitario	INVIMA 2022DM-0024875 Válido hasta 4 de Enero de 2032
Controles de calidad	Cumple con los criterios ISO 8536-4: 2010 para las pruebas de esterilización, apirogenicidad, atoxicidad, hemolisis, biocompatibilidad de los componentes, integridad, iones metálicos, material reductos, pH, Absorción al UV, residuo de evaporación, contenido de partículas, porcentaje de filtración, velocidad de flujo, entrada de aire, fuerza de selle, resistencia de las uniones, presión de fuga, cámara de goteo, funcionamiento adecuado del spike, roller, capsula, tubo blando y regulador de flujo.



NUBENCO ENTERPRISES, INC.

One Kalisa Way,

Paramus, New Jersey 07652-3508, USA

Telephone: (201) 967-9000

Fax: (201) 967-9444

Toll Free: (800) 633-1322


Email: info@nubenco.com

Precauciones de uso.

- No utilizar si el empaque no está íntegro.
- Producto descartable, manejo de residuos según norma establecida en país de comercialización.
- Cambiar el equipo máximo a las 72 horas o según protocolos institucionales.
- Almacenar en lugar libre de humedad, teniendo en cuenta las normas internacionales de almacenamiento de insumos médicos.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN/ESPECIFICACIONES
N-AB6E-LFP	Equipo administración I.V. de soluciones fotosensibles por bomba de infusión Argus 707V-717V. Tubería con coloración protectora de luz masterbatch, longitud 270 cm, conector con filtro venteado tipo luer lock, Libre de látex y DEHP.
N-AB3E-LF	Equipo PREMIUM para administración I.V. de soluciones por bomba de infusión puerto en Y libre de aguja, conector luer slip-luer lock, longitud 225 cm. Argus 707V-717V.

N-AB6E-LFP

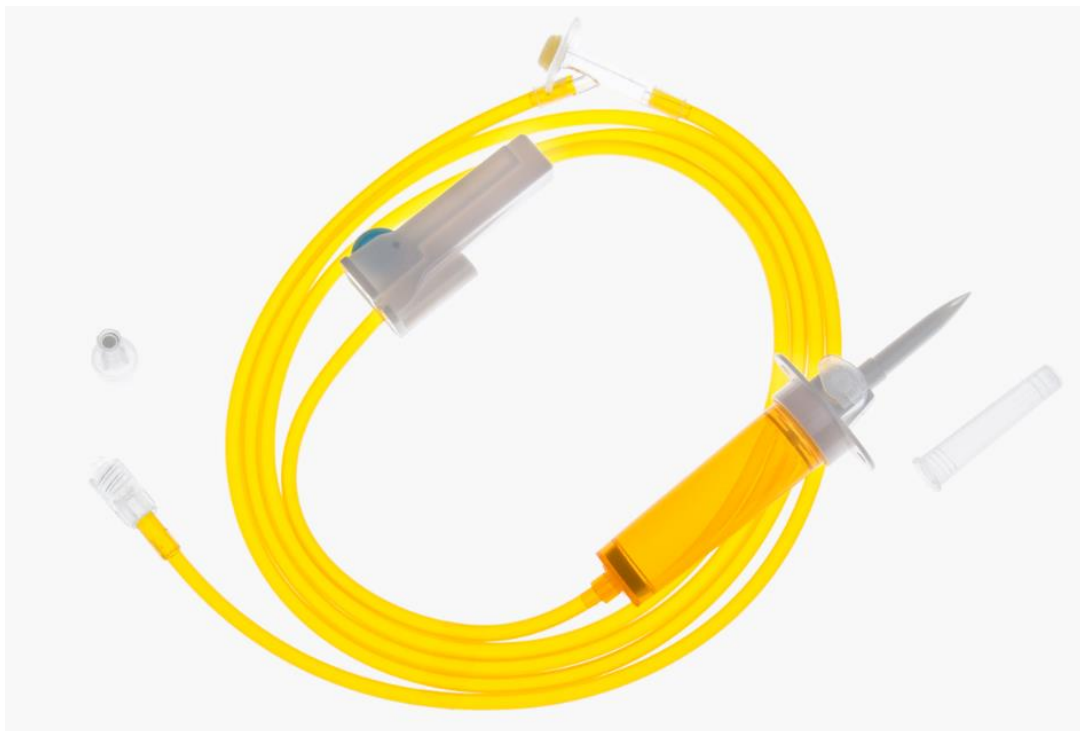

NUBENCO ENTERPRISES, INC.

One Kalisa Way,

Paramus, New Jersey 07652-3508, USA

Telephone: (201) 967-9000

Fax: (201) 967-9444

Toll Free: (800) 633-1322

Email: info@nubenco.com

N-AB3E-LF

