

Ficha Técnica

RENASYS TOUCH ◊ CANISTER para Kits con puerto blando , depósitos y accesorios para la aplicación de terapia de presión negativa.



Descripción

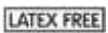
- Los accesorios del sistema de Presión Negativa comprenden:
 - Drenaje Soft Port con sistema de sellado compatibles con kits Foam RENASYS y conector en "Y" RENASYS.
 - Depósitos de 300ml y de 800ml sellados son compatibles con RENASYS TOUCH.
 - Conector en "Y". Compatible con Drenaje Soft Port y depósitos de 300ml y 800ml RENASYS TOUCH.

Descripción	Composición	Indicaciones	Contenido del kit
Drenaje Soft Port 	Lámina de poliuretano, filtro de polietersulfona sobre poliéster no tejido con adhesivo, inserto de espuma de poliuretano, tejido de poliéster y conectores de polipropileno, termoplástico y nylon.	Transmisión de presión Negativa desde la Consola hacia el lecho de la herida, transporte de exudado procedente de la herida hacia el depósito recolector	Kit con drenaje individual de Soft Port con sistema de sellado, de doble lumen, resistente a la flexión y a la compresión.
Depósitos  Capacidad: Renasys Tocuh 300ml y 800ml	Contenedor y tapa: Resina ABS. Tubos de conexión: PVC de grado médico Filtro anti- desbordamiento: Fibras de carbono activo Gelificante: Poliacrilato sódico.	Recogida de todo tipo de exudado procedente de la herida. Los depósitos de 300ml y de 800ml sellados son compatibles con ,RENASYS TOUCH	-Contenedor con tapa sellada. -Tubos de conexión con filtro anti-desbordamiento. -Tubo de conexión con el drenaje. - Saco de gelificante para evitar derrames accidentales.
Conector en "Y" 	Tubos de conexión: PVC de grado médico. Conectores: polipropileno.	Conector en Y que permite tratar 2 heridas alejadas entre sí con la misma bomba de vacío	Conector individual en "Y" y 3 tubos de conexión de 30cm

RENASYS[◇] CANISTER para Kits con Soft Port, depósitos y accesorios para la aplicación de terapia de presión negativa.

Contenido del Kit

Código de Producto	Descripción	Unidades de envase	Código EAN envase	Registro Sanitario
66801274	Kit Canister RENASYS TOUCH 800ml	1	00040565126531	INVIMA 2019DM-0019532
66801273	Kit Canister RENASYS TOUCH 300ml	1	00040565126524	
66800971	Conector en Y	1	00040565125541	
66800799	Soft Port con sistema de sellado	1	00040565125558	INVIMA 2011DM-0007065

Certificación	Composición	Esterilidad	Conservación	Fabricante
ON nº 0297 CE nº 404394 MR2 Clase CE Depósitos y conector: I, no estéril Drenaje Soft Port: IIb estéril Smith & Nephew, S.A.U ISO 9001:2008 		 Drenaje Soft Port  DEPÓSITOS Y CONECTOR	 2 años Drenaje Soft Port  	 Smith & Nephew, Inc. 970 Lake Carillon Drive. Suite 110 ST. Petersburg, FL 33716.  Smith & Nephew Medica Limited Hull HU3 2BN, England UK. Distribuidor Smith & Nephew, S.A.U

Leyenda símbolos

	No contiene látex		Producto esterilizado con óxido de etileno
	Caducidad		No reutilizar
	Manténgase en lugar seco		Temperatura de almacenamiento
	No utilizar si el envase está abierto o dañado		Representante autorizado
	Fabricante		

Smith&Nephew Colombia SAS
 Calle 100 N° 7-33 Torre 1 Piso 3,
 Bogotá Tel: 57 (1) 605 7373
www.smith-nephew.com

◇ Marca registrada de
 Smith&Nephew