


ACUFEX DIRECTOR PCL, sistema de guía para la reconstrucción del Ligamento Cruzado Posterior.

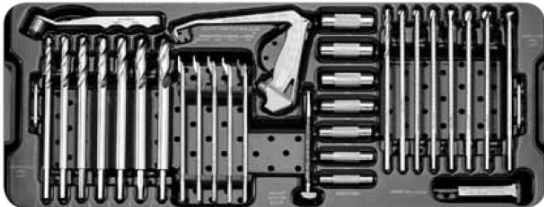

Características

- Sistema completo para reconstrucciones de ligamento cruzado posterior (LCP).
- Guía con mango ergonómico y sistema de auto bloqueo, facilita su control y manejo, incluso con una sola mano.
- Guía con brazo de diseño rectangular, proporciona una mayor rigidez.
- Diferentes modelos de brazos, permite adaptarse a las diferentes técnicas.
- Sistema con tope de seguridad, proporciona un bloqueo seguro cuando se utiliza junto al cable guía de seguridad.

Descripción

Los componentes ACUFEX DIRECTOR PCL están diseñados como parte integral del sistema de guía de perforación ACUFEX DIRECTOR, proporcionando herramientas que permiten una reconstrucción del ligamento cruzado posterior (LCP) fácil, precisa y reproducible. El sistema incluye un tope de seguridad que encaja fácilmente en el mango de la guía y proporciona un bloqueo seguro cuando se usa con el cable guía de seguridad. Los componentes del sistema ACUFEX DIRECTOR PCL deben ser usados en combinación con los componentes del sistema ACUFEX DIRECTOR ELITE ACL.

Limpieza y esterilización

Para la limpieza de los instrumentos ACUFEX se recomienda usar detergentes enzimáticos con baja espuma y pH neutro (6.0 – 8.0). Pueden usarse detergentes con pH alto (con pH no mayor que 11.0).

La esterilización de los instrumentos quirúrgicos ACUFEX se puede realizar con óxido de etileno o con vapor. Los parámetros de tiempo y temperatura de esterilización varían en función del tipo de esterilizador, del ciclo de esterilización, y del tipo de envoltorio.

Indicaciones

El sistema ACUFEX DIRECTOR PCL está indicado para reconstrucciones del ligamento cruzado posterior (LCP).

Presentación

Código Producto	Descripción	Clase CE
7207223	ACUFEX DIRECTOR PCL. Incluye:	
7207282	ACUFEX DIRECTOR PCL brazo tibial	I
7207283	ACUFEX DIRECTOR PCL brazo femoral	I
7207281	ACUFEX DIRECTOR PCL tope de seguridad	I
7207285	PCL Elevador con soporte para cable (requiere uno de los siguientes sistemas para ACL. Cada sistema para ACL requiere un Bullet angulado para tibia (7205524) y un Bullet 4 puntas para fémur (7205525)	I
	72201746 Sistema ACUFEX DIRECTOR ELITE ACL	
	72201965 Sistema ACUFEX DIRECTOR ELITE Soft Tissue	
	72201967 Sistema ACUFEX DIRECTOR ELITE Bone-Tendon-Bone	
	72201966 Sistema ACUFEX DIRECTOR ELITE RCI	
	72201968 Sistema ACUFEX DIRECTOR ELITE Rear Entry	

ACUFEX DIRECTOR PCL, sistema de guía para la reconstrucción del Ligamento Cruzado Posterior.

Componentes opcionales

Código Producto	Descripción	Clase CE
7207291	Plantilla para túnel PCL	I
7207292	Dilatador / Medidor ovalado	I
013670	Raspador tibial PCL	I
013671	Cureta tibial PCL, cerrada	I
013672	Bisturí tibial PCL	I
013673	Cureta tibial PCL, abierta	I
013674	Cureta femoral PCL, calibrada	I
012710	Cureta, cerrada, 5mm	I
013629	Destornillador PCL	I
013622	Tope de broca PCL 8 mm	I
013623	Tope de broca PCL 9 mm	I
013624	Tope de broca PCL 10 mm	I
013625	Tope de broca PCL 11 mm	I
7207357	Bandeja de esterilización grande	I

Desechables (requerido)

Código Producto	Descripción	Clase CE
7207284	Cable guía de seguridad PCL	Ila, estéril

Certificación	Composición	Esterilidad	Conservación	Fabricante
ON nº 0086 CE nº CE506114		  Cable guía de seguridad (7207284)		 Smith & Nephew Inc. 150 Minuteman Road Andover, MA 01810, USA  Smith & Nephew Medical limited 101 Hessle Road Hull HU3 2BN Reino Unido Distribuidor Smith & Nephew, SAU ISO 9001

Leyenda símbolos

 No contiene látex

 Producto esterilizado por irradiación

 Fabricante



Producto no esterilizado



Manténgase en lugar seco



Representante autorizado

Advanced Surgical Devices Division

Smith & Nephew, S.A.U

Fructuós Gelabert, 2-4. 08970. Sant Joan Despí (Barcelona)

Tel. Atención Cliente: 93 373 75 14 / 93 373 72 14 - Fax: Atención cliente: 93 373 72 65

A-28123297

informacion@smith-nephew.com www.smith-nephew.com