
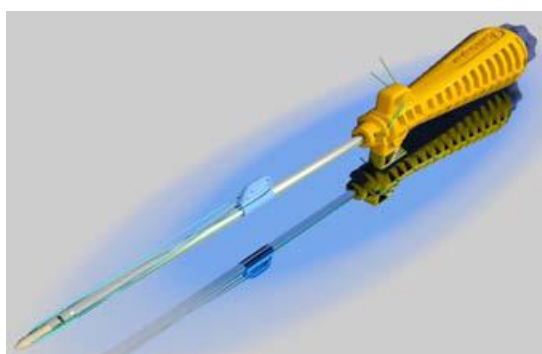


BIORAPTOR Knotless, anclaje sin nudos

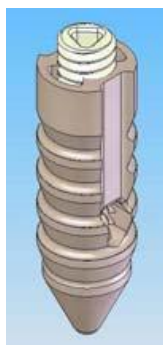

Características

- El diseño del dispositivo proporciona una fijación firme de los tejidos blandos al hueso y **un mayor control de la tensión de la sutura final eliminando el anudado**. El anclaje atrapa internamente la sutura externa que atravesará el tejido blando a reparar.
- Anclaje para suturas **no reabsorbibles de polietereftercetona** (PEEK-OPTIMA® de Invibio®), material biocompatible y radiotransparente.
- Enhebrador con 1 sutura de elastómero termoplástico.
- **Cuerpo del implante diseñado en 2 piezas**; anclaje para suturas precargado con un dispositivo de inserción, una sutura de retención **que facilita la fijación del anclaje** y un dispositivo que facilita el enhebrado de la sutura externa.
- Dispositivo de inserción compuesto por un eje de acero inoxidable y mango de policarbonato y ABS.

Descripción

BIORAPTOR Knotless Suture Anchor, es un dispositivo de fijación diseñado para proporcionar una unión segura de tejido blando al hueso. El dispositivo consta de un anclaje para suturas precargado con un dispositivo de inserción, una sutura de retención que facilita la fijación del anclaje y un dispositivo diseñado para facilitar el enhebrado de la sutura externa a través del ojal del anclaje.

El instrumental detallado guarda un código de colores igual al del tapón-rosca para su fácil identificación. Los Instrumentales válidos para otros modelos de la familia BIORAPTOR son también válidos para su uso con este anclaje.

Indicaciones

El anclaje para suturas sin nudos BIORAPTOR de Smith & Nephew está diseñado para la reconexión de tejido blando al hueso para las indicaciones siguientes:

Cadera:

- Reparación de la cápsula de la cadera.
- Reconexión del labio cotiloideo.

Hombro:

- Estabilización capsular: reparación de Bankart, inestabilidad del hombro anterior, reparaciones de lesiones SLAP, reconstrucciones de desplazamiento capsular o capsulolabiales.

- Reparaciones de separación acromioclavicular.
- Reparaciones de deltoides.
- Reparaciones de desgarros del manguito de los rotadores.
- Tenodesis del bíceps.

Pie y tobillo

- Reparaciones de deformidad en valgo.
- Reparaciones/reconstrucciones de inestabilidad medial o lateral.
- Reparaciones/reconstrucciones del tendón de Aquiles.
- Reconstrucciones de la curvatura plantar.
- Reparaciones/reconstrucciones de ligamentos/tendones metatarsianos.
- Extracción de juanete.

Codo, muñeca y mano

- Reconexión del tendón del bíceps.
- Reconstrucciones del ligamento colateral ulnar o radial.
- Reparación de epicondilitis lateral.

Rodilla

- Reparaciones extra capsulares: ligamento colateral medial y lateral y ligamento oblicuo posterior.
- Realineación rotular y reparaciones de tendones: avance del músculo vasto medial oblicuo.
- Tenodesis de banda iliotibial.

BIORAPTOR Knotless, anclaje sin nudos

Composición

Anclaje para suturas no reabsorbibles	PEEK-OPTIMA® de Invibio® (polieteretercetona).
Sutura de retención	Sutura de poliéster trenzado no absorbible (USP N°2-0).
Dispositivo de inserción	Eje de acero inoxidable con mango de policarbonato, y ABS, y un enhebrador de sutura de elastómero termoplástico.

Instrucciones de uso

Seguir las instrucciones descritas en el prospecto de Bioraptor Knotless suture anchor.

Presentación

Código Producto	Descripción
72202397	Anclaje para suturas sin nudos BIORAPTOR para cadera
72202403	Anclaje para suturas sin nudos BIORAPTOR para hombro

Instrumentación

Código Producto	Descripción
72202399	Guía 2,9mm, punta afilada
72202400	Guía 2,9mm, punta en corona
72202793	Obturador 2,9mm, punta canulada
72201918	Broca 2,9mm, 2.7 (hombro)
72201395	Broca 2,9mm, 3.0 (cadera)

Instrumentación compatible

Código Producto	Descripción
72201388	CX1 Guía 2.9mm, punta afilada
72201389	CX1 Guía 2.9mm, boca de pez
72201390	CX1 Guía 2.9mm, punta en corona
72201391	CX1 Offset Guía 2.9mm, boca de pez
72201392	CX1 Obturador 2.9mm, no canulado
72201394	CX1 Obturador 2.9mm, punta trocar
72201393	CX1 Obturador 2.9mm, canulado

BIORAPTOR Knotless, anclaje sin nudos

Certificación	Composición	Esterilidad	Conservación	Fabricante
ON nº 0086 CE nº CE506114 Clase CE IIb: Anclajes IIa: Brocas I: Resto	LATEX FREE	STERILE R Anclajes NON STERILE Resto	5 años Anclajes No reutilizar Caducidad	 Smith & Nephew Inc. 150 Minuteman Road Andover, MA 01810, USA EC REP Smith & Nephew Medical Limited 101 Hessle Road Hull HU3 2BN UK Distribuidor Smith & Nephew, SAU ISO 9001

Leyenda símbolos

LATEX FREE No contiene látex

STERILE R

 Producto esterilizado por irradiación

 No utilizar si el envase está abierto o dañado

 Fabricante

NON STERILE

 Producto no estéril

No reutilizar

 No reutilizar

Caducidad

 Caducidad

EC REP

 Representante autorizado

Advanced Surgical Devices Division

Smith & Nephew, S.A.U

Frutuós Gelabert, 2-4. 08970. Sant Joan Despí (Barcelona)

Tel. Atención Cliente: 93 373 75 14 / 93 373 72 14 - Fax. Atención cliente: 93 373 72 65

A-28123297

informacion@smith-nephew.com. www.smith-nephew.com