

BIOSURE HA, tornillo interferencial para LCA/LCP



Características

- Su diseño de **aristas reforzadas y no afiladas** lo convierten en la opción óptima para la reconstrucción del LCA/LCP con las plastias de tejido blando, asegurando en su introducción la conservación de la plastia intacta, evitando roturas y rasguños que la debiliten.
- **Biocompatibilidad demostrada gracias al material PLLA-HA** que combina ácido poli-L-láctico (PLLA) con **hidroxiapatita (HA)**, fosfato cálcico similar al componente mineral del hueso.
- **Amplio rango de medidas** (24 tallas) que proporciona una excepcional fijación del injerto y una adecuación a los requerimientos anatómicos del paciente o técnica utilizada.
- Presenta un **diseño cónico en la punta del tornillo** que **facilita su inserción** y una **pared de consistente grosor** que **aumenta su fuerza**, manteniendo una resistencia adecuada hasta que se produce la cicatrización.
- Una vez el injerto se ha adherido al hueso **se reabsorbe gradualmente en 3 años**.

Descripción

El tornillo interferencial BIOSURE HA es un implante bioabsorbible fabricado con 75 % de ácido poli-L-láctico y 25 % de hidroxiapatita (HA). El tornillo está diseñado para mantener una resistencia adecuada hasta que se produzca la cicatrización. El polímero normalmente se absorbe en 3 años.

El tornillo interferencial BIOSURE HA se suministra estéril, para usar una sola vez.

Indicaciones

El tornillo absorbible interferencial BIOSURE HA está indicado para la fijación del injerto en las ligamentoplastias durante los procedimientos de reconstrucción del ligamento cruzado anterior y/o posterior (LCA/LCP).

Esterilización

El producto se suministra estéril. El método de esterilización está indicado en la etiqueta del envase (óxido de etileno).

Almacenaje

No utilizar el contenido si el envoltorio está abierto o deteriorado. Un sólo uso.

Instrucciones de uso

Seguir detenidamente las instrucciones descritas en el prospecto.

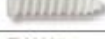
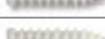
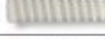
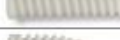
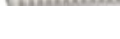
Composición

75 % ácido poli-L-láctico y 25 % hidroxiapatita.

BIOSURE HA, tornillo interferencial para LCA/LCP

Presentación

BIOSURE HA Tornillos interferenciales

Referencia	Descripción	
72201768	6mm x 20mm	
72201769	6mm x 25mm	
72201770	6mm x 25mm, rosca inversa	
72201771	7mm x 20mm	
72201772	7mm x 25mm	
72201773	7mm x 25mm, rosca inversa	
72201774	7mm x 30mm	
72201775	8mm x 20mm	
72201776	8mm x 25mm	
72201777	8mm x 25mm, rosca inversa	
72201778	8mm x 30mm	
72201779	8mm x 35mm	
72201780	9mm x 20mm	
72201781	9mm x 25mm	
72201782	9mm x 30mm	
72201783	9mm x 35mm	
72201784	10mm x 20mm	
72201785	10mm x 25mm	
72201786	10mm x 30mm	
72201787	10mm x 35mm	
72201788	11mm x 25mm	
72201789	11mm x 30mm	
72201790	11mm x 35mm	
72201791	12mm x 35mm	

BIOSURE HA Guías. Material asociado desechable.

Referencia	Descripción
72201201	Guía 1.2 mm x 18' Caja de 5 estéril

BIOSURE HA, tornillo interferencial para LCA/LCP

BIOSURE HA Destornilladores

Referencia	Descripción	
72201887	BIOSURE Driver	
72201888	BIOSURE Ratchet Driver (requiere la parte número 7207707)	
7207707	Mango Ratcheting con Adaptador Hudson	

BIOSURE HA Sistema de Terrajas

BIOSURE Tap System

Referencia	Descripción	
72201889	BIOSURE Tap 6mm	
72201890	BIOSURE Tap 7mm	
72201891	BIOSURE Tap 8mm	
72201892	BIOSURE Tap 9mm	
72201893	BIOSURE Tap 10mm	
72201887	BIOSURE Driver	

BIOSURE EASY TAP System

72201190	BIOSURE EASY TAP 6mm	
72201191	BIOSURE EASY TAP 7mm	
72201192	BIOSURE EASY TAP 8mm	
72201193	BIOSURE EASY TAP 9mm	
72201194	BIOSURE EASY TAP 10mm	
72201888	BIOSURE Ratchet Driver	
7207707	Mango Ratcheting con Adaptador Hudson	

Certificación	Composición	Esterilidad	Conservación	Fabricante
ON n° 0086 CE n° CE506114 Clase CE: III: Biorci HA IIA: guía I: Destornillador, TAP	LATEX FREE	STERILE EO Tornillos interferenciales STERILE R Guía NON STERILE Instrumental	5 años 2	 Smith & Nephew Inc. 150 Minuteman Road Andover, MA 01810, USA EC REP Smith & Nephew Medical limited 101 Hessle Road Hull HU3 2BN Reino Unido Distribuidor Smith & Nephew, SAU ISO 9001

Leyenda símbolos

LATEX FREE	No contiene látex	STERILE EO	Producto esterilizado con óxido de etileno
STERILE R	Producto esterilizado por irradiación	NON STERILE	Producto no esterilizado
	Caducidad	2	No reutilizar
	No utilizar si el envase está abierto o dañado	EC REP	Representante autorizado
	Fabricante		