


Fast-Fix 360° de peek, Sistema de reparación meniscal.

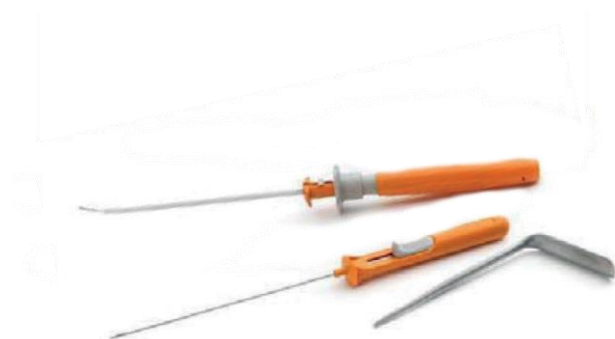

Características

- **Inserción activa 360°**, proporciona una colocación del implante más rápida y fácil en cualquier posición de la mano con una menor exposición de la aguja detrás de la cápsula.
- **Aguja disponible con punta recta, curva y curva reversa**, proporciona un mejor acceso a la zona de la lesión.
- **Perfil de aguja más bajo y rígido**, reduce la flexión de la aguja, mejorando el control.
- **Implantes más pequeños y sutura ultrabraid 2-0**, resulta en una menor inserción y minimiza el traumatismo al menisco.
- **Mango ergonómico**.
- **Sonda de profundidad ajustable y marcas de láser en la punta de la aguja**, permiten establecer el límite de profundidad de la aguja.
- **Confirmación mediante sonido**, asegura que el implante se ha colocado correctamente.
- **Permite la recolocación del dispositivo sin la implantación del anclaje**

Descripción

El sistema de reparación de menisco FAST-FIX 360 de Smith & Nephew es un dispositivo de reparación de menisco con componentes totalmente internos. Cada dispositivo incluye dos implantes de polímero no reabsorbible, previamente atados con sutura no reabsorbible n° 2-0 y precargados en un sistema de colocación con aguja. Además, incluye un dispositivo de limitación de profundidad que se encuentra preajustado aproximadamente a 18mm desde la punta de la aguja. Puede ajustarse hacia abajo en incrementos de 2mm hasta aproximadamente 10mm.

Indicaciones

El sistema de reparación de menisco FAST-FIX 360 está diseñado para su uso como dispositivo de retención de suturas facilitando los procedimientos percutáneos o endoscópicos de tejido blando. El sistema FAST-FIX 360 está indicado para su uso en reparaciones de menisco y procedimientos de trasplante de menisco artificial de poliuretano y aloinjerto. El sistema FAST-FIX 360 está indicado para anclar el aloinjerto al reborde del menisco durante los procedimientos de trasplante de aloinjerto.

Composición

Implante	Polímero de polieterecetona (PEEK-OPTIMA® de Invibio®)
Sutura	Sutura 2-0 de polietileno UHMW con trenzado de monofilamento de polipropileno
Aguja	Acero inoxidable
Cánula ranurada	Pebax®
Medidor de profundidad	Pebax ®
Enhebrador sutura	Poliuretano (TECOFLEX)

Presentación

Empaque individual por caja

Disposición Final

Una vez usado, este dispositivo puede constituir un posible riesgo biológico por lo que se deberá manejar de conformidad con los procedimientos médicos aceptados y los requisitos locales y nacionales aplicables. Desechar en contenedores o bolsas de producto contaminado y/o corto-punzante.

Presentación

Código Producto	Descripción	Clase CE
72202468	Sistema de reparación de menisco curvo FAST-FIX 360	Ib, estéril
72202674	Set de cánula ranurada y empujador de nudos/cortador de suturas, recto. Desechable	Ila, estéril

Certificación	Composición	Esterilidad	Conservación	Fabricante
ON nº 0086 CE nº CE 00356  Smith & Nephew, S.A.U ISO 9001:2008		 (Excepto accesorios marcados como no estériles)	 3 años  	 Smith & Nephew Inc. 150 Minuteman Road Andover, MA 01810, USA  Smith & Nephew York Science Park Heslington, York. YO10 5DF. UK Distribuidor Smith & Nephew, SAU

Leyenda símbolos

 No contiene látex	 Producto esterilizado con óxido de etileno
 Caducidad	 No reutilizar
 No utilizar si el envase está abierto o dañado	 Fabricante

Apoyando a los profesionales de la salud por más de 150 años.

Smith&Nephew Colombia SAS

Calle 100 N° 7-33 Torre 1 Piso 3, Bogotá
Tel: 57 (1) 605 7373
www.smith-nephew.com

Reg. San.: INVIMA 2009DM-0003905
Smith&Nephew Colombia SAS