



Características:

- Clavo intramedular canulado con angulación medio-lateral de 4º, permite su colocación a través de la punta del trocánter mayor. Su parte proximal en forma trapezoidal, proporciona un mayor control rotacional y estabilidad.
- Fabricado en Titanio. Diámetro proximal: 15.25mm X 16.25mm
- Bloqueo proximal : Previene la rotación y el acortamiento del fémur. 2 Opciones
- Tornillo deslizante subtocantérico para fracturas estables por debajo del trocánter menor.
- 2. Tornillos integrados (deslizante y de compresión) proporcionan compresión activa, brindando una mejor resistencia a la rotación de la cabeza y al Cut-Out.
- Clavo Corto Universal: Punta distal en forma de diapasón, para una mejor distribución del estrés en el canal femoral, disponible en diámetros de 10 y 11.5mm. Inclinaciones de 125° y 130°. Longitud de 180mm
- Clavo Largo derecho e Izquierdo: disponibles en diámetros de 10 y 11.5mm, inclinaciones de 125° y 130°.
- Instrumentación TRIGEN Intuitivo y fácil de usar, Barra Antirrotación: Mantiene la reducción durante el fresado y la inserción del tornillo.
- Guía de Alineación: Ideal para una colocación apropiado del tornillo deslizante en la cabeza femoral

Descripción

El clavo TRIGEN™ INTERTAN. Clavo trocantérico especializado para fracturas de fémur proximal. Ofrece implantes anatómicos con forma trapezoidal opuesta a la convencional circular de los clavos intramedulares. Brinda la opción de dos tornillos integrados al cuello que incrementan la estabilidad y resistencia intraoperatoria y postoperatoria a la rotación de la cabeza femoral, así elimina el excesivo deslizamiento y la posibilidad del efecto Z.

Indicaciones:

Indicado en casos de fracturas de la región proximal del fémur, simples, con severa conminución, espirales, oblicuas y segmentadas; uniones fallidas o incompletas, tratamiento preventivo de fracturas patológicas, reconstrucciones después de la resección de un tumor o injerto, fracturas subtrocantéricas o intertrocantéricas, fracturas ipsilaterales del cuello/diáfisis del fémur, fracturas intracapsulares.

Composición

Titanio: Ti-6V-4AI (ASTM F 136)

Nitrógeno Máx. 0,05% Aluminio 5,5% - 6,75% Carbono Máx. 0,08% Vanadio 3,5% - 4,5% Hidrógeno Máx. 0,015% Ytrio Máx. 0,005% Hierro Máx. 0,30% Titanio Balance

Oxígeno Máx. 0,20%


Instrucciones de Uso:

Ver técnica quirúrgica del sistema TRIGEN INTERTAN.



• Presentación:

Clavo INTERTAN Corto 180mm.

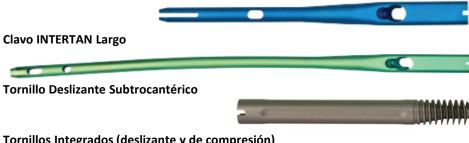

Tornillos Integrados (deslizante y de compresión)



Tornillo de Bloqueo de 5.0mm



Tapón



Certificación	Composición	Esterilidad	Conservación	Fabricante
ON n° 0086 CE n° 512804	LATEX FREE	STERILE R	10 años	Smith & Nephew Inc. 1450 Brooks Road Memphis, TN 38116. USA
Clase CE Ilb Smith & Nephew, S.A.U ISO 9001:2008			2 🛞	Smith & Nephew Orthopaedics GmbH Alemanenstrasse 14 17832 Tuttlingen. Germany
TUV				Distribuidor Smith & Nephew, SAU

Leyenda símbolos

LATEX FREE No contiene látex





No utilizar si el envase está abierto o dañado



Fabricante



Producto esterilizado por irradiación



No reutilizar



Representante autorizado



Presentación:

Clavos Intertan					
Referencia	Descripción				
71675383	CLAVO INTERTAN10s X180MM125°				
71675384	CLAVOINTERTAN10sX180MM130°				
71675208	CLAVO INTERTAN 11.5X180MM130°				
71675202	CLAVO INTERTAN 11.5X180MM125°				
71675509	CLAVO INTERTAN 10SX 34 125D IZQ				
71675511	CLAVO INTERTAN 10SX 36 125D IZQ				
71675513	CLAVO INTERTAN 10SX 38 125D IZQ				
71675515	CLAVO INTERTAN 10SX 40 125D IZQ				
71675531	CLAVO INTERTAN 10SX 34 125D DCH				
71675533	CLAVO INTERTAN 10SX 36 125D DCH				
71675535	CLAVO INTERTAN 10SX 38 125D DCH				
71675537	CLAVO INTERTAN 10SX 40 125D DCH				
71676553	CLAVO INTERTAN 1.5 125° 11.5MMX34	IZQ			
71676555	CLAVO INTERTAN 1.5 125° 11.5MMX36	IZQ			
71676557	CLAVO INTERTAN 1.5 125° 11.5MMX38	IZQ			
71676559	CLAVO INTERTAN 1.5 125° 11.5MMX40	IZQ			
71676554	CLAVO INTERTAN 1.5 125° 11.5MMX34	DCH			
71676556	CLAVO INTERTAN 1.5 125° 11.5MMX36	DCH			
71676558	CLAVO INTERTAN 1.5 125° 11.5MMX38	DCH			
71676560	CLAVO INTERTAN 1.5 125° 11.5MMX40	DCH			





Presentación:

	Clavos Intertan Solicitud Especial
Referencia	Descripción
71675502	CLAVO INTERTAN 10SX 26CM 130D IZQ
71675506	CLAVO INTERTAN 10SX 30CM 130D IZQ
71675508	CLAVO INTERTAN 10SX 32CM 130D IZQ
71675510	CLAVO INTERTAN 10SX 34CM 130D IZQ
71675512	CLAVO INTERTAN 10SX 36CM 130D IZQ
71675514	CLAVO INTERTAN 10SX 38CM 130D IZQ
71675516	CLAVO INTERTAN 10SX 40CM 130D IZQ
71675524	CLAVO INTERTAN 10SX 26CM 130D DCH
71675528	CLAVO INTERTAN 10SX 30CM 130D DCH
71675530	CLAVO INTERTAN 10SX 32CM 130D DCH
71675532	CLAVO INTERTAN 10SX 34CM 130D DCH
71675534	CLAVO INTERTAN 10SX 36CM 130D DCH
71675536	CLAVO INTERTAN 10SX 38CM 130D DCH
71675538	CLAVO INTERTAN 10SX 40CM 130D DCH
71675279	CLAVO INTERTAN 11.5MMX26CM 130°IZQ
71675281	CLAVO INTERTAN 11.5MMX28CM 130°IZQ
71675283	CLAVO INTERTAN 11.5MMX30CM 130°IZQ
71676573	CLAVO INTERTAN 1.5 11.5MMX32CM 130D IZQ
71676575	CLAVO INTERTAN 1.5 11.5MMX34CM 130D IZQ
71676577	CLAVO INTERTAN 1.5 11.5MMX36CM 130D IZQ
71676579	CLAVO INTERTAN 1.5 11.5MMX38CM 130D IZQ
71676581	CLAVO INTERTAN 1.5 11.5MMX40CM 130D IZQ
71675280	CLAVO INTERTAN 11.5MMX26CM 130°DCHO
71675282	CLAVO INTERTAN 11.5MMX28CM 130°DCHO
71675284	CLAVO INTERTAN11.5MMX30CM 130°DCHO
71676574	CLAVO INTERTAN 1.5 11.5MMX32CM 130D DCH
71676576	CLAVO INTERTAN 1.5 11.5MMX34CM 130D DCH
71676578	CLAVO INTERTAN 1.5 11.5MMX36CM 130D DCH
71676580	CLAVO INTERTAN 1.5 11.5MMX38CM 130D DCH
71676582	CLAVO INTERTAN 1.5 11.5MMX40CM 130D DCH
71675501	CLAVO INTERTAN 10SX 26CM 125D IZQ
71675505	CLAVO INTERTAN 10SX 30CM 125D IZQ
71675507	CLAVO INTERTAN 10SX 32CM 125D IZQ
71675523	CLAVO INTERTAN 10SX 26CM 125D DCH
71675527	CLAVO INTERTAN 10SX 30CM 125D DCH
71675529	CLAVO INTERTAN 10SX 32CM 125D DCH
71675235	CLAVO INTERTAN 11.5MMX26CM 125°IZQ
71675237	CLAVO INTERTAN 11.5MMX28CM 125°IZQ
71675239	CLAVO INTERTAN 11.5MMX30CM 125°IZQ
71676551	CLAVO INTERTAN 1.5 125° 11.5MMX32CM IZQ
71675236	CLAVO INTERTAN11.5MMX26CM 125°DCHO
71675238	CLAVO INTERTAN11.5MMX28CM 125°DCHO
71675240	CLAVO INTERTAN11.5MMX30CM 125°DCHO
71676552	CLAVO INTERTAN 1.5 125° 11.5MMX32CM DCH





Presentación:

	Tornillos y Tapón de Clavo Intertan	
Referencia	Descripción	
71675040	TAPON INTERTAN 0MM	
71672030	TORNILLO COMPRESION INTERTAN 7.0X30MM	
71677080	KIT TORNILLO DESLIZANTE Y COMPRESION 80/75	
71677085	KIT TORNILLO DESLIZANTE Y COMPRESION 85/80	
71677090	KIT TORNILLO DESLIZANTE Y COMPRESION 90/85	
71677095	KIT TORNILLO DESLIZANTE Y COMPRESION 95/90	
71677100	KIT TORNILLO DESLIZANTE Y COMPRESION 100/95	
71677105	KIT TORNILLO DESLIZANTE Y COMPRESION 105/100	
71677110	KIT TORNILLO DESLIZANTE Y COMPRESION 110/105	
71677115	KIT TORNILLO DESLIZANTE Y COMPRESION 115/110	
71678080	TORNILLO DESLIZANTE INTERTAN 11X80MM	
71678085	TORNILLO DESLIZANTE INTERTAN 11X85MM	
71678090	TORNILLO DESLIZANTE INTERTAN 11X90MM	
71678095	TORNILLO DESLIZANTE INTERTAN 11X95MM	
71678010	TORNILLO DESLIZANTE INTERTAN 11X100MM	
71678005	TORNILLO DESLIZANTE INTERTAN 11X105MM	
71678011	TORNILLO DESLIZANTE INTERTAN 11X110MM	
71678015	TORNILLO DESLIZANTE INTERTAN 11X115MM	
71645025	TORNILLO TRIGEN BAJO PERFIL 5.0MM X 25MM	
71645030	TORNILLO TRIGEN BAJO PERFIL 5.0MM X 30MM	
71645035	TORNILLO TRIGEN BAJO PERFIL 5.0MM X 35MM	
71645040	TORNILLO TRIGEN BAJO PERFIL 5.0MM X 40MM	
71645045	TORNILLO TRIGEN BAJO PERFIL 5.0MM X 45MM	
71645050	TORNILLO TRIGEN BAJO PERFIL 5.0MM X 50MM	
71645055	TORNILLO TRIGEN BAJO PERFIL 5.0MM X 55MM	
71645060	TORNILLO TRIGEN BAJO PERFIL 5.0MM X 60MM	
71645065	TORNILLO TRIGEN BAJO PERFIL 5.0MM X 65MM	
71645070	TORNILLO TRIGEN BAJO PERFIL 5.0MM X 70MM	
71645075	TORNILLO TRIGEN BAJO PERFIL 5.0MM X 75MM	



Smith & Nephew Colombia SAS Calle 100 N°7-33 Torre 1 Piso 3, Bogotá Tel: 57 (1) 605 7373 www.smith-nephew.com Material exclusivo para médicos especialistas. Reg. San.: INVIMA 2022DM-0025264