


Mascarilla Total-face NIV ClassicStar® Consumibles y accesorios


La mascarilla Total-face NIV ClassicStar® está diseñada para una terapia de ventilación no invasiva. La mascarilla cubre la cara, boca, nariz y ojos. Por lo tanto, asegura una terapia eficiente, incluso cuando el paciente respira por la boca.



ClassicStar® SE
(con codo estándar)
El codo azul indica que la máscara no tiene ni válvula antiasfixia ni puertos de espiración.

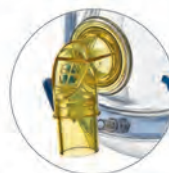

ClassicStar® AAV
(con válvula antiasfixia)
sin puertos de espiración.
El codo amarillo transparente incluye una válvula antiasfixia que asegura un cómodo acceso al aire ambiente si hubiera una presión reducida (<3 cm H₂O).

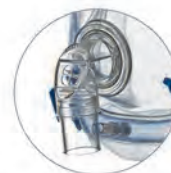

ClassicStar® AAV
(con válvula antiasfixia)
El codo blanco transparente incluye una válvula antiasfixia que asegura un cómodo acceso al aire ambiente si hubiera una presión reducida (<3 cm H₂O). Los puertos de espiración apoyan la eliminación de CO₂ durante la ventilación no invasiva.

Ventajas

Mascarilla Total-face NIV ClassicStar®

La mascarilla Total-face ClassicStar elimina los problemas en puentes nasales sellando las áreas faciales menos sensibles a la presión y con contornos más suaves. Además, en el caso de anomalías faciales, la mascarilla facial completa es la mejor elección.

- La mascarilla Total-face NIV ClassicStar tiene una almohadilla rellena de aire que puede ajustarse a la cara de cada paciente. La almohadilla puede inflarse o desinflarse usando una bomba. Debido a su adaptabilidad, la máscara ClassicStar proporciona una mayor comodidad y un sellado eficiente.
- La amplia almohadilla ejerce presión a lo largo de una mayor área superficial, lo cual ayuda a evitar la irritación cutánea.
- La mascarilla, que incluye una cinta adicional para la cabeza en su parte superior, proporciona una sujeción estable y segura, previniendo que la mascarilla se mueva y reduciendo la presión.
- Las pinzas de liberación rápida se incorporan para quitar fácilmente la mascarilla.
- El codo de la ClassicStar puede moverse 360°. Para la versión SE, el codo puede moverse también verticalmente, proporcionando así una mayor flexibilidad.
- La mascarilla Total-face NIV ClassicStar debe usarse en un solo paciente.

Información para pedidos

ClassicStar® SE	Unidades de empaquetado	Referencia
Mascarilla Total-face NIV ClassicStar® con codo estándar, uso en un solo paciente, talla S	1 unidad	MP02910
Mascarilla Total-face NIV ClassicStar® con codo estándar, uso en un solo paciente, talla M	1 unidad	MP02911
Mascarilla Total-face NIV ClassicStar® con codo estándar, uso en un solo paciente, talla L	1 unidad	MP02912
ClassicStar® AAV		
Mascarilla Total-face NIV ClassicStar® con válvula antiasfixia, uso en un solo paciente, talla S	1 unidad	MP02913
Mascarilla Total-face NIV ClassicStar® con válvula antiasfixia, uso en un solo paciente, talla M	1 unidad	MP02914
Mascarilla Total-face NIV ClassicStar® con válvula antiasfixia, uso en un solo paciente, talla L	1 unidad	MP02915
ClassicStar® AAV – sin puertos de espiración		
Mascarilla Total-face NIV ClassicStar® con válvula antiasfixia, sin puertos de espiración, uso en un solo paciente, talla S	1 unidad	MP02916
Mascarilla Total-face NIV ClassicStar® con válvula antiasfixia, sin puertos de espiración, uso en un solo paciente, talla M	1 unidad	MP02917
Mascarilla Total-face NIV ClassicStar® con válvula antiasfixia, sin puertos de espiración, uso en un solo paciente, talla L	1 unidad	MP02918

Observaciones

SEDE PRINCIPAL

Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Alemania
www.draeger.com

Fabricante:

Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Alemania

Localice a su representante
de ventas regional en:
www.draeger.com/contacto



SEDE REGIONAL

PANAMÁ

Draeger Panamá S. de R.L.
Business Park, Torre V, piso 10
Av. De la Rotonda
Panamá, República de Panamá
Tel +507 377-9100 / Fax -9130

VENTAS INTERNACIONALES

ARGENTINA

Dräger Argentina S.A.
Colectora Panamericana Este
1717B, 1607BLF San Isidro,
Buenos Aires, Argentina
Tel +54 11 4836-8310 / Fax - 8321

CHILE

Dräger Chile Ltda.
Av. Presidente Eduardo
Frei Montalva 6001-68
Complejo Empresarial El Cortijo,
Conchalí, Santiago
Tel +56 2 2482 1000 / Fax -1001

COLOMBIA

Draeger Colombia S.A.
Calle 93B No.13-44 Piso 4
Bogotá D.C.
Tel +57 1 63 58-881 / Fax -815

ESPAÑA

Dräger Medical Hispania S.A.
C/ Xaudaró 5, 28034 Madrid
Tel +34 91 728 34 00
Fax +34 91 358 36 19
clientesdraegermedical@draeger.com

MÉXICO

Dräger Medical México,
S.A. de C.V., German Centre
Av. Santa Fe, 170 5-4-14
Col. Lomas de Santa Fe
01210 México D.F.
Tel +52 55 52 61 43 37
Fax +52 55 52 61 41 32

PANAMÁ

Draeger Panamá Comercial
S. de R.L.
Calle 57B, Nuevo Paitilla,
Dúplex 30 y 31, San Francisco
Panamá, República de Panamá
Tel +507 377-9100 / Fax -9130

PERÚ

Draeger Perú SAC
Av. San Borja Sur 573-575
Lima 41
Tel +511 626 95-95 / Fax -73

PORTUGAL

Dräger Portugal, Lda.
Avenida do Forte, 6 - 6A
2790 - 072 Carnaxide
Tel +351 21 424 17 50
Fax +351 21 155 45 87