


FICHA TÉCNICA DE DISPOSITIVO MÉDICO

FICHA TÉCNICA No. FTDM-179V00

Sets para infusión - Sets de infusión de líquidos para bombas

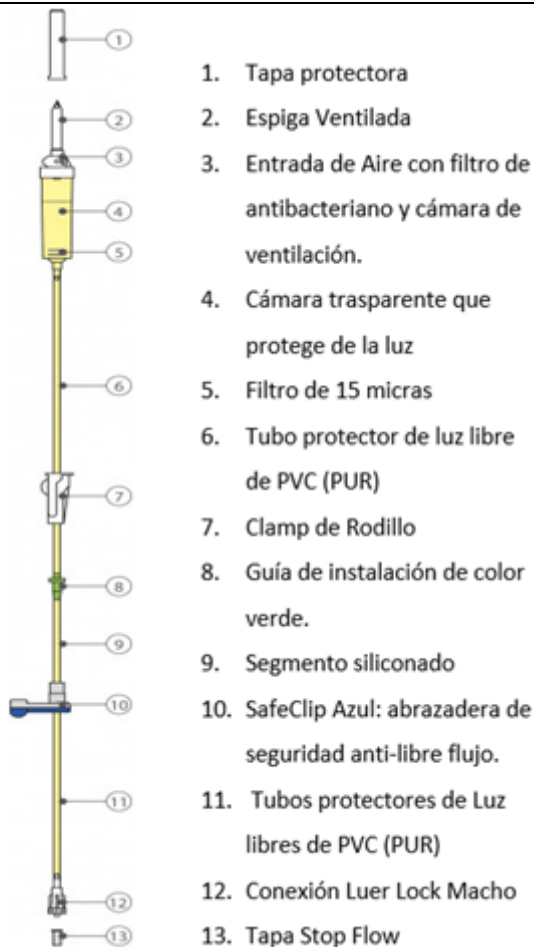

INFORMACIÓN BÁSICA

Nombre del producto	Set de infusión VL ON 90
Referencia	M46444900S
Descripción	Set para infusión epidural libre de PVC, opaco, con filtro de 15µ. Para infusión de: - Cualquier medicamento/liquido incluyendo medicamentos fotosensibles.

FICHA TÉCNICA DE DISPOSITIVO MÉDICO

	- Medicamentos que no tienen requerimientos particulares de filtración. - Medicamentos no compatibles con PVC, o que tengan interacciones con agentes plastificantes de PVC.
Presentación Comercial	Embalaje unitario para cada set. Caja de 30 unidades.
Marca	Fresenius Kabi
Uso o Destino	Los sets para infusión de líquidos son dispositivos médicos destinadas a la administración de soluciones enterales para la hidratación, alimentación y/o administración de fármacos por vía endovenosa por bomba de infusión o gravedad. Su aplicación es para las poblaciones de pacientes de neonatología, pediatría y adultos. Son dispositivos médicos estériles de un solo uso. Desechables.
Características Especiales	Longitud: Aprox. 270 cm. Volumen de cebado: Aprox. 25 mL. Materiales principales: PUR, PP, Silicona. • PUR y PP (Diámetro del tubo 3 x 4.1mm) • Silicona (Diámetro del tubo 3.41 x 5.11 mm) • Libre de PVC • Cámara de goteo fotoprotegida para visualización de flujo y protección de medicamentos fotosensibles adicionalmente cuenta con ventilación para disminución del vacío en contenedores rígidos. • Guía de instalación de color verde/azul para fácil posicionamiento en la bomba. • Segmento siliconado de amplia duración con función de disminución de alertas por aire en la línea. • Clamp anti libre flujo para evitar fugas de medicamento accidentales. • Clamp de rodillo para oclusión de la línea. • Tapa Stop-Flow para purga sin derrames ni desperdicios.
Clasificación del Riesgo	IIA
Tipo de Dispositivo	No invasivo
Registro Sanitario INVIMA	INVIMA 2020DM-0022076
Permiso de Comercialización	<i>No aplica.</i>
Tiempo de Vida Útil	Tres (3) años a partir de la fecha de fabricación.
Fecha Resolución	Resolución No. 2020031071 de 18 de septiembre de 2020.
Fecha Vencimiento Registro	18/09/2030

FICHA TÉCNICA DE DISPOSITIVO MÉDICO

Condiciones de Almacenamiento	Almacenar a una temperatura no mayor a 30°C en su empaque y envase original para mantener las condiciones de esterilidad originales.
Titular	Fresenius Kabi A.G., con domicilio en Alemania.
Fabricante	- Fresenius Kabi A.G., con domicilio en Alemania. - Clinico Medical SP Z.O.O., con domicilio en Polonia. - Fresenius Kabi (Nanchang) Co. Ltd., con domicilio en China.
Importador	Fresenius Kabi Colombia S.A.S. Bogotá D.C., Colombia.
Origen	- Alemania - Polonia - China

DATOS ADICIONALES

Características	- Segmento siliconado con código de colores que garantiza que no se deforme el set durante su uso y la correcta instalación del mismo en la bomba de infusión - El filtro de 15 µm retiene partículas evitando su paso hacia el paciente - Cámara de goteo ventilada que permite el manejo adecuado del flujo durante el uso de contenedores rígidos - Abrazadera de seguridad libre anti flujo. - Tapa StopFlow para purga sin derrames - No se utiliza DEHP como plastificante. - Libre de Látex y PVC - Equipo fotoprotector para medicamentos sensibles a la luz o que tengan interacciones con el PVC
-----------------	---

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Daniel Sneyder Rios Sandoval Analista Jr. de Asuntos Regulatorios	Cindy Hernandez Gerente de producto Application Devices	Luis Carlos García Melo Coordinador de Asuntos Regulatorios