

Ficha Técnica

Lanceta Estéril



IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Nombre:	Lanceta Estéril / Sterile Lancet.
Marca:	M&H Care.
Material:	La Lanceta Estéril de M&H Care es fabricada en PE (Polietileno) de baja densidad.
Color:	Azul oscura, Verde aguamarina, Verde, Morado, Azul claro, Azul aguamarina, Amarillo.
Medidas:	23G, 26G, 28G, 30G, 31G, 32G, 33G.
Presentación:	Caja interna x 50 unidades, caja máster x 10.000 unidades.

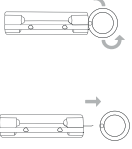
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Función:	La Lanceta Estéril de M&H Care de un solo uso, se utiliza principalmente para recolectar sangre de las partes periféricas del cuerpo humano para análisis de sangre. Es conveniente y seguro usar este producto para análisis de sangre, prueba de diabetes y extracción de sangre capilar.
Estéril:	Si. Óxido de Etileno.
Vigencia:	5 años a partir de la fecha de fabricación indicada en el empaque.
Almacenamiento:	Manténgase en un lugar fresco y seco. No superar 30°C de temperatura.
Uso:	Producto descartable para un solo uso. No reutilizar.
Empaque:	Cartón.
Clasificación de Riesgo:	IIA.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Resistente:		Si: ☒ No: ☐		Libre de Pirógenos:		Si: ☒ No: ☐					
No Tóxico:		Si: ☒ No: ☐		Práctico:		Si: ☒ No: ☐		Fácil de usar:		Si: ☒ No: ☐	

PROPIEDADES FÍSICAS

	ACCESORIOS	COMPONENTES PRINCIPALES	INSTRUCCIONES DE USO
	- La lanceta M&H Care tiene una aguja moldeada por inserción en un entorno plástico que consiste en una tapa y un cuerpo. - La aguja es afilada en el extremo para penetrar en la piel.	Aguja: Acero inoxidable. Tapa Protectora: Polietileno de baja densidad. Mango / Empuñadura: Polietileno de baja densidad.	- Lávese las manos antes de su uso. - Antes de usar la lanceta, verifique que este sellada. - Retire la cubierta protectora de la lanceta: Vea las instrucciones arriba. - Inserte la lanceta en el dispositivo de punción e inserte en el dedo. - Aplique una gota de sangre a la tira reactiva, limpie el exceso del dedo. - Para desechar la lanceta destape el dispositivo de punción y encaje su punta en la tapa de la lanceta de esta forma evitará punciones accidentales.

INFORMACIÓN CORPORATIVA

CÓDIGO INTERNO	PRESENTACIONES	NO. DE REGISTRO SANITARIO INVIMA
MH2016	Lanceta Estéril, 30G, caja máster x 10000 unidades.	2019DM-0019196
MH2017	Lanceta Estéril, 28G, caja máster x 10000 unidades.	2019DM-0019196
MH2040	Lanceta Estéril, 23G, caja máster x 10000 unidades.	2019DM-0019196
MH2041	Lanceta Estéril, 26G, caja máster x 10000 unidades.	2019DM-0019196
MH2042	Lanceta Estéril, 31G, caja máster x 10000 unidades.	2019DM-0019196
MH2043	Lanceta Estéril, 32G, caja máster x 10000 unidades.	2019DM-0019196
MH2044	Lanceta Estéril, 33G, caja máster x 10000 unidades.	2019DM-0019196

CERTIFICACIONES

CONTÁCTENOS

IMPORTADO POR

Este producto cuenta con las siguientes certificaciones:

- ISO 13485 SGC Dispositivos Médicos.

Email:
info@norstraynuart.com
Teléfono: +57 (1) 295 66 16

Norstray Nuart S.A.S.
Zona Franca Zofia, Manzana 7, Bod. 1,
Galapa, Colombia.
www.norstraynuart.com