


FICHA TECNICA																												
CATETER DIAGNOSTICO CURVA FIJA MAP-IT																												
MAP-IT® FIXED CURVE DIAGNOSTIC CATHETERS Map-iT® Fixed Quadripolar Catheter 																												
NOMBRE DEL DISPOSITIVO	CATETER DIAGNOSTICO CURVA FIJA PARA ELECTROFISIOLOGIA MAP-IT																											
TITULAR	MEDSAFE INTERNATIONAL LLC																											
MARCA	MAP-IT																											
TITULAR	MEDSAFE INTERNATIONAL LLC.																											
FABRICANTE	ACCESS POINT TECHNOLOGIES EP INC. (APT EP)																											
CIUDAD/PAIS DE ORIGEN	ESTADOS UNIDOS																											
IMPORTADOR	MEDISAFE INTERNATIONAL COLOMBIA																											
REGISTRO SANITARIO	INVIMA 2020DM-0021786																											
MODALIDAD DEL REGISTRO	Importar y vender																											
APROBACION REGISTRO	26/06/2020																											
VENCIMIENTO REGISTRO	26/06/2030																											
TIPO DE DISPOSITIVO	Invasivo																											
CLASIFICACION DE RIESGO	III																											
REFERENCIAS	<table><tr><td>CUADRIPOLES (5Fr)</td><td>CUADRIPOLES (6Fr)</td></tr><tr><td>901423</td><td>901450</td></tr><tr><td>901430</td><td>901451</td></tr><tr><td>901431</td><td>901452</td></tr><tr><td>901435</td><td>901453</td></tr><tr><td>901436</td><td>901454</td></tr><tr><td>901440</td><td>901455</td></tr><tr><td>901441</td><td>901456</td></tr><tr><td>901442</td><td>901457</td></tr><tr><td>901443</td><td>901458</td></tr><tr><td>901444</td><td>901459</td></tr><tr><td></td><td>901460</td></tr><tr><td></td><td>901461</td></tr></table>		CUADRIPOLES (5Fr)	CUADRIPOLES (6Fr)	901423	901450	901430	901451	901431	901452	901435	901453	901436	901454	901440	901455	901441	901456	901442	901457	901443	901458	901444	901459		901460		901461
CUADRIPOLES (5Fr)	CUADRIPOLES (6Fr)																											
901423	901450																											
901430	901451																											
901431	901452																											
901435	901453																											
901436	901454																											
901440	901455																											
901441	901456																											
901442	901457																											
901443	901458																											
901444	901459																											
	901460																											
	901461																											

ESPECIFICACIONES	Ancho de electrodo de punta.						
	Ref.	Tamaño.	#polos	Espacio inter-electrodos.	Curva	Largo en cm	Ancho del anillo
	901423	SF	4	10-10-10	CS	120	2
	901430	SF	4	10-10-10	MPB	120	2
	901431	SF	4	10-10-10	MPA	120	2
	901435	SF	4	5-5-5	MPB	120	2
	901436	SF	4	5-5-5	MPA	120	2
	901440	SF	4	2-5-2	MPB	120	2
	901441	SF	4	2-5-2	MPA	120	2
	901442	SF	4	2-5-2	RVA	120	2
	901443	SF	4	2-5-2	RVB	120	2
	901444	SF	4	2-5-2	HIS	120	2
	901450	6F	4	5-5-5	MPB	120	2
	901451	6F	4	5-5-5	MPA	120	2
	901452	6F	4	5-5-5	RVA	120	2
	901453	6F	4	5-5-5	RVB	120	2
	901454	6F	4	5-5-5	HIS	120	2
	901455	6F	4	2-5-2	MPB	120	2
	901456	6F	4	2-5-2	MPA	120	2
	901457	6F	4	2-5-2	RVA	120	2
	901458	6F	4	2-5-2	RVB	120	2
	901459	6F	4	2-5-2	HIS	120	2
	901460	6F	4	2-2-2	MPB	120	2
	901461	6F	4	2-2-2	MPA	120	2

Map-IT® Electrophysiology Catheters

CURVE REFERENCE CHART

Diagnostic Fixed Curve Catheters

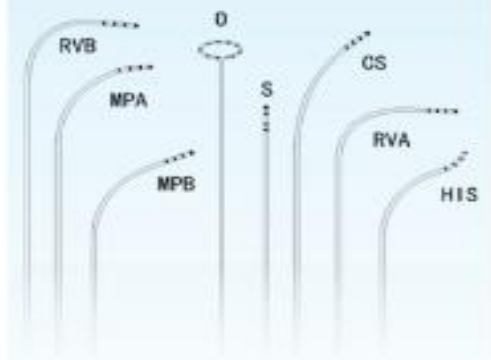

PRESENTACION COMERCIAL	Empaque individual
VIDA UTIL	2 años
USOS	Los catéteres para cartografía de diagnóstico MAP-IT están indicados para la evaluación de una variedad de arritmias cardíacas de sitios endocárdicos e intravasculares.
CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO	La tecnología de construcción trenzada de los catéteres MAP-IT, les permite mantener sus propiedades de control de toque, empuje y estabilidad, a lo largo de los procedimientos de electrofisiología. La punta atraumática suave (no trenzada), reduce los riesgos de perforación o inducción de arritmias no deseadas. Electrodos más pequeños que disminuyen el ruido eléctrico y obteniendo señales más nítidas y precisas.



	Los electrodos son fusionados desde la construcción del catéter, por lo cual no se usa ningún tipo de adhesivo, logrando una transición suave entre el catéter y el tejido de contacto. Cuenta con un mango ergonómico con diseño patentado, que permite movimientos finos y precisos de la punta del catéter. Deflexión suave y sencilla. Pistón ergonómico que evita síndrome del “pulgar entumecido” Impedancia eléctrica menor de 5 Ohms lo cual permite excelente calidad en los EGM.		
COMPATIBIIDAD CON OTROS DISPOSITIVOS	CATETERES CUADRIPOLES: conector 901950 Los pines de conexión de los conectores con el polígrafo son universales, compatibles con los sistemas disponibles en el mercado		
ELABORACION Y APROBACION			
Elaborado por:		Aprobado por:	
MONICA LUNA SANTANDER Gerente de Ventas Regional		DIEGO CONDE FERNANDEZ DEL PINO CEO & Founder	
FECHA:	25/01/2023	FECHA:	25/01/2023

CONNECTING DOTS



Carrera 6 No. 26 B 85 Piso 7 Tel. 3363019
Bogotá