


	FICHA TÉCNICA	VERSIÓN: 01
		FECHA VIGENCIA: 1/05/2021

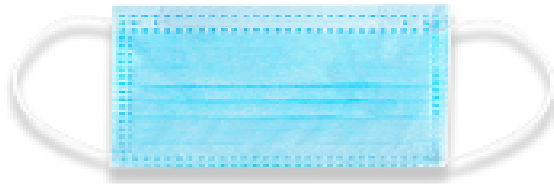

IDENTIFICACION DEL PRODUCTO

NOMBRE DEL PRODUCTO	MASCARILLA FACIAL DESECHABLE ADULTO CON ELASTICO, TRES CAPAS CON FILTRO MELT BLOW.
DESCRIPCIÓN	Tapabocas de sujeción a la oreja o a la cabeza, usado para protección general, cumple con la función de barrera microbina reduciendo el paso de fluidos corporales al exterior, tiene una filtración de más del 98% protegiendo el riesgo de exposición a partículas suspendidas en el aire.
USOS	Producto de uso personal, médico, industrial, en laboratorios, en el sector de alimentos.

COMPOSICIÓN

COMPONENTE	FUSIÓN	MATERIAL
Tela no tejida	Dos capas de tela no tejida con pliegues para mayor cobertura fácil	Tela quirúrgica poliéster
Filtro	Melt blow bfe 98,76% blanco	Melt blow
Sujeción	Cada tapabocas cuenta con dos elásticos o tiras de material no tejido con el fin de sostenerlos de forma segura.	Elástico o tiras en tela no tejida.
Soporte Nasal	Ajustable a la nariz, liviano, ajuste suave	Alambre cubierto de plástico

PRESENTACIÓN

EMPAQUE	DESCRIPCIÓN	MATERIAL	TOTAL UNIDADES	DIMENSIONES
BOLSA	TRANSPARENTE	POLIPROPILENO	1 UNIDAD	N/A
CAJA	MARCADA	MAULE	50 TAPABOCAS EN BOLSA INDIVIDUAL	N/A

PESO 4 GRAMOS APROXIMADAMENTE

CUALIDADES DEL PRODUCTO

1. Permite una respiración corriente.
2. Tiene filtro antibacterial con filtración de 98,76%
3. Fácil de ajustar
4. Material suave al contacto con la piel.
5. No genera partículas evitando alergias al contacto con la piel.
6. Sellado ultrasonido.

CONDICIONES DE USO

1. Lave las manos antes de abrir el sello de la bolsa.
2. Tómelo por los elásticos y llévelos a la parte posterior de las orejas.
3. El tapabocas es de un solo uso. Debe usarse máximo por un día
4. El tapabocas no se debe reciclar ni lavar
5. Después de usado debe desecharse en la basura con la bolsa marcada para residuos sanitarios.