

Mepilex® Border Flex

Maxima permanencia. Flexibilidad y comodidad.

- La tecnología Flex ofrece una excelente flexibilidad¹ y adaptabilidad a la piel para evitar que se desprenda prematuramente.²
- Capacidad comprobada para soportar más exudado que otros apósitos de borde de espuma.³
- Las pruebas muestran que **Mepilex® Border Flex** libera hasta 22 veces menos bacterias que otros apósitos.⁴
- El monitor de progreso del exudado le permite controlar y registrar objetivamente el exudado⁵, evitando cambios excesivos de apósito.
- Para uso en diversas heridas exudativas crónicas y agudas.⁶

Tecnología Flex: fijación y adaptación

- Flexibilidad de 360°
- Mejora la comodidad⁷⁻⁹
- Minimiza el riesgo de desprendimiento del producto²
- Fijación superior a otros apósitos *^{10,11}
- Reduce el estrés de la piel⁷⁻⁹

* En rodillas y codos en comparación con otros apósitos cuadrados.

Capa de retención

- Controla eficazmente tanto el exudado normal como el viscoso¹²
- Captura el exudado que contiene bacterias¹³
- En combinación con la capa de dispersión y la película auxiliar, ayuda a aumentar la tasa de transmisión de vapor de humedad del apósito¹²

Captura de bacterias

- La estructura de cinco capas de Mepilex® Border Flex sirve para absorber y retener el exudado que contiene bacterias y mantenerlo alejado de la herida, evitando que vuelva a entrar, incluso bajo compresión¹³

Safetac® Menos trauma. Menos dolor.™

Apósitos con Tecnología Safetac® son atraumáticos en la remoción¹. Estos apósitos minimizan el trauma en la herida y la piel perilesional^{2,3}, lo que disminuye el dolor en el paciente y el riesgo de maceración sellando los bordes de la herida.

Para más información visite www.molnlycke.com



Película auxiliar altamente transpirable

- Alta tasa de transmisión de vapor de humedad para un uso más prolongado³
- El monitor de progreso del exudado le permite realizar un seguimiento y registrar el progreso del exudado⁵
- Le permite verificar el color del exudado
- Funciona como barrera contra las bacterias¹⁴
- Resistente al agua, lo que permite a los pacientes ducharse normalmente¹⁵

Capa de dispersión

Distribuye el exudado sobre una amplia superficie para maximizar su transporte a la capa de retención y película auxiliar¹⁶

Capa de espuma

Absorbe el exudado y lo transporta a la capa de dispersión³

Safetac®
TECHNOLOGY



El desprendimiento de células de la piel ocurre con adhesivos tradicionales



No ocurre desprendimiento de células de la piel con Tecnología Safetac®

Mepilex® Border Flex

¿Cómo funciona Mepilex® Border Flex?

Creado para adaptarse y adherirse a la piel.

La tecnología Flex patentada crea una mayor adaptabilidad a la piel y proporciona un cambio de apósito más flexible que otros apósitos con bordes de espuma similares¹. Un apósito que se ajusta según el movimiento del paciente y se adhiere a la piel incluso durante el baño¹⁵.

Permite a los profesionales dedicar más tiempo a la atención al paciente.

Control Inteligente de Exudado.

El apósito de cinco capas absorbe y retiene el exudado, lo que le permite controlar su progreso. Al mantener el exudado alejado del lecho de la herida, esta tecnología evita que vuelva a entrar en contacto con él, incluso bajo compresión¹³. Tiene una mejor capacidad para controlar el exudado que los apósitos similares³ tanto para el exudado normal como para el viscoso¹².

Menos Dolor y menos trauma.

Se ha demostrado que la tecnología Safetac® produce menos dolor¹⁷ y menos trauma¹⁷ durante los cambios de apósito, además de un menor riesgo de maceración que los apósitos tradicionales (adhesivos)^{18,19}.

Áreas de Uso

Variedad de heridas exudativas crónicas y agudas⁶, tales como úlceras del pie diabético, úlceras vasculogénicas, lesiones por presión y heridas traumáticas. Disponibles en una variedad de formas y tamaños, nuestros apósitos se pueden usar en una variedad de heridas y se consideran la mejor solución de apósito de espuma para bordes.

Nota


Si nota signos de infección clínica, consulte a un proveedor de atención médica para recibir el tratamiento adecuado.

Precauciones

- No lo utilice en pacientes con alergia diagnosticada a los apósitos o sus componentes.
- En caso de infección, consulte a un profesional sanitario para que recete el tratamiento adecuado.
- El uso de apósitos como parte de la terapia profiláctica no descarta la necesidad de continuar con el protocolo de prevención de úlceras por presión, es decir, superficies de soporte, posiciones, nutrición, hidratación, cuidado de piel y movilidad.

Forma de utilización de Mepilex® Border Flex

1. Lávese las manos con agua tibia y jabón durante 20 segundos.
2. Limpie la herida según lo aconsejado por su enfermera y seque bien la piel circundante.
3. Asegúrese de que la almohadilla de la herida se superponga a la piel seca que rodea la herida al menos 1-2 cm.

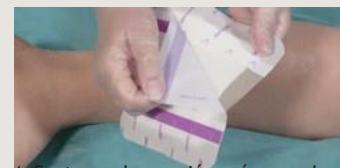

4. Sostenga la sección más grande del revestimiento antiadherente y retírelo parcialmente.



5. Coloque la parte adherente del apósito sobre la herida y aplíquelo.



6. Continúe quitando la sección más grande del revestimiento antiadherente y alise los bordes.



7. Retire el segundo revestimiento antiadherente y alise todos los bordes.

ALMACENAMIENTO: Lugar limpio y seco
METODO ESTERILIZACION: ETO

PROCEDENCIA: Finlandia
VIGENCIA: 3 años

CERTIFICACIONES:
ISO 9001, ISO 13485, CE 01965



CÓDIGO	TAMAÑO (CM)	UNIDADES POR CAJA	REG. INVIMA
595200	7.5 x 7.5	5	2020DM-0021620
595300	10 x 10	5	2020DM-0021620
595400	15 x 15	5	2020DM-0021620
595600	15 x 20	5	2020DM-0021620

PRESENTACIONES Mepilex® Border Flex

Referencias: 1. Referências: 1. Mölnlycke Health Care. Mepilex® Border Flex - Conformability N° do relatório PD-528870. Dados em arquivo. 2. Alten. Comparison of Mepilex® Border Flex dressing and Mepilex® Border dressing in wet condition. N° do relatório PD-530246. 18 de Janeiro de 2017. Dados em arquivo. 3. Mölnlycke Health Care. Mepilex® Border Flex - Fluid handling capacity compared to Urgotul Foam Absorb Border. Aquacel Foam, Allevyn Classic Gentle Border, Allevyn Life, Optifoam Gentle, KerriFoam Gentle Border. N° do relatório PD-527642. Dados em arquivo. 4. Karlsson et al. Bacterial trapping of a newly developed all-in-one soft silicone foam dressing. Poster. EWMA, Cracóvia 2018. 5. Mölnlycke Health Care. Mepilex® Border Flex - Product Manual - Dot Pattern. N° do relatório PD-528872. Dados em arquivo. 6. Mepilex® Border Flex Instructions for Use. Dados em arquivo. 7. Mölnlycke Health Care. Mepilex® Border Flex - External data - FEM simulations Mx8 Flex vs Allevyn Life. N° do relatório PD-529747. Dados em arquivo. 8. Mölnlycke Health Care. FEM - Mepilex® Border Flex vs Optifoam gentle. N° do relatório PD-534569. Dados em arquivo. 9. Mölnlycke Health Care. FEM - Mepilex® Border Flex vs Aquacel foam. N° do relatório PD-534571. Dados em arquivo. 10. Relatório do estudo ProDerm 16.0180-23. Assessment of Wearing Properties of Wound Dressings on the Knees. PD-535012. 11. Relatório do estudo ProDerm 16.0180-23. Assessment of Wearing Properties of Wound Dressings on the Elbows. PD-535013. 12. Mölnlycke Health Care. Mepilex® Border Flex - Absorption and dispersion tests on inclined plane, viscous test solution. N° do relatório PD-528871. Dados em arquivo. 13. Mölnlycke Health Care. Mepilex® Border Flex - Bacteria encapsulation. N° do relatório PD-537072. Dados em arquivo. 14. Mölnlycke Health Care. Product Manual Mepilex® Border Flex - Viral penetration. N° do relatório PD-535090. Dados em arquivo. 15. Mölnlycke Health Care. Mepilex® Border Flex - Waterproofness. N° do relatório PD-532095. Dados em arquivo. 16. Mölnlycke Health Care. Mepilex® Border Flex - Spreading layer spreads exudate evenly across the surface. N° do relatório PD-528874. Dados em arquivo. 17. White, R. A multinational survey of the assessment of pain when removing dressings. Wounds UK 2008;4(1):14-22. 18. Woo, K., Coutts, P.M., Price, P., Harding, K., Silbald, R.G. A randomised crossover investigation of pain at dressing change comparing two foam dressings Advances in Skin and Wound Care 2009;22(7):304-310. 19. Van De Looerbosch, D., Andersson, A., Husmark, A., Körner, V. An open randomized explorative study comparing Mepilex® Border with Telle in patients with pressure ulcers according to stage II, EPUAP guidelines (Clinical Investigation Report (MPXB2011), Mölnlycke Health Care, 2001). 20. Meaume, S., Van De Looerbosch, D., Heyman, H., Romanelli, M., Ciangherotti, A., Charpin, S. A study to compare a new self-adherent soft silicone dressing with a self-adherent polymer dressing in stage II pressure ulcers. Ostomy Wound Management 2003;49(9):44-52. 21. Rippon, M., Davies, P., White, R., Taking the trauma out of wound care: the importance of undisturbed healing. Journal of Wound Care 2012; 21 (8): 359-368. 22. Mölnlycke Health Care. Mepilex® Border Flex - threepart release liner. N° do relatório PD-530091. Dados em arquivo.

Distribuidor Autorizado
CROSSWELL DE COLOMBIA S.A.S.
NIT. 900.968.509-6
Carrera 38 A No. 6-54 - Cali
Calle 125 No. 21 A - 27 Of. 301 - Bogotá
e-mail: servicioalcliente@crosswellcol.com



Crosswell de Colombia S.A.S.