

Mepilex® Lite

Espuma de Poliuretano Extrafina con Tecnología Safetac®.

- Atraumático durante la retirada, no daña la piel circundante ni afecta la herida.
- Disminuye el dolor en el paciente durante la retirada.
- Minimiza el riesgo de maceración.
- Se adapta a los contornos del cuerpo.
- Delgado y cómodo de llevar.
- Fácil de manejar.
- Mantiene un medio ambiente húmedo.
- Se puede moldear con tijeras de acuerdo a la medida requerida para cubrir la herida.

Mepilex® Lite puede usarse en heridas infectadas bajo la vigilancia de un profesional de la salud.



Film posterior color Piel

- Permeable a gases.
- Impermeable a líquidos.
- Barrera efectiva contra virus y bacterias*.

*Microbios mayores de 25nm.

Cuerpo absorbente de espuma

- Absorbe el exudado.
- Se adapta a los contornos del cuerpo.
- Mantiene la integridad.

Safetac®
TECHNOLOGY

Suave capa de silicona Safetac®

- Atraumático para la herida y la piel perilesional.
- Minimiza el riesgo de maceración

Safetac® Menos trauma. Menos dolor.™

Apósitos con Tecnología Safetac® son atraumáticos en la remoción¹. Estos apósitos minimizan el trauma en la herida y la piel perilesional²,³, lo que disminuye el dolor en el paciente y el riesgo de maceración sellando los bordes de la herida.

Para más información visite www.molnlycke.com



El desprendimiento de células de la piel ocurre con adhesivos tradicionales



No ocurre desprendimiento de células de la piel con Tecnología Safetac®

Mepilex® Lite

¿Cómo funciona Mepilex® Lite?

Mepilex® Lite es un apósito que absorbe el exudado y mantiene un medio húmedo en la herida, previniendo que el exudado macere la piel de alrededor de la herida, disminuyendo así el riesgo de maceración. La capa Safetac® asegura que los cambios de apósito sean atraumáticos. Mepilex® Lite puede cortarse adaptándose a la forma y localización necesaria.


Indicaciones

Mepilex® Lite es un apósito que absorbe el exudado y mantiene un medio húmedo en la herida, previniendo que el exudado penetre en la zona de alrededor, disminuyendo así el riesgo de maceración. La capa Safetac® asegura que los cambios de apósito sean atraumáticos. Mepilex® Lite puede cortarse adaptándose a la forma y localización necesaria.

Precauciones

No utilizar en pacientes con Hipersensibilidad diagnosticada a los apósitos o a sus materiales


Forma de utilización de Mepilex® Lite

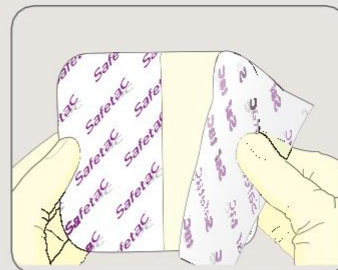

1. Limpiar la herida con suero salino. Secar la piel de alrededor. Retirar los papeles protectores.



2. Colocar la capa adherente sobre la herida. No estirar. Mepilex® Lite debe cubrir la piel de alrededor al menos 2 cm. Si es necesario, Mepilex® Lite se puede cortar.

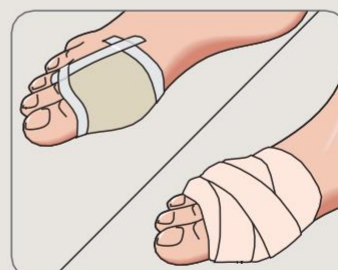

3. Fijar Mepilex® Lite con un vendaje o cualquier otra fijación cuando sea necesario.

ALMACENAMIENTO: Lugar limpio y seco
METODO ESTERILIZACION: ETO
PROCEDENCIA: Finlandia
VIGENCIA: 3 años

CERTIFICACIONES:
ISO 9001, ISO 13485, CE 01965



CÓDIGO	TAMAÑO (CM)	UNIDADES POR CAJA	REG. INVIMA
284090	6 x 8.5	5	2020DM-0021620
284190	10 x 10	5	2020DM-0021620
284390	15 x 15	5	2020DM-0021620
284599	20 x 50	4	2020DM-0021620

PRESENTACIONES Mepilex® Lite

Distribuidor Autorizado
CROSSWELL DE COLOMBIA S.A.S.
NIT: 900.968.509-6
Carrera 38 A No. 6-54 - Cali
Calle 125 No. 21 A - 27 Of. 301 - Bogotá
e-mail: servicioalcliente@crosswellcol.com




Mölnlycke®
www.molnlycke.com