


INTRODUCCION

La mascarilla de concentración media es un método sencillo para el suministro de oxígeno.

Es útil para los pacientes que requieren un tratamiento no muy prolongado.

El flujo recomendado en adultos es de 5 a 10 litros por minuto ofreciendo una mezcla de oxígeno entre un 40 a un 60 por ciento.

2 lpm	28% de oxígeno
4 lpm	40% de oxígeno
6 lpm	53% de oxígeno
8 lpm	60% de oxígeno

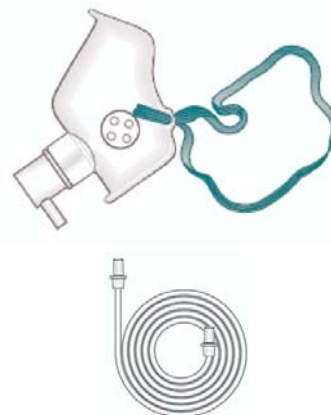

A mayores flujos es una alternativa desaconsejable, al resecar el epitelio nasal y conjuntival provocando irritaciones. En estos casos es preferible el uso de otras alternativas terapéuticas.

INTERSURGICAL

Línea antioclusión

La línea está diseñada con una luz estrellada, para evitar la total oclusión de esta en el caso de estar sometida a torsiones o presiones.

Calidad asegurada

Fabricado según los más altos niveles de calidad internacional, incorporando el código de barras basado en la normativa EAN-128 del Comité Europeo de normalización.

Fabricado en plástico grado médico

Sin olores.

Transparentes

Producto Libre de Látex

Pinza de ajuste nasal

Presente en las referencias de conexión fija

Instrucciones de uso en español.

- ✓ **Productos Exentos de Látex.** Esto se indica tanto en las cajas como en cada envase individual.

CONEXIÓN GIRATORIA			CONEXIÓN FIJA		
Referencia	Descripción	unidades por caja	Referencia	Descripción	unidades por caja
1104	Adulto	70	1115	Adulto + línea de 1.8 m	50
1105	Adulto + línea de 1.8 m	50	1116	Adulto	70
1106	Mediana	70	1190	Pedriátrica	50
1140	Pedriátrica	50	1196	Pedriátrica + línea de 1.8 m	50
1146	Pedriátrica + línea de 1.8 m	50			

