


INTRODUCCIÓN

¿Qué es el gas Heliox?

- Composición: 21% O₂ – 79% He (en lugar del 79% N del aire inspirado)
- Dos tercios menos denso que el aire
- Reduce la resistencia en las vías aéreas
- Reduce el trabajo respiratorio
- Reduce las turbulencias en vías aéreas superiores. La turbulencia es en parte la responsable del depósito prematuro del aerosol en las vías aéreas superiores

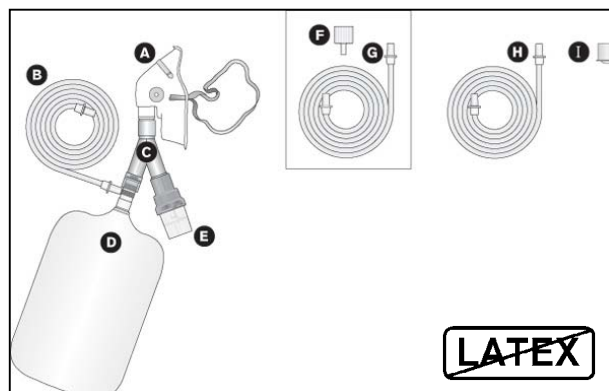

Es beneficioso para el intercambio gaseoso, sobre todo en la ventilación alveolar, ya que el CO₂ difunde más rápido en Heliox que en aire

Producto completo

Lista para su uso.

Tres formas de utilizarlo:

1. Administración de Heliox con nebulización.
2. Administración de Heliox.
3. Administración de Heliox más oxígeno.

Fabricado en plástico grado médico

Transparente

Sin olores

Libre de Látex

Línea antioclusión

La línea está diseñada con una luz estrellada, para evitar la total oclusión de esta en el caso de estar sometida a torsiones o presiones.

Bolsa reservorio

Ligera, con entramado interno que evita riesgos de colapso y facilita su inflado.

Es una buena referencia visual de la respiración del paciente.

Tamaños adulto y pediatría

✓ **Productos Exentos de Látex.** Esto se indica tanto en las cajas como en cada envase individual.

Referencia	Descripción	Unidades /caja
1420	Kit Nebulizador de Heliox Adulto	12
1419	Kit Nebulizador de Heliox Pediatría	15



INTERSURGICAL S.A.
PRODUCTOS MEDICOS DESECHABLES

C/ Plasencia 39, Pol. Ind. Las Nieves, 28935 Móstoles, Madrid
Teléfono: 916657315, Fax: 916855099