


ELRA™

Electrodo endoluminal de la ablación por radiofrecuencia

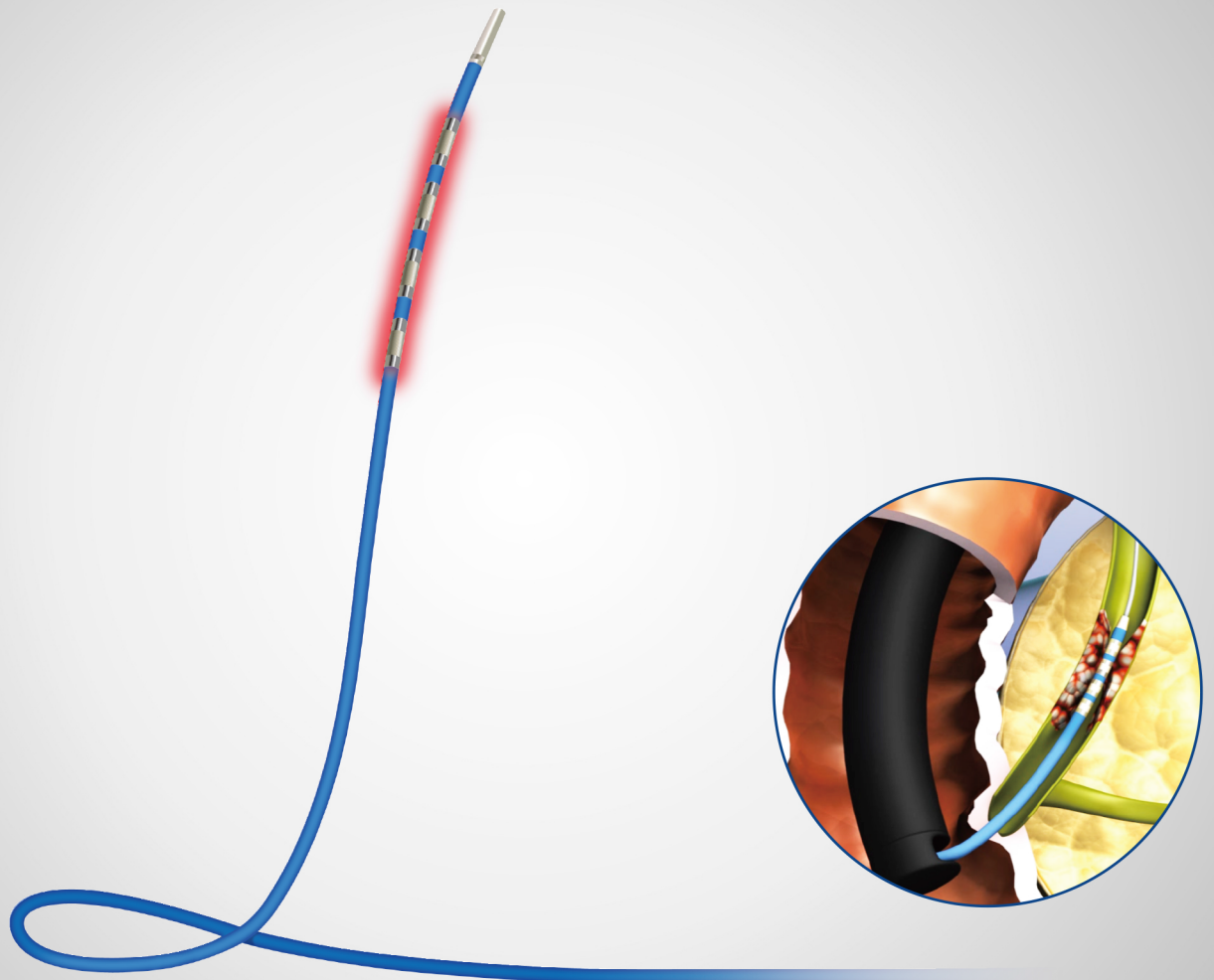

Global representative

Bldg.C 4F, 158 Haneulmaeul-ro, ilsandong-gu, Goyang-si, Gyeonggi-do, Korea 10355
E: contact@stent.net T: +82 31 904 6153 F: +82 31 904 6157

Manufacturer

Bldg.B 4F, 158 Haneulmaeul-ro, ilsandong-gu, Goyang-si, Gyeonggi-do, Korea 10355
E: info@STARmed4u.com T: +70 4673 8614 F: +82 0506 816 4546


www.taewoongmedical.com



Tratamiento de la obstrucción biliar

Características




- Con ablación basada a temperatura se puede realizar procedimiento seguro y evita la carbonización del tejido para disminuir cualquier posibilidad de perforación.

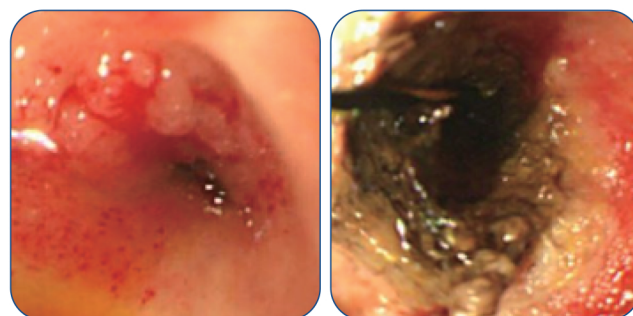


Antes de Ablación vs Después de Ablación

[hígado de bovino]

condiciones de ajuste: 2 min 10 vatios

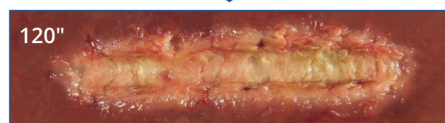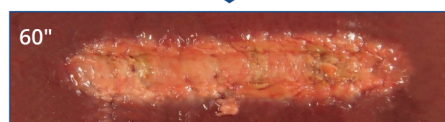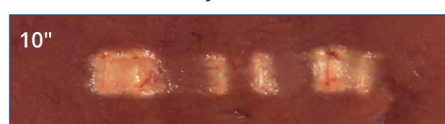

- Electrodo bipolar múltiple proporciona ablación lineal y no hay necesidad de colocar almohadillas de tierra.
- Las distintas longitudes del electrodo ayuda para una correcta ablación.

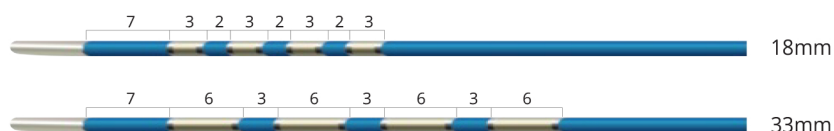

ELRA™ solo funciona con el generador VIVA Combo™

Información para pedidos

Vía endoscópica			
Código	Longitud Total (cm)	Longitud Expuesta (cm)	Diámetro
7-4B18L	175	18	7Fr (2.31mm)
7-4B33L		33	

Vía percutánea			
Código	Longitud Total (cm)	Longitud Expuesta (cm)	Diámetro
7-4B18S	40	18	7Fr (2.31mm)
7-4B33S		33	