FICHA TÉCNICA



SISTEMA UPLIFT ES PARA LA SACROCOLPOPEXIA LAPAROSCÓPICA KIT.

INFORMACIÓN PRODUCTO

Marca: NEOMEDIC (DIMA S.L.)
Referencia/Nombre comercial:

KITUPL04-05

Registro sanitario INVIMA:

2020DM-0021622 Vigencia 19/05/2030

Unidad de medida: Unidad

Certificados: UNE-EN ISO 13485 : 2016



DESCRIPCIÓN Y APLICACIÓN

Sistema Uplift es un novedoso sistema para la sacrocolpopexia laparoscópica, permitiendo el tratamiento de diferentes patologías del suelo pélvico mediante una técnica mínimamente invasiva y sin necesidad de abordajes vaginales. El origen de esta patología se encuentra en la debilidad de los tejidos que soportan estas estructuras manteniéndolos en su posición dentro del suelo pélvico. El sistema reconstruye las estructuras que lo sostienen, reposicionando los órganos en su posición natural.


• ESTERILIZACIÓN: ETO (Oxido etilieno)

DESCRIPCIÓN Y APLICACIÓN

- Malla de monofilamento de polipropileno.
- Aplicador de acero inoxidable y POM.
- Microarpón de PEEK.
- **Presentación:** Caja. Incluye Malla en empaque con contenido estéril, suministrados en caja de cartón con lotes y fechas impresas.


CARACTERISTICAS MECÁNICAS DE LA MALLA

POROSIDAD	55,3%
DENSIDAD DE LA MALLA g /m2	28 g / m2
ESPESOR DE LA MALLA	0,40 mm
DIÁMETRO DEL HILO	0,08 mm (USP 6-0)
RESISTENCIA A LA ROTURA	48 N / cm
CLASIFICACIÓN AMID	AMID I (macroporo)

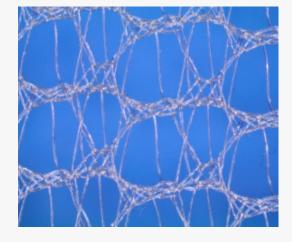


COMPONENTES QUE SE INCLUYEN EN LA CAJA/UNIDAD

MALLA (1 UNIDAD)

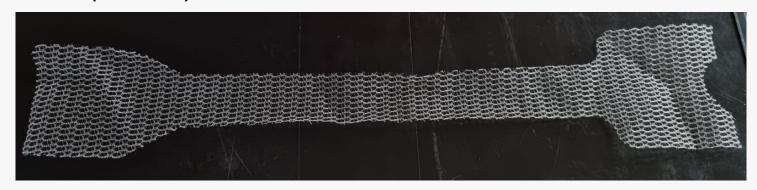

Se trata de una malla de una sola pieza, pre-cortada con láser para la reparación del prolapso de cúpula vaginal. Utiliza un sistema laparoscópico de arpón para anclar la malla al ligamento Sacro Promontorio.

MEDIDAS: MALLA UPLIFT

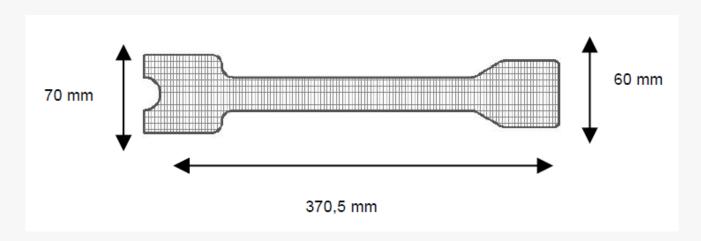


CONJUNTO DEMINI ARPONES (5 UNIDADES)





Puntas de Flecha que fijan la malla al promontorio sacro. Fabricados en PEEK (Poliéster-éstercetona, material altamente biocompatible – Norma ISO (10993). Con lumen en su interior para evitar la formación de hematomas y contribuir a la integración. La parte superior en forma de X aplanada, evita lesión del peritoneo. Presentación en dispensador para facilitar la carga en el aplicador.

MEIDAS MINI ARPONES

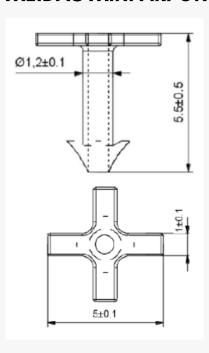

Diámetro de microarpon: 1.2mm, longitud de microarpon 5,5mm.

Largo de las aspas: 5 mm, ancho de cada aspa: 1mm.


MANGO APLICADOR DE ARPONES LAPAROSCOPICO (1 UNIDAD)






Permite introducir de forma fácil y segura los microarpones y fijar la malla en el promontorio sacro, es altamente seguro ya que mantiene oculta la punta del arpón hasta que el cirujano haya ubicado su lugar de inserción. Se proporciona estéril.

MEDIDAS: MANGO APLICADOR DE ARPONES LAPAROSCOPICO

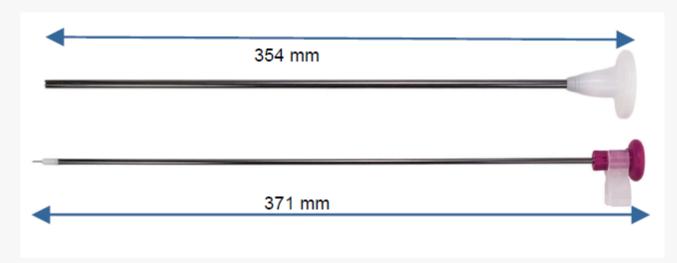





KIT UPLIFT COMPLETO

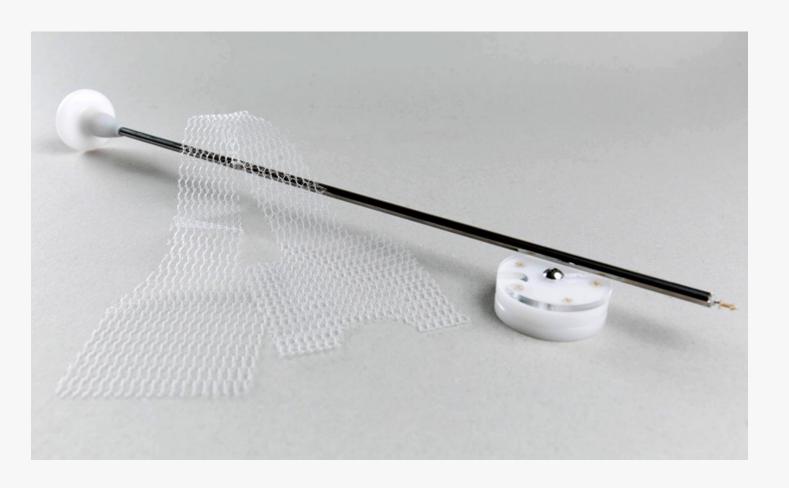



MALLA UPLIFT EN EL CUERPO HUMANO

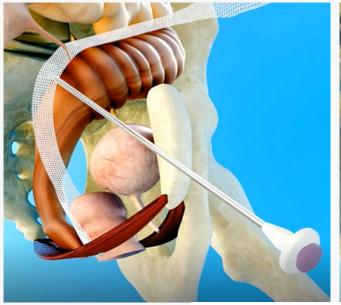

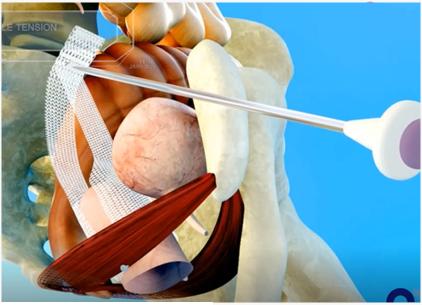





INFORMACIÓN DE CONTACTO



(604) 261 04 05 Carrera 43A No. 19A - 87 Oficina212 Medellín, Antioquía.



contacto@invivo.com.co www.invivo.com.co



Instagram: @invivobioingenieria Facebook: Invivo Bioingeniería S.A.S



- Gestión Tecnológica en Salud

Elaborado por: Juan Esteban Parra Tavera **Revisado por:** Lorena Valencia Salazar **Aprobado por:** Hugo Orlando Rebolledo B.

Formato Versión Coordinador de Compras Líder Comercial Gerente General Código FT-05 02 10/03/2022 14/03/2022 14/03/2022