





Elementos de
protección personal

Ficha técnica - PT03001NE

MASCARILLA QUIRÚRGICA 4 TIRAS

Página 1 de 1 Versión: FT1

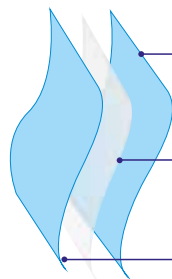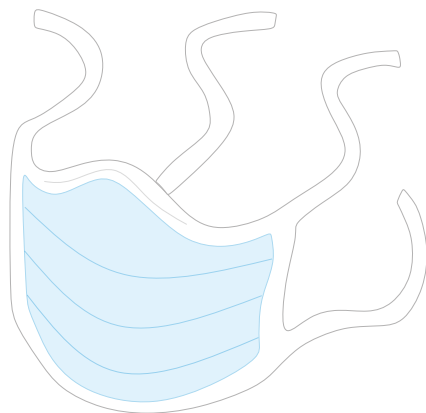

1 Capa interna Spunbond

2 Capa media Meltblown

3 Capa externa Spunbond

Información

Referencia	Unidad de empaque	
	Primario	Gran empaque
PT03001NE	Caja display x 50 uds.	40 Cajas display = 2.000 uds.

Características

- **Protección:** Eficiencia de filtración bacteriana mayor a 95% (BFE). Es una prueba de laboratorio que mide la eficiencia de la mascarilla quirúrgica para filtrar bacterias, es decir, el grado de protección que la mascarilla ofrece, requerido por la (AORN) Asociación de Enfermeras de Salas de Quirófano.
- **Confortable y suave.**
- **Ajustable:** Se ajusta cómodamente el contorno de la nariz por un alma moldeable.
- **Composición:** Se forma por dos capas de SPUNBOND (interna y externa) y una capa intermedia que constituye un filtro bacteriano.
- **USO ÚNICO.**

Usos recomendados

- Quirófano.
- Hospitalización.
- Aislamiento.
- Urgencias.



Vida útil

- No estéril: 5 Años

Condiciones de almacenamiento y transporte

- Si la bodega cuenta con ventanas, deben tener protección contra la contaminación externa.
- Temperatura homogénea menor a 35°C.
- Humedad relativa 80%.
- El lugar de almacenamiento/transporte no debe tener filtraciones o goteras.
- Los pisos, superficies y estanterías deben ser limpiados con paños húmedos con el fin de no levantar polvo.
- No se deben usar ni aerosoles, ni spray para desinfectar o aromatizar. Se debe combatir la presencia de plagas como insectos o roedores.
- Los dispositivos deben estar ordenados en estanterías y nunca en forma directa sobre el piso y/o la pared.
- Se recomienda que el transporte sea exclusivo para manejo de dispositivos médicos o insumos del sector salud.

Disposición final

- Después del uso, se debe separar en la fuente como residuo peligroso infeccioso o de riesgo, para luego desechar de acuerdo con la normatividad legal vigente de cada país y sus localidades.