
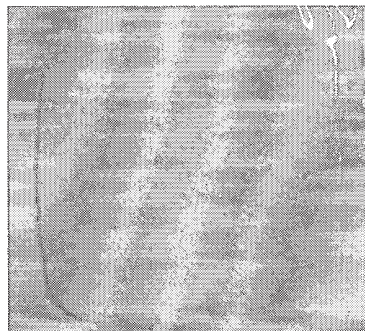
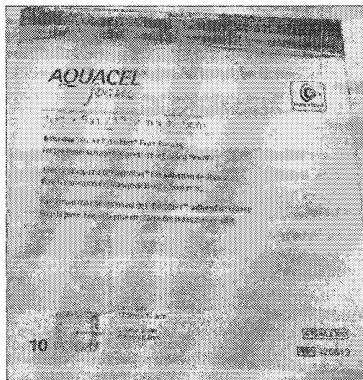


**FICHA TECNICA**  
**APOSITO DE ESPUMA CON HIDROFIBRA**  
**AQUACEL FOAM – ADHESIVO & NO ADHESIVO**

PRODUCTO	
Nombre Genérico	<b>Apósito de Espuma con hidrofibra™ - Adhesivo &amp; No Adhesivo</b>
Nombre Comercial	<b>Apósito de Espuma : “Aquacel Foam” Adhesivo &amp; No Adhesivo</b>
Descripción	Es un apósito estéril que se utiliza en el cuidado de las heridas y está compuesto por una suave espuma que absorbe un alto nivel de exudado debido a su tecnología de hidrofibra 100% carbometilcelulosa , la cual también permite atrapar bacterias y virus. Por su acción de transmisión del vapor de humedad garantiza la No maceración de la piel. El borde adhesivo de silicona tiene una excelente adherencia , sin ser oclusivo , de fácil remoción sin lesionar la piel.
Marca	ConvaTec
Fabricante	ConvaTec Inc – Estados Unidos
Composición del Producto	Componentes para Aquacel™ Foam Adhesivo son: Película de Cubierta externa de Poliuretano, Espuma de Poliuretano & silicona trilaminada, Capa de Poliamida e hidrofibra 100% carbometilcelulosa. Componentes para Aquacel™ Foam No Adhesivo son: Película de Cubierta externa de Poliuretano, Espuma de Poliuretano, Capa de Poliamida e hidrofibra 100% carbometilcelulosa.
Usos	Los apósitos Aquacel™ Foam pueden ser utilizados para Abrasiones, Laceraciones, Cortes menores, Escaldaduras y quemaduras menores Bajo la supervisión de un profesional de la salud, puede ser utilizado en el tratamiento de heridas crónicas y agudas, tales como: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Úlceras vasculares, úlceras por presión (Estadio II-IV) y úlceras de pie diabético.</li> <li>• Heridas quirúrgicas (post-quirúrgicas, zonas donantes, dermatológicas);</li> <li>• Quemaduras de espesor parcial (segundo grado);</li> <li>• Heridas traumáticas o quirúrgicas que se dejan cicatrizar por segunda intención tales como dehiscencias de incisiones quirúrgicas</li> <li>• Heridas quirúrgicas que cicatrizan por primera intención, tales como incisiones quirúrgicas y dermatológicas (por ejemplo ortopédicas y vasculares);</li> <li>• Tratamiento local de heridas con tendencia al sangrado, tales como heridas que han sido desbridadas quirúrgicamente o mecánicamente y zonas donantes;</li> </ul>
Recomendaciones de uso	Se recomienda leer el instructivo de aplicación disponible en el empaque antes de su aplicación. Puede utilizarse como apósito primario o secundario.

Registro Sanitario	INVIMA 2012DM-0009243 VIGENCIA: OCTUBRE 23 DE 2022.
Presentaciones:	<p>Apósitos Formato Adhesivo</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 10 cm x10 cm (Cj x 10)</li> <li>- 12.5cm x 12.5 cm (Cj x 10)</li> <li>- 17.5 cm x 17.5 cm (Cj x 10)</li> <li>- 21 cm x 21 cm (Cj x 5)</li> <li>- 25 cm x 30 cm (Cj x 5)</li> <li>- 19.8 cm x 14 cm (Cj x 5 Talón)</li> <li>- 20 cm x 16.9 cm (Cj x 5 Sacro)</li> </ul> <p>Apósitos Formato No Adhesivo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 5 cm x 5 cm (Cj x10)</li> <li>- 10 cm x10 cm (Cj x10)</li> <li>- 15 cm x 15 cm (Cj x 5)</li> <li>- 20 cm x 20 cm (Cj x 5)</li> <li>- 15 cm x 20 cm (Cj x 5)</li> </ul>

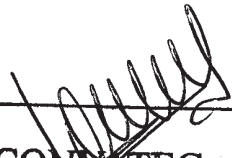

  
**CONVATEC**  
 Boston Medical Device  
 De Chile S.A.